



Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco

Índice

1	Sistemas relacionados	4
2	Manual do Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco - Versão CLASRISCO.02.042 (1ª ed.)	5
2.1	O que há de novo?	5
2.2	Glossário	5
2.3	Navegação básica	8
2.3.1	Objetivo	8
2.3.2	Compreensão	8
2.4	Fluxos dos processos	11
2.4.1	Acolhimento com classificação de risco	11
2.4.2	Classificação de risco	12
2.5	Menu - Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco	12
2.5.1	Configuração	14
2.5.2	Operacional	64
2.5.3	Atendimento	69
2.5.4	Auditoria - Tipos	84

Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco

O Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco (MV SACR) é uma ferramenta indispensável para a priorização de atendimento aos pacientes, de acordo com a gravidade clínica de cada um. Nas urgências dos hospitais, a ordem de chegada tem de ser substituída pela ordem de necessidade clínica e a triagem realizada pela equipe responsável é facilmente controlada por esse sistema. Integrado com os sistemas de atendimento ao paciente do MV2000 e SOUL MV, ele organiza a lista de atendimentos pelo estado de saúde dos enfermos, categorizando aqueles que precisam de uma atenção médica mais rápida.

O diferencial desse sistema é o seu agradável cenário, ambiente interativo, método de trabalho intuitivo e principalmente, a sua eficácia no que diz respeito a triagem de atendimentos. Além disso, o software foi desenvolvido por meio da tecnologia flex e possibilita a inserção de quaisquer informações que possam complementar os protocolos utilizados no processo de classificação de risco, o que facilita a adequação do sistema ao processo praticado nas instituições de saúde, além de contemplar um vasto grupo de configurações que o torna um sistema sensível a parametrizações.

O Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco é baseado em normas mundiais do serviço de urgência adequadas às nomenclaturas, aos termos, às definições, às metodologias e t c . , v i s a n d o fomentar o seu principal objetivo ligado ao apoio na melhoria de atendimento ao paciente. Os elementos que agrupam uma metodologia são chamados de protocolos. Há hospitais que os implementaram em seu cotidiano. Entretanto, existem instituições que optam em customizar um ciclo de de procedimento, o que não deixa de ser um princípio para criar-se novos protocolos. E, como não poderia ser diferente, esse sistema é estruturado de uma forma que suporta a elaboração de novos protocolos.

Lembrando que, o sistema pode ser executado via Terminal Service ou CITRIX.

Sistemas relacionados

MV2000:

- GLOBAL - Gerenciamento de Tabelas;
- PAEU - Urgência/Emergência;
- PAGU - Gerenciamento de Unidades;
- PARI - Gerenciamento de Internação;
- SGU - Gerenciamento de Usuário.

SMA:

- Gestor de Fluxo;
- MV Painei;
- MV Painei Recepção;
- MV Totem Senha;
- Prontuário Eletrônico do Paciente versões 01 e 02.

SOUL MV:

- [Global](#);
- [Urgência e Emergência](#);
- [Gerenciamento de Unidades](#);
- [Internação](#);
- [Gestão de Usuários](#).

Manual do Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco - Versão CLASRISCO.02.042 (1ª ed.)

Pesquisa

O que há de novo?

Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias realizadas para a versão CLASRISCO.02.042. Essas informações foram revisadas e, quando adequado, incorporadas a esta nova versão do manual.

As principais diferenças entre a última versão publicada e a atual são resumidas a seguir:

- Alteração para permitir informar uma observação de conformidade das triagens, na tela de "Auditoria Interna".
- Modificação para converter as fotos cadastradas anteriormente no formato "TIFF" para o formato "JPEG" na tela de "Dados do Paciente".
- Alteração no fluxograma "Classificação de Risco" para adequação ao padrão.

Glossário

Acesso rápido

A, C, D, E, F, P, Q, R, S, T, U.

A

- **Acolhimento** - é a ação costumeiramente realizada pela equipe de enfermagem ao abordar os pacientes de urgência. Nela estão contidos os processos de triagem do atendimento, classificação de risco, aferição, avaliação, enfim, todo o procedimento que agrega valor para diagnosticar a situação dos enfermos. Com base nos dados colhidos no atendimento, o médico viabiliza a abordagem e procedimentos adequados para cessar os problemas do paciente em questão.
- **Aferição** - trata-se da verificação de medidas, pesos, instrumentos de medidas, onde faz-se valer a comparação do resultado com padrões estabelecidos. Exemplo: Aferir a pressão arterial de um paciente.
- **Avaliação** - ação ou resultado de avaliar. Estimativa do valor ou importância de algo. Valores atribuídos por quem avalia. No Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco, a avaliação interpreta resultados inerentes aos discriminadores destinados aos pacientes, com a finalidade de gerar um diagnóstico sobre seu estado clínico.

C

- **Classificação de risco** - nível de gravidade atribuído ao estado clínico em que o paciente se encontra ao chegar na instituição de saúde em busca de atenção médica. Com base na categorização do risco, a equipe de acolhimento classifica e organiza as prioridades do atendimento na unidade de urgência e emergência.

D

- **Dado antropométrico ou antropometria** - conjunto de técnicas utilizadas para medir o corpo humano ou suas partes. Exemplo: Altura, Comprimento, Perímetro Abdomen, Perímetro Perna, entre outros.
- **Discriminador** - são fatores que realizam a distinção de pacientes permitindo sua inclusão dentro das prioridades clínicas emergenciais estabelecidas.
- **Dor** - sensação de menor ou maior intensidade que causa incômodo nos indivíduos. Além do desconforto físico, a dor pode ser causada por amargura, perda, tristeza, pena, etc. Nos atendimentos de urgência tem de se priorizar algia (dor no corpo) e não a dor psicológica.

E

- **Emergência** - trata-se de uma constatação médica de agravo à saúde que implique risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.
- **Escore** - pontuação do Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco: Valor atribuído aos protocolos com a função de definir pesos para os protocolos e discriminadores. Exemplo: Cada discriminador possui um escore, sendo assim, à medida em que elas forem respondidas mediante questionário feito ao paciente, o sistema gera uma nota no final da avaliação. Então a lista de prioridades por tipo de risco (emergente, pouco urgente, não urgente, etc) é disposta da maior nota (maior grau de risco) para a menor (paciente de situação mais estável).

F

- **Fluxograma** - é composto por sintomas e discriminadores agrupados de tal forma que auxiliam no processo de tomada de decisões para atribuição de uma prioridade clínica ao paciente, estruturando o processo de coleta de informações com discriminadores chave em cada nível de prioridade, fornecendo assim o quadro organizacional para a ordenação do processo de raciocínio durante a triagem. (Retirado de trechos do documento Manual do Formando – Triagem no Serviço de Urgência – Grupo de Triagem de Manchester).

P

- **Prioridade** - condição de preferência dada a um paciente determinado por necessidade. Tratandose de atenção médica, a prioridade é atribuída aos pacientes com maior sofrimento, perigo iminente ou risco de vida.
- **Protocolo** - metodologia aplicada no processo de classificação de risco. Fluxos que ajudam a categorizar a situação de cada paciente e proporcionar o atendimento imediato àqueles que mais necessitam.
- **Protocolo de Manchester** - trata-se de uma metodologia de trabalho implementada em Manchester em 1997 e amplamente divulgada no Reino Unido, estando em curso sua aplicação em vários outros países como Portugal, Suécia, Holanda e Espanha. Além disso o GBACR (Grupo Brasileiro de Classificação de Risco) está autorizado pelo MTG e GPT a implantá-lo no Brasil.

Sobre os protocolos

O objetivo do protocolo é estabelecer um tempo de espera pela atenção médica e não de estabelecer diagnóstico. O método consiste em identificar a queixa inicial e seguir o fluxograma de decisão e por fim estabelecer o tempo de espera que varia de acordo com a gravidade: Vermelho = Emergente = 0min - Laranja = Muito Urgente = 10min - Amarelo = Urgente = 60min - Verde = Pouco Urgente = 120min - Azul = Não Urgente = 240min.

S

- **Sinal vital** - consiste na nomenclatura genérica que se dá ao conjunto de fenômenos objetivos, indicadores das condições de saúde de um indivíduo. Os mais comuns são: Temperatura (T), Pressão Arterial (PA), Pulso (P) e Respiração (R).
- **Sintoma** - manifestação apresentada por uma doença, tomada como ponto de partida de seu diagnóstico.

T

- **Tempo-alvo** - o tempo máximo em minutos, que um paciente deve esperar desde o momento da atribuição de sua prioridade clínica até ser atendido por um médico.
- **Touch screen** - a tela sensível ao toque é um display eletrônico visual que pode detectar a presença e localização de um toque dentro da área de exibição, por meio de pressão. O termo refere-se geralmente ao toque no visor do dispositivo com o dedo ou a mão, que também podem reconhecer objetos, como uma caneta.
- **Triagem** - abordagem realizada aos pacientes, acompanhada da distinção daqueles que necessitam de atendimento rápido, daqueles que podem aguardar por mais tempo, baseada pela definição do protocolo utilizado na classificação de risco.

U

- **Urgência** - trata-se de uma ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de morte, cujo portador necessita de assistência médica imediata.

Navegação básica

Objetivo

Demonstrar os comandos básicos do Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco, de modo que os usuários aprendam o correto manuseio do sistema e consigam navegar com segurança em seu ambiente virtual. A compreensão do conteúdo proposto ajuda a entender o comportamento desse sistema, aprender a função de seus botões e distinguir a sua estrutura.

Compreensão

Tela de Login

A tela de login é apresentada ao acessar o sistema. Nela, deverão ser informados o nome do usuário, com seu perfil devidamente configurado, e a senha de acesso para autenticá-los e selecionar a empresa e o idioma. Depois disso, basta clicar no botão < Entrar > . Caso o usuário não possua um prestador associado na tela "[Usuários](#)" (SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários ou MV2000 / SGU / Autorização / Usuários), será exibida a seguinte mensagem: **USUÁRIO NÃO POSSUI PRESTADOR ASSOCIADO** .

No rodapé dessa tela, visualiza-se a informação de que, para a exibição do sistema, é necessária a resolução de 1024x768 pixels ou superior.

Gerar nova senha de acesso

Ao clicar no campo "Esqueci minha senha", será exibida a janela "Recuperação de senha" com o nome do usuário e e-mail cadastrados na tela " Usuários ".

Ao clicar no botão  , será enviado um e-mail para que seja enviado um lembrete da senha para o e-mail cadastrado. Caso deseje retornar à tela de login, basta clicar no botão



Expiração de senha

- Ao definir a senha, o usuário configura o prazo de validade dela (quantidade mínima e máxima de dias que as senhas devem ser utilizadas no sistema) e indica quantos dias antes, o usuário será alertado referente à quantidade de dias que resta para expiração da senha. Essas configurações são realizadas na tela de " [Diretivas](#) " (Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Diretivas);

- Caso a senha expire, será exibida uma mensagem de aviso de expiração da senha e liberado um pop-up para redefinição da senha expirada.

Botões do sistema

Barra de botões

- Ao clicar no botão  "Operacional", o usuário retorna à tela "[Lista de Pacientes](#)";
- Ao acionar o botão  "Auditoria", será exibido o filtro "Tipo de Auditoria" para selecionar entre auditoria interna ou auditoria externa. Selecionando uma das opções será exibida a tela "Pesquisa de Auditoria", que permite pesquisar, editar e visualizar os relatórios das auditorias [internas](#) e [externas](#) realizadas;
- Ao acionar o botão  "Preferências", será exibida uma lista com três opções:
 - [Configurações](#) - exibe as telas de configurações do Sistema Acolhimento com Classificação de Risco (SACR);
 - Filas - exibe a janela "Configurações de Fila(s)", com a lista de todas as filas cadastradas, permitindo que o usuário selecione uma ou mais filas para que sejam exibidas na lista de paciente. Caso haja muitas filas cadastradas, poderão ser exibidas as páginas existentes de filas cadastradas. Depois de selecionar as filas desejadas, basta salvar. Caso não deseje salvar a operação realizada, basta clicar no botão  para retornar à tela principal;
 - Multiempresas - exibe a janela "Registro da Empresa", com a lista das empresas cadastradas, permitindo selecionar outra empresa diferente da logada.
- Ao acionar o botão  "Ajuda", será exibida uma janela informando a versão atual do sistema e o usuário logado. Clicar no botão  para retornar à tela principal;
- Ao acionar o botão  "Sair", o usuário realiza o logout da aplicação.

Botões comuns

Nesse sistema, são apresentados alguns botões comuns os quais serão descritos abaixo:


Na maioria das telas, são exibidos botões padrão. Algumas funcionalidades poderão ou não estar habilitadas, dependendo da tela selecionada. Abaixo, os principais botões exibidos e as suas respectivas funcionalidades. Clicar no botão:

-  para incluir as informações na lista apropriada;


-  para pesquisar uma informação desejada;
-  para excluir um campo ou uma a linha cadastrada. Ao acioná-lo, será exibida uma mensagem questionando o usuário, de fato, se deseja realizar essa operação;
-  para editar o registro selecionado;
-  para consultar os dados do registro selecionado;
-  para copiar o registro selecionado;
-  para que informações descritas na tela sejam confirmadas;
-  para exibir a tela de "Cadastro", permitindo que o dado (Protocolo, Discriminador, etc.) seja cadastrado;
-  salvar todas as informações registradas na tela;
-  imprimir as informações que foram registradas e salvas na tela.

Fluxos dos processos

Acolhimento com classificação de risco

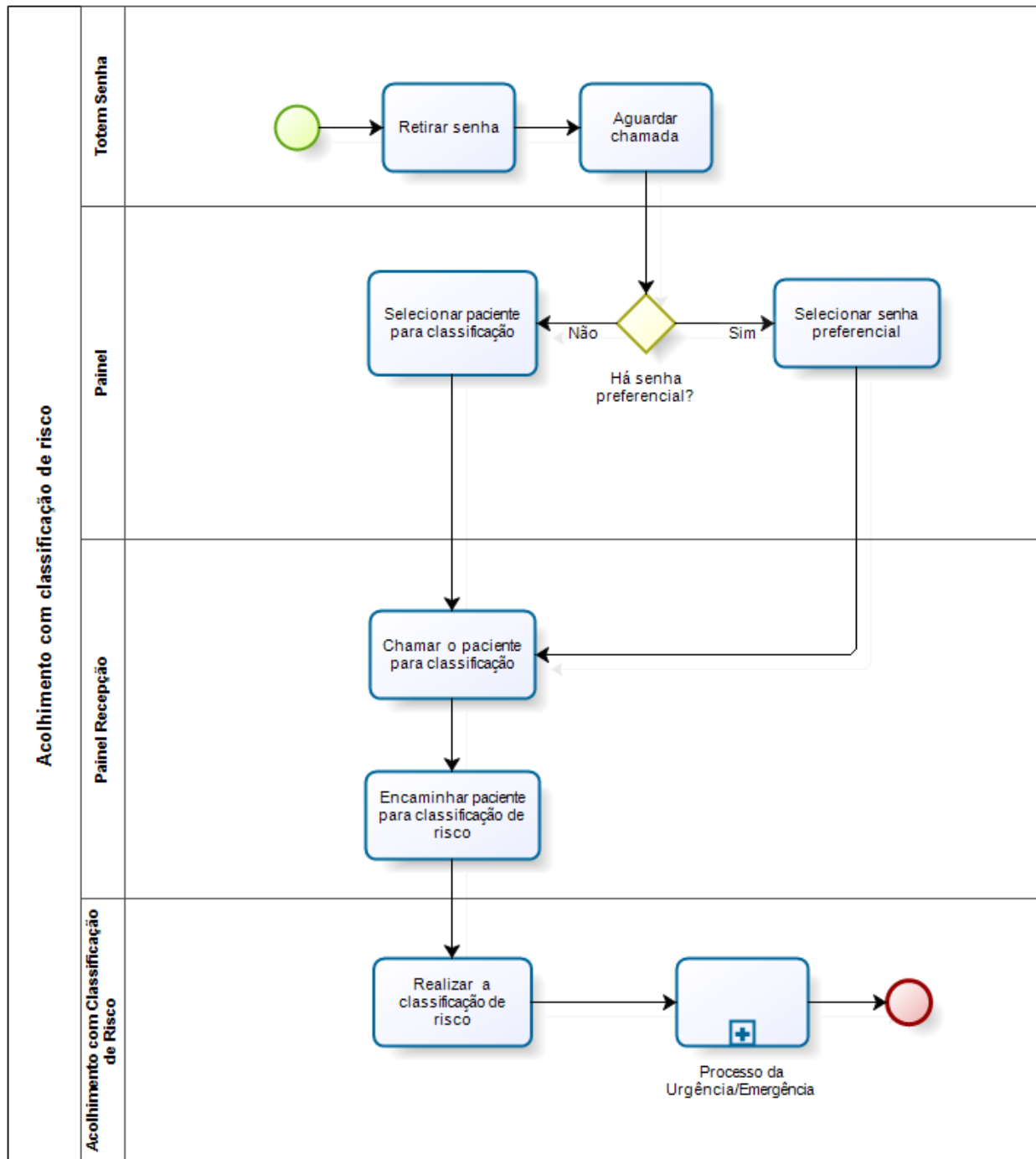

Classificação de risco

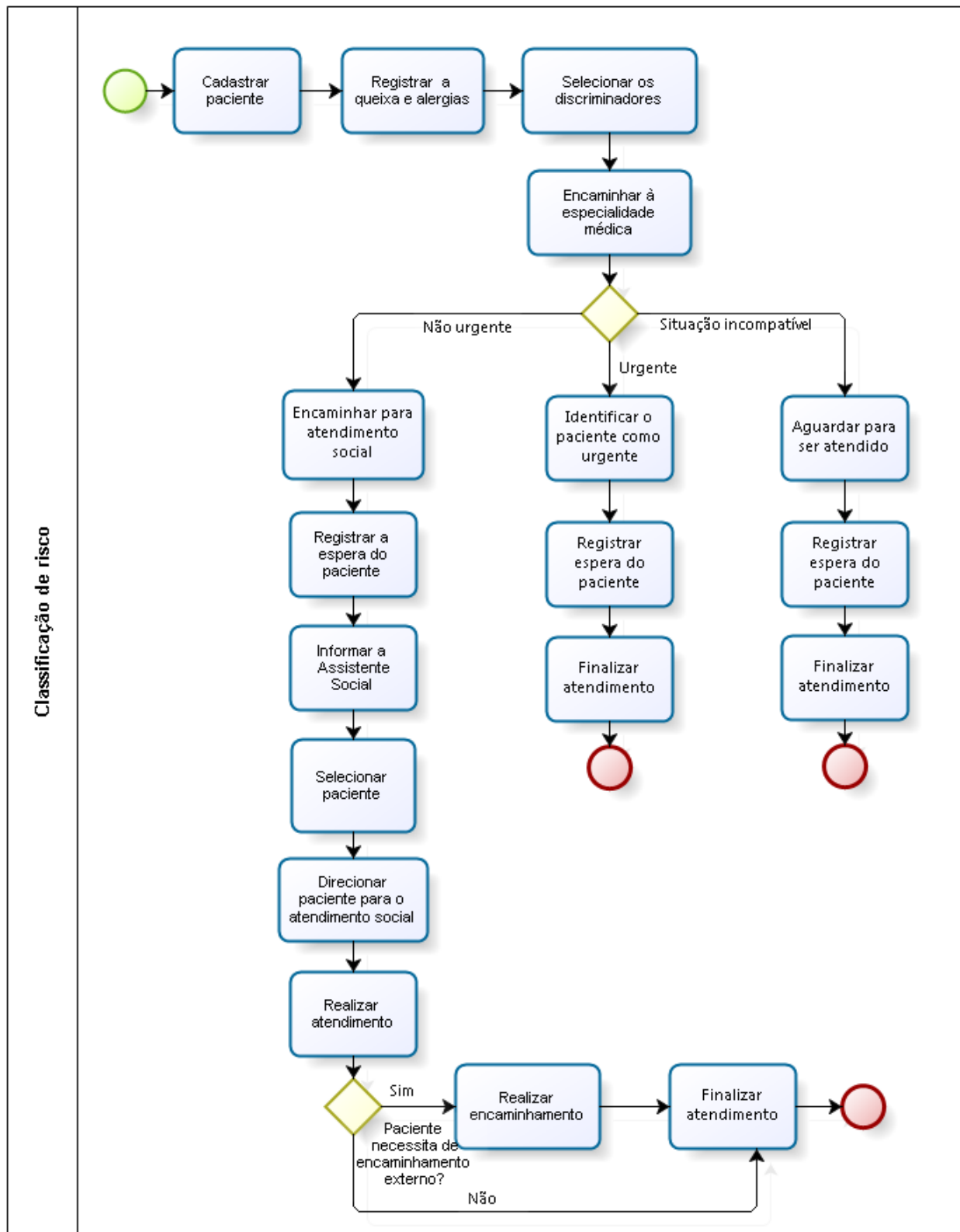

Menu - Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco

- Configuração
 - Configurações
 - Aferição
 - Tipo dado antropométrico
 - Tipo sinal vital
 - Instrumento aferição
 - Unidade aferição
 - Item de aferição
 - Item de aferição do setor
 - Limites de itens de aferição
 - Protocolo
 - Cor de referência
 - Grupo discriminador classificação
 - Classificação
 - Grupo do fluxograma sintoma
 - Fluxograma sintoma especialidade
 - Avaliação tela
 - Parâmetro geral
 - Discriminador
 - Discriminador fluxograma sintoma
 - Associação protocolo empresa
 - Estação chamada painel
 - Consultar registros de log
 - Setor
 - Especialidades da classificação

- Protocolo Americano (ESI)
 - Grupo de intervenção salva vida
 - Grupo de situação de alto risco
 - Intervenção salva-vida
 - Situação de alto risco
 - Recursos urgência
- Perfil
- Segmento
- Auditoria
- Filas
- Operacional
 - Lista de pacientes
- Atendimento
 - Dados do paciente
 - Abordagem inicial
 - Atendimento - Classificação
 - Situação incompatível
 - Atendimento social
 - Resumo acolhimento
- Auditoria - Tipos
 - Auditoria interna
 - Auditoria externa

Configuração

Este menu é acessado quando a opção "Configurações", exibida ao clicar no botão  , for selecionada.

Configurações

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configuração / Configurações

Pré-requisitos

Configurações

- MV2000 / SGU / Autorização / Usuários
- SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / [Usuários](#)

Função da tela

Permitir ao usuário com perfil de "Administrador SACR", configurar as diversas funcionalidades dos sistemas que englobam o processo do Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco.

Como usar

Configurar o usuário para visualizar o botão

Apenas o usuário configurado com o privilégio "Administrador SACR" na tela "[Usuários](#)" no sistema Gestão de Usuários (SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização /

Usuários e MV2000 / SGU / Autorização / Usuários), visualizará o botão . Desse modo, terá acesso às configurações do Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco. No campo "Privilégio" da tela "Usuários", são exibidos os seguintes privilégios:

- A - Administrador Geral;
- S - Administrador do Setor;
- C - Administrador SACR;
- U – Usuário;
- L – Auditor.

Configurações da aplicação

- Ao acionar o botão , será exibida uma janela com as seguintes opções: "Configurações", "Filas" e "Multiempresas";
- Selecionar a opção "Configurações" para visualizar as telas de [configurações](#) do Sistema de "Acolhimento com Classificação de Risco".

Impactos

As configurações realizadas nessas telas serão utilizadas em todo processo da classificação do paciente no Sistema Acolhimento com Classificação de Risco.

Aferição

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Tipo de Dado Antropométrico

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Consultar e cadastrar os tipos de dados antropométricos, que são as medidas físicas do corpo humano e suas partes, como: altura, comprimento, peso, perímetro do abdômen, entre outros.

Como usar

Pesquisar "Tipo Dado Antropométrico"

Ao acessar a tela "Tipo de Dado Antropométrico", será exibida automaticamente a lista com todos os tipos de dados antropométricos previamente cadastrados.

- Informar no campo "Descrição", o nome do tipo dado antropométrico no qual deseja filtrar na lista e clicar no botão  ;
- As informações serão exibidas na lista "Tipo de Dado Antropométrico";
- Poderá ainda, editar ou excluir os tipos dados antropométricos, bastando acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar "Tipo Dado Antropométrico"

- Para realizar o cadastro de um tipo dado antropométrico, deve-se acionar o botão  , será apresentada a tela de cadastro;
- Informar a descrição do tipo de dado antropométrico que deseja cadastrar;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Na tela abaixo, é necessário cadastrar itens de aferição para o tipo "Dado Antropométrico".

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Item de Aferição](#)

É possível filtrar os "Tipos de Dados Antropométricos" no campo "Grupo" da tela abaixo.

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Limites de Itens de Aferição](#)

Tipo dado antropométrico

Localizações

[Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Tipo de Dado Antropométrico](#)

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Consultar e cadastrar os tipos de dados antropométricos, que são as medidas físicas do corpo humano e suas partes, como: altura, comprimento, peso, perímetro do abdômen, entre outros.

Como usar

Pesquisar "Tipo Dado Antropométrico"

Ao acessar a tela "Tipo de Dado Antropométrico", será exibida automaticamente a lista com todos os tipos de dados antropométricos previamente cadastrados.

- Informar, no campo "Descrição", o nome do tipo do dado antropométrico com o qual deseja filtrar a lista e clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Tipo de Dado Antropométrico";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir os tipos de dados antropométricos, bastando acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar "Tipo Dado Antropométrico"

- Para realizar o cadastro de um tipo de dado antropométrico, deve-se acionar o botão  . Dessa forma, será apresentada a tela de cadastro;
- Informar a descrição do tipo de dado antropométrico que deseja cadastrar;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Na tela abaixo, é necessário cadastrar itens de aferição para o tipo "Dado Antropométrico".

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Item Aferição](#)

É possível filtrar os "Tipos de Dados Antropométricos" no campo "Grupo" da tela abaixo.

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Limites de Item de Aferição](#)

Tipo sinal vital

Localizações

[Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Tipo Sinal Vital](#)

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Cadastrar os tipos de sinais vitais, que são medidas fornecedoras de dados fisiológicos, usadas como indicadores das condições de saúde de um indivíduo. Os mais comuns são: temperatura corporal, pressão arterial, pulso (frequência cardíaca) e respiração (frequência respiratória). São de grande importância para o profissional médico, pois por meio deles é possível coletar dados, realizar avaliações das condições de saúde do paciente, monitorar o agravamento da enfermidade, bem como determinar que tipo de medicamento será prescrito para o paciente.

Como usar

Pesquisar sinal vital

Ao acessar a tela "Tipo Sinal Vital", será exibida a lista com todos os tipos de sinais vitais previamente cadastrados.

- Informar, no campo "Descrição", o nome do tipo do sinal vital com o qual deseja filtrar a lista e clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Tipo Sinal Vital";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir os tipos de sinais vitais, bastando clicar nos botões  e  respectivamente.

Cadastrar tipo sinal vital

- Para realizar o cadastro de um tipo sinal vital, deve-se acionar o botão  , será apresentada a tela de cadastro;
- Informar a descrição do tipo sinal vital que deseja cadastrar;

- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Na tela abaixo é necessário cadastrar os itens de aferição para o tipo sinal vital.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Item Aferição](#)

É permitido filtrar os "Sinais Vitais", no campo "Grupo" da tela listada abaixo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Limites de Item de Aferição](#)

Instrumento aferição

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Instrumento Aferição

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Consultar e cadastrar os tipos de instrumentos de aferição, como: estetoscópio, balança manual, fita métrica. Estes são utilizados para aferir medidas de um paciente, como: peso, altura, sinais vitais, etc.

Como usar

Pesquisar instrumentos de aferição

Ao acessar a tela "Instrumento Aferição", será exibida a lista com todos os tipos de instrumentos de aferição previamente cadastrados.

- Informar, no campo "Descrição", o nome do instrumento aferição com o qual deseja filtrar a lista e clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Instrumento Aferição";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir os instrumentos aferição, bastando acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar instrumentos de aferição

- Para realizar o cadastro de um instrumento aferição, deve-se acionar o botão  , será apresentada a tela de cadastro;
- Informar a descrição do instrumento aferição que deseja cadastrar;
- Marcar o checkbox do campo "Ativo" para indicar que o instrumento de aferição está ativo;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A tela abaixo utiliza os instrumentos de aferição cadastrados para associar item de aferição, no campo "Instrumento".

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Item Aferição](#)

A tela abaixo utiliza instrumentos de aferição para cadastrar um novo limite de item de aferição, no campo "Instrumento".

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Limites de Item de Aferição](#)

Unidade aferição

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Unidade Aferição

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Consultar e cadastrar as unidades de medidas a serem utilizadas nas leituras dos equipamentos de aferição, como: frequência respiratória, milímetros, bpm, gramas, entre outros.

Como usar

Pesquisar unidade de aferição

Ao acessar a tela "Unidade Aferição", será exibida a lista com todos os tipos de unidades de aferição previamente cadastradas.

- Informar, no campo "Descrição", o nome da unidade aferição no qual deseja filtrar na lista e clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Unidade Aferição";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir as unidades aferição, bastando acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar unidade de aferição

- Para realizar o cadastro de uma unidade aferição, deve-se acionar o botão  , será apresentada a tela de cadastro;
- Informar a descrição da unidade aferição que deseja cadastrar;
- Marcar o checkbox do campo "Ativo" para indicar que a unidade de aferição está ativa;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A tela abaixo, utiliza as unidades de aferição cadastradas para associar a um item de aferição, no campo "Unidade".

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Item Aferição](#)

A tela abaixo, utiliza uma das unidades de aferição para atribuir limites nos itens de aferição.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Limites de Item de Aferição](#)

[Item de aferição](#)

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Item de Aferição

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Tipo Dado Antropométrico
- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Tipo Sinal Vital
- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Unidade Aferição

Função da tela

Consultar e cadastrar os itens a serem utilizados na leitura de aferições realizadas ao paciente. Além do cadastro, é possível classificá-los em grupos do tipo: sinal vital, dado antropométrico ou todos.

Como usar

Pesquisar item de aferição

Ao acessar a tela "Item de Aferição", será exibida a lista com todos os tipos de itens de aferição previamente cadastrados.

- Marcar em quais dos grupos o item está cadastrado, se "Sinal Vital", "Dado Antropométrico" ou "Todos";
- Informar, no campo "Descrição", o nome do item de aferição com o qual deseja filtrar a lista e clicar o botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Item de Aferição", incluindo o tipo de grupo ao qual o item pertence;
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir os itens de aferição, bastando acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar item de aferição

- Para realizar o cadastro de um item de aferição, clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Informar a descrição para o item de aferição que deseja cadastrar;
- Indicar uma sigla para o item;
- Definir os limites de mínimo e de máximo impeditivo de aferição;
- Marcar o checkbox do campo "Ativo" para indicar que a unidade de aferição está ativa;
- Definir a unidade e o instrumento de medição da aferição;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;

- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A tela abaixo utiliza os itens de aferição cadastrados para associar cada item ao setor específico.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Item Aferição do Setor](#)

Item de aferição do setor

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Item de Aferição do Setor

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Tipo Dado Antropométrico](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Tipo Sinal Vital](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Item Aferição](#)

Tabelas

- MV2000 / Global / Globais / Centro de Custo
- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Globais / [Centro de Custo](#)

Função da tela

Associar os itens de aferição que estarão disponíveis para o setor em referência. Desta forma, cada setor terá itens de aferição correspondentes.

Como usar

Pesquisar item de aferição do setor

Quando acessada, a tela exibirá os campos em branco, para realizar pesquisa o usuário deverá seguir os passos abaixo:

- Selecionar um setor no campo "Selecione o setor" e clicar no botão  ;

- Caso exista algum item associado ao setor informado, ele será exibido na lista, como sinal vital e/ou dado antropométrico;
- Se necessário, os itens poderão ser excluídos da lista, bastando acionar o botão  .

Associar itens de aferição ao setor

- Para realizar a associação de um item de aferição a um setor, deve-se acionar o botão  . Dessa forma, a tela para associação será apresentada;
- Indicar o setor em que deseja associar os itens;
- Informar em quais dos grupos virão as informações dos tipos de itens, se "Sinal Vital", "Dado Antropométrico" ou "Ambos";
- Selecionar os itens na lista de itens de aferição a qual deseja associar ao setor;
- Acionar o botão  ;
- Após a associação, os itens que foram adicionados ao setor serão apresentados no bloco "Lista de itens selecionados" ;
- Ao marcar o checkbox do campo "Marque os itens acima para visualizá-los nas telas de Comandos.", indica que o item será visualizado nas telas de comandos no SACR;
- Clicar no botão  para salvar as informações e concluir o processo.

Impactos

Os itens de aferição associados ao setor, serão exibidos no momento da classificação do paciente, de acordo com o setor que ele está sendo atendido. Ou seja, os itens exibidos serão apenas o que foram associados ao setor do atendimento.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Limites de itens de aferição

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / Limites de Itens de Aferição

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Tipo Dado Antropométrico](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Tipo Sinal Vital](#)

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Instrumento Aferição](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Unidade Aferição](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Aferição / [Item Aferição](#)

Função da tela

Registrar os limites para os itens de aferição, como se fossem valores de referência para os itens cadastrados, tais como: sexo, idade mínima e máxima, instrumento, entre outros. Estes itens também poderão ser classificados por grupos do tipo: sinal vital, dado antropométrico ou todos.

Como usar

Pesquisar limites de itens de aferição

Ao acessar a tela "Limites de Itens de Aferição", será exibida a lista com todos os limites de itens de aferição previamente cadastrados.

- Selecionar em quais dos grupos o item está cadastrado, se "Sinal Vital", "Dado Antropométrico" ou "Todos";
- Informar, no campo "Descrição", o nome do limite do item de aferição para que filtre na lista;
- Caso queira que a pesquisa exiba também os itens inativos, marcar o checkbox "Exibir inativos" e clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Limites de Itens de Aferição";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar os limites de itens de aferição, basta clicar no botão .

Cadastrar limites itens de aferição

- Para realizar o cadastro de limites de itens de aferição, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Definir o grupo em que será imposto o limite de aferição, se "Sinal Vital", "Dado Antropométrico" ou "Todos";
- Informar a descrição do item de aferição;
- Selecionar quais os sexos dos pacientes que irão utilizar os limites de itens de aferição, se masculino, feminino ou ambos;

- Indicar a idade mínima e máxima dos pacientes que se encaixarão nesse limite item de aferição;
- Selecionar um instrumento e uma unidade de aferição;
- Definir o limite mínimo e máximo do item de aferição;
- Marcar o checkbox do campo "Ativo" para definir que esse limite de aferição está ativo;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A tela abaixo, utiliza os limites de itens de aferição cadastrados para avisar o usuário quando o valor de uma aferição estiver fora do limite de aferição.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Protocolo

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Cadastrar os protocolos, que tem como objetivo priorizar os pacientes de acordo com uma urgência clínica. Atualmente existem vários tipos de protocolos de classificação de risco, a gestão pode adotar um desses protocolos ou customizar um, visando adequar o processo e o sistema à realidade da empresa.

Como usar

Pesquisar protocolos

Ao acessar a tela "Protocolo", serão listados todos os protocolos previamente registrados.

- Informar no campo "Descrição", o nome do protocolo com o qual deseja filtrar a lista e clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Lista de Protocolo";

- Caso seja necessário, o usuário poderá consultar o resumo  , editar  ou excluir  os protocolos.

Cadastrar protocolos

- Para cadastrar um protocolo, o usuário deverá acionar o botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Selecionar um modelo de protocolo;
- Informar um nome para o protocolo no campo "Descrição", podendo ser utilizada a mesma descrição do modelo selecionado;
- No campo "Tempo Classificação", informar a quantidade de minutos previstos para o início do processo de classificação de risco desde o momento em que o paciente chega ao hospital;
- Determinar se o protocolo em referência permite ou não uma pré-classificação, marcando o checkbox do campo "Permitir Pré-classificação";
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

O cadastro dos protocolos é necessário para que a classificação dos pacientes ocorra na tela abaixo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Classificação](#)

Na tela listada abaixo, o protocolo é utilizado para ser associado a uma empresa.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Assoc. Protocolo Empresa](#)

Na tela abaixo, o protocolo é obrigatório para o cadastro de um novo "Grupo de Pergunta Classificação", caso trate-se de um protocolo estruturado no formato de soma de escore de perguntas.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Grupo Discriminador Classificação](#)

Na tela abaixo, a seleção de um protocolo é necessária para a associação de perguntas com classificação dentro de um sintoma.

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Discriminador Fluxograma Sintoma](#)

Cor de referência

Localizações

[Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Cor de Referência](#)

Pré-requisitos

Configurações

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo](#)

Função da tela

Cadastrar as cores que serão associadas às prioridades de classificação de risco. Essa associação, dará apoio ao usuário para visualização do nível da prioridade atribuída aos pacientes. Bem como, analisar o tempo alvo aceitável do atendimento, criando uma hierarquia conforme a gravidade do paciente, ou seja, definindo quem deve ser atendido primeiro e quem poderá aguardar o atendimento com segurança.

Como usar

Pesquisar cores

Ao acessar a tela "Cor de Referência", serão listadas todas as cores previamente cadastradas.

- Informar, no campo "Descrição", o nome da cor com a qual deseja filtrar a lista e clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Cor de Referência";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir as cores, bastando acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar cores

- Para cadastrar as cores de referência, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Informar a descrição para a cor e selecionar uma cor da paleta de cores apresentada;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;

- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

O cadastro dos protocolos é necessário para que a classificação dos pacientes ocorra na tela abaixo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Classificação](#)

Grupo discriminador classificação

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Grupo Discriminador Classificação

Pré-requisitos

Configurações

Esta tela só poderá ser acessada se tiver sido configurado, na tela abaixo, um "Protocolo de Escore", como exemplo: Grupo Discriminador Escore.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Protocolo](#)

Função da tela

Cadastrar os grupos discriminadores para que sintomas e discriminadores possam ser associados a esses grupos. A finalidade desse processo é organizar protocolos para trabalharem no formato "Protocolo Escore".

Como usar

Pesquisar grupos

Ao acessar a tela "Grupo Discriminador Classificação", serão listados automaticamente todos os grupos discriminador previamente cadastrados.

- Informar, no campo "Descrição", o nome do grupo discriminador com o qual deseja filtrar a lista e clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão apresentadas na lista "Grupo Discriminador Classificação";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir os grupos, bastando acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar grupos

- Para realizar o cadastro dos grupos discriminadores de classificação, deve-se acionar o botão . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Informar a descrição para o grupo;
- Selecionar um protocolo de classificação de risco no campo "Protocolo";
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Na tela abaixo, a seleção de um grupo de classificação será obrigatório para a associação de discriminadores com classificação dentro de um fluxograma sintoma, quando o protocolo selecionado for do tipo "Grupo de Pergunta Escore".

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Discriminador Fluxograma Sintoma](#)

Classificação

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Classificação

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Protocolo](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Cor de Referência](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Grupo Discriminador Classificação](#)

Função da tela

Cadastrar as classificações no Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco. As classificações são prioridades clínicas que identificam o grau de urgência e o tempo-alvo que o paciente deve esperar até que se inicie o seu atendimento médico.

Como usar

Pesquisar a classificação

Ao acessar a tela "Classificação", serão listadas todas as classificações previamente cadastradas.

- Selecionar um protocolo e/ou informar no campo "Descrição" o nome da classificação com a qual deseja filtrar a lista;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, a s informações serão exibidas na lista de "Classificação";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir as classificações, basta acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar a classificação

- Para cadastrar uma classificação, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Selecionar um protocolo cadastrado anteriormente no campo "Protocolo";
- Determinar uma cor de referência para o nível de urgência no campo: "Cor de Referência". Caso o protocolo se comporte por meio da soma de escores dos discriminadores para uma atribuição de "Classificação", deve-se associar a um grupo discriminador no campo: "Grupo Discriminador";
- Informar uma descrição para a prioridade da "Classificação";
- Inserir uma sigla para a classificação que deve ser definida;
- No campo "Recomendação", devem ser cadastradas informações relevantes sobre a classificação cadastrada. Essas informações serão exibidas ao usuário no processo de classificação de risco;
- Ao marcar o checkbox da opção "Situação Incompatível", a classificação será utilizada na tela " [Situação Incompatível](#) ". Essa opção é utilizada para designar pacientes que apresentam sintomas ou situações não-relacionadas nas perguntas e nos sintomas do protocolo;

- Os campos: "Escore Mínimo" e "Escore Máximo", deverão ser utilizados se a "Classificação" cadastrada estiver associada a um protocolo que se comporte por meio da soma de escores dos discriminadores. Nestes campos, deve ser informado um valor numérico mínimo e um valor numérico máximo, que identifica uma classificação dependendo da soma dos escores dos discriminadores selecionados durante o processo de classificação de risco;
- O campo "Tempo Alvo(min)" deve ser preenchido com o tempo máximo em minutos que um paciente deve esperar desde o momento da atribuição de sua prioridade clínica até ser atendido por um médico;
- Se necessário, reclassificar o paciente e informar, no campo "Tempo-Alvo(min) reclassificação", um tempo para esse processo;
- O checkbox referente ao campo "Atendimento do Serviço Social", garante que um paciente pode ser atendido por um assistente social ou por outro profissional que realize esse trabalho, a fim de esclarecer dúvidas de um paciente ou encaminhá-lo para outro local de atendimento médico;
- Marcar o checkbox do campo "Prioridade sem classificação completa", para permitir gerar uma prioridade para o paciente sem que a sua classificação tenha sido concluída;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Utilizar a tela abaixo, para associar perguntas a um sintoma onde será necessário a seleção de uma classificação.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Discriminador Fluxograma Sintoma](#)

A tela abaixo utiliza o cadastro das classificações de risco, no momento da classificação do paciente durante o atendimento.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Grupo do fluxograma sintoma

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Grupo Fluxograma Sintoma

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Consultar e cadastrar os grupos dos fluxogramas sintomas a serem utilizados para agrupá-los.

Como usar

Pesquisar grupo fluxograma sintoma

Ao acessar a tela "Grupo do Fluxograma Sintoma", serão listados todos os grupos do fluxograma sintoma previamente cadastrados.

- Informar, no campo "Descrição", o nome do grupo fluxograma sintoma com o qual deseja filtrar a lista, com até 200 caracteres;
- Informar se deseja filtrar os grupos fluxogramas sintomas inativos, marcando o checkbox do campo "Exibir inativos";
- Clicar no botão  ;
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir os grupos fluxogramas sintomas, bastando acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar grupo fluxograma sintoma

- Para realizar o cadastro do grupo fluxograma sintoma, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Informar a descrição para o grupo fluxograma sintoma;
- Indicar o número de ordem;
- Marcar o checkbox do campo "Ativo" para indicar que a unidade de aferição está ativa;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Na tela abaixo, a seleção de um grupo do fluxograma sintoma será obrigatório para a associação do fluxograma sintoma especialidade a um grupo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Fluxograma Sintoma Especialidade](#)

Fluxograma sintoma especialidade

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Fluxograma Sintoma Especialidade

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Grupo do Fluxograma Sintoma](#)

Tabelas

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / [Especialidades](#)

Função da tela

Cadastrar os sintomas que os pacientes podem apresentar. Eles podem ser considerados como ponto de partida para diagnosticar as doenças e condições apresentadas pelos pacientes. Um fluxograma sintoma especialidade deverá estar associado ao menos a uma Especialidade Médica e a um grupo do fluxograma sintoma.

Como usar

Pesquisar fluxograma sintoma especialidade

Ao acessar a tela "Fluxograma Sintoma Especialidade", serão listados todos os fluxogramas sintomas especialidades previamente cadastrados.

- Informar a descrição do fluxograma sintoma especialidade;
- Selecionar um grupo fluxograma sintoma e/ou especialidade para filtrar na lista;
- Informar se o sistema deve considerar os fluxogramas sintomas especialidade com status de inativos ou não;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Fluxograma Sintoma Especialidade";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir os grupos fluxogramas sintomas especialidade, bastando acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar fluxograma sintoma especialidade

- Para realizar o cadastro do grupo fluxograma sintoma especialidade, o usuário deve acionar o botão  . Dessa forma, será apresentada a tela de cadastro;

- Informar uma descrição no campo "Descrição". Em seguida, preencher o campo "Recomendação", registrando informações relevantes para o usuário operador do sistema visualizar;
- Se necessário, definir um sexo para o fluxograma sintoma especialidade, selecionando uma opção no campo "Sexo";
- Determinar as especialidades médicas para as quais os pacientes serão encaminhados, no campo "Especialidade" e acionar no botão . As especialidades do sintoma serão exibidas conforme a multiempresa selecionada. Ao associá-las ao fluxograma sintoma especialidade, aparecerão listadas na "Lista de Especialidades do fluxograma sintoma". A partir desta lista, as especialidades poderão ser excluídas da associação com o fluxograma sintoma;
- É necessário incluir o grupo do fluxograma sintoma especialidade no campo "Grupo fluxograma sintoma";
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Na tela abaixo, os sintomas devem ser selecionados para que eles sejam associados às perguntas do sintoma.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Discriminador Fluxograma Sintoma](#)

Avaliação tela

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Avaliação Tela

Pré-requisitos

Tabelas

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configurações / Avaliação / [Pergunta](#)

Na tela "Fórmula" do Sistema Gerenciamento de Unidades, são criadas e configuradas as fórmulas de avaliação.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configurações / Avaliação / [Fórmula](#)

Função da tela

Pesquisar os modelos de avaliações tradicionais de pacientes. Atualmente, o Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco possui telas preparadas para a "Avaliação Glasgow", "Avaliação de Régua de Dor", "Avaliação Escala AVPU", "Avaliação Superfície Corporal Queimada (SCQ)", "TRTS", "Intervenção Salva Vida", "Recursos de Urgência" e "Situação de Alto Risco".

Como usar

Pesquisar avaliação tela

Ao acessar a tela, serão exibidas na "Lista de Avaliação Tela" todas as avaliações por telas previamente cadastradas.

- Informar, no campo "Avaliação", o nome da avaliação com a qual deseja filtrar a lista;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, serão exibidas na "Lista de Avaliação Tela" as avaliações que respondem aos parâmetros informados;
- Caso seja necessário, o usuário poderá excluir as avaliações telas, bastando acionar o botão  .

Impactos

As telas abaixo utilizam as avaliações para classificar e realizar o atendimento do paciente.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Abordagem Inicial](#)

Parâmetro geral

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Parâmetros Geral

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Consultar e cadastrar os parâmetros gerais de configuração da aplicação.

Como usar

Pesquisar parâmetros gerais

Ao acessar a tela, serão exibidos por empresa, na "Lista de Parâmetro Geral", todos os parâmetros gerais que foram previamente cadastrados.

- Informar, no campo "Empresa", o nome da empresa com a qual deseja filtrar a lista;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, serão exibidos, na lista de "Parâmetros Geral", os parâmetros de acordo com a empresa informada;
- Clicar no botão  para editar os parâmetros.

Cadastrar parâmetros gerais

Para realizar o cadastro de parâmetros, deve-se acionar o botão  . Dessa forma, será apresentada a tela de cadastro dos parâmetros. Nela, o usuário deverá configurar os seguintes parâmetros:

- Empresa - informar a empresa para a qual serão definidas as configurações;
- Impressora Cód. Barras - para imprimir diretamente após conclusão do procedimento de classificação de risco sem precisar enviar para impressão. Selecionar uma impressora apropriada para impressão do código de barras;
- Impressora de Relatórios - selecionar a impressora para impressão direta dos relatórios de resumo acolhimento, ou seja, após concluir cada procedimento de classificação de risco o resumo acolhimento do paciente será automaticamente impresso;
- Impressora de Senha - informar a impressora a qual imprimirá as senhas geradas;
- Modelo de Impressora - informar o modelo da impressora que será utilizada;
- Avanço de papel em linhas - definir em quantas linhas o papel deverá avançar, no momento da impressão. Caso não deseje essa função, informar o zero (0) no campo;
- Imprimir Resumo Acolhimento automaticamente (impressora local padrão) - marcar checkbox para realizar a impressão automática do relatório de "Triagem de Atendimento" na impressora configurada na máquina local do usuário, caso contrário, check não deverá ser marcado;
- Reimpressão automática da senha (impressora local padrão) - marcar checkbox para reimprimir automaticamente a senha de classificação;
- Ordenar fluxogramas sintoma p/ Grupo - marcar checkbox para ordenar padrão dos fluxogramas sintomas por grupo;

- Permite mudança de especialidade no atendimento - marcar checkbox para que a especialidade do atendimento, caso seja alterada na classificação, também seja alterada no atendimento;
- Pesquisar paciente por código - marcar checkbox para realizar a pesquisa de pacientes utilizando o código do seu atendimento;
- Gera senha por fila - marcar checkbox para gerar as senhas por filas cadastradas;
- Pesquisa Alergia por Palavra-Chave - marcar checkbox para possibilitar a pesquisa de alergias utilizando uma palavra-chave;
- Atendimento Social Direto - quando marcado, o paciente classificado como "Não urgente" será direcionado para o atendimento social. Quando não estiver marcado, se o paciente for classificado como "Não urgente", será exibida uma mensagem questionando se o paciente será encaminhado para o atendimento com o assistente social;
- Exibe Prestador - marcar checkbox para que o nome do prestador associado à especialidade à qual o atendimento foi encaminhado seja exibido automaticamente no atendimento em questão;

Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo.

Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >.

Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >.

Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

As telas abaixo utilizam a impressão direta e a ordenação dos fluxogramas sintomas por grupo, no momento da escolha do fluxograma sintoma para classificação e atendimento do paciente, respectivamente.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Resumo Acolhimento](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Discriminador

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Discriminador

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Protocolo](#)

Função da tela

Cadastrar os discriminadores em conjunto com os fluxogramas sintomas. Os discriminadores servem como base para a identificação de condições apresentadas pelos pacientes. O usuário operador do sistema, sempre selecionará ao menos um discriminador para realizar o processo de classificação de risco de um paciente. Os discriminadores possuem esta nomenclatura pois devem ser cadastrados como um questionamento a fim de induzir à tomada de decisão por parte do operador do sistema.

O Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco permite ainda a associação de um discriminador com uma avaliação ou com uma aferição, também permite especificar faixas de valores e faixa etária, que serão aplicadas no processo de classificação de risco.

Como usar

Pesquisar discriminador

Ao acessar a tela "Discriminador", serão listados todos os discriminadores previamente cadastrados.

- Informar, no campo "Descrição", a pergunta do discriminador e selecionar uma "Avaliação" ou uma "Aferição" com a qual deseja filtrar a lista;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Discriminador";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar ou excluir os discriminadores, basta acionar os botões  e  respectivamente.

Cadastrar discriminadores

- Para realizar o cadastro de um discriminador, clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Preencher o campo "Descrição" com uma pergunta, que será utilizada como discriminador na classificação de risco do paciente. Opcionalmente, o usuário associa uma "Avaliação" ou uma "Aferição" ao discriminador criado;
- Também é possível optar pela obrigatoriedade ou não da "Avaliar/Aferir" e estabelecer valores limites para estas. Esta associação garante que, no momento em que o usuário operador do sistema selecionar um discriminador para identificar uma condição de um paciente, o Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco irá disparar uma tela de "Avaliação/Aferição" a ser preenchida por este usuário e se a opção de obrigatoriedade estiver ativa, não será possível selecionar o discriminador sem "Avaliação/Aferição";

- Estabelecer faixas etárias dos pacientes que utilizarão este discriminador, informando idade inicial e final;
- No campo "Explicação", cadastrar informações relevantes do discriminador. Essas informações serão apresentadas quando o botão  , localizado ao lado do discriminador, for acionado durante o processo de classificação de risco.

Discriminador para "Protocolo Manchester"

- Ao acessar a tela, como os discriminadores não poderão ser editados, ela permanecerá bloqueada. Apenas o campo "Liberar Edição" ficará habilitado e o usuário deverá autenticar a senha para desbloquear o restante dos campos da tela. A senha sempre será o CNPJ da empresa logada;
- Na tela de cadastro, será exibida a opção "Seleção Múltipla". Essa opção permite que os discriminadores sejam associados a uma aferição com fatores de aferição diferentes para o mesmo discriminador. Se essa opção estiver selecionada, o sistema exibe o bloco "Fatores de Aferição do Discriminador" que possibilita selecionar o "Fator de Aferição" (criados via carga de dados devido a exigência do protocolo), determinando a faixa inicial e final do fator nos campos "Faixa Inicial Discriminador Fator" e "Faixa Final Discriminador Fator" respectivamente;
- Para incluir na lista "Fator de Aferição", é necessário pressionar o botão  . O usuário poderá, por exemplo, coloca o fator de aferição com ou sem cetose, nos casos de verificação da glicemia;
- Para salvar a associação dos fatores de aferição com o discriminador, é obrigatório que uma aferição seja selecionada. Nesse caso, são desabilitados os campos "Avaliação", "Valor Faixa Inicial", "Valor Faixa Final" já que se trata de fatores de aferição que já possuem faixas de valores individuais;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Na tela abaixo são selecionadas as perguntas para serem associadas a classificação de acordo com os sintomas.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Discriminador Fluxograma Sintoma](#)

No Protocolo Manchester, a tela abaixo utiliza os fatores de aferição no momento da seleção de discriminadores que possuem relacionamento com aferições que possuem fatores. Ocorre durante o procedimento de classificação e atendimento do paciente.

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Classificação](#)

Discriminador fluxograma sintoma

Localizações

[Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Discriminador Fluxograma Sintoma](#)

Pré-requisitos

Configurações

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo](#)
- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Grupo de Fluxograma Sintoma](#)
- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Fluxograma Sintoma Especialidade](#)
- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Classificação](#)
- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Discriminador](#)

Função da tela

Associar os discriminadores aos fluxogramas de sintomas e com as classificações ou grupos de classificação, dependendo do modelo do protocolo. Essas associações definem a interface de operação do usuário durante o processo de classificação de risco.

Como usar

Na tela "Discriminador Fluxograma Sintoma", a pesquisa e o cadastro se encontram na mesma tela. Porém, a estrutura de configuração dessa tela depende do modelo de protocolo selecionado no campo "Protocolo". São quatro estruturas possíveis:

- Protocolo que utiliza Pergunta-chave, conforme o modelo Humaniza SUS;
- Protocolo que utiliza Pergunta-Chave e Fluxograma, conforme o modelo Manchester;
- Protocolo que utiliza Grupo Pergunta Escore, conforme o modelo Protocolo Escore;
- Protocolo que utiliza Pergunta-Chave e Recurso, conforme o modelo Protocolo Americano – ESI.

Procedimento para pergunta-chave

O procedimento de cadastro e de pesquisa do discriminador do fluxograma de sintoma segue o seguinte fluxo:

- Selecionar um protocolo no campo "Protocolo";

- Dessa forma, será exibida a área "Classificação do Fluxograma Sintoma". Nessa área, o usuário deverá selecionar o fluxograma do sintoma a ser utilizado na classificação;
- Depois disso, será exibida a área "Classificação". Nessa área, deve-se definir uma classificação para criar a hierarquia das prioridades clínicas;
- Ao editar uma classificação, a lista de discriminadores associados ao fluxograma do sintoma é carregada automaticamente no bloco "Discriminador". O usuário poderá pesquisar por um discriminador específico colocando o nome ou parte do nome do discriminador desejado e clicar no botão  ;
- Para associar um discriminador ao fluxograma sintoma e à classificação selecionados, basta acionar o botão  . Dessa forma, o discriminador será incluído na "Lista de Discriminador(es) da Classificação";
- Após inclusão dos discriminadores nessa lista, o usuário deverá configurar:
 - A ordem de exibição do discriminador;
 - Se ele deverá ficar ativo na classificação de risco;
 - Se será realizada a seleção automática no processo de classificação de risco. Para isso, é necessário que a "Avaliação/Aferição" ou a faixa etária estejam dentro dos limites estabelecidos.
- A remoção do discriminador da lista de discriminadores da classificação pode ser realizada ao clicar no botão  ;
- Com todos os discriminadores desejados na lista e devidamente configurados, para confirmar a operação, é necessário pressionar o botão  . Nesse momento, a classificação e seus discriminadores do fluxograma sintoma serão salvos na "Lista de Classificações do fluxograma sintoma".

Procedimento para pergunta-chave e fluxograma

A seguir, a especificação da tela de "Discriminador Fluxograma Sintoma" para um protocolo que utiliza "Pergunta-Chave e Fluxograma", conforme "Protocolo Manchester".

- Para um protocolo que segue o modelo "Pergunta-Chave e Fluxograma", a tela de "Discriminador Fluxograma Sintoma" apresenta uma estrutura baseada no cadastro de blocos de discriminadores;
- Ao selecionar um fluxograma sintoma no campo "Fluxograma" do bloco "Fluxograma", o Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco apresenta as áreas "Lista do Bloco do Fluxograma" e "Bloco do Fluxograma";

- A área "Bloco do Fluxograma" é estruturada da seguinte forma: o campo "Bloco" exibe o bloco selecionado referente ao fluxograma sintoma, se não houver nenhum bloco selecionado, é exibido o número do próximo bloco em relação ao último cadastrado. Para visualizar as informações de item, basta acionar no botão  ao lado de cada campo;
- Os campos "Sim" e "Não" referem-se ao resultado da análise do bloco do fluxograma de sintoma durante o processo de classificação de risco. Se para o ponto de decisão selecionado, estiver configurada a opção "Próximo", o usuário será direcionado para o bloco seguinte, de acordo com a sequência definida no bloco "Lista de Bloco do Fluxograma";
- Quando um ponto de decisão não estiver apontando para "Próximo", o sistema permanece configurado para apontar a uma prioridade de classificação. Neste caso, quando o usuário selecionar o ponto de decisão no momento da classificação de risco, a prioridade de classificação será atribuída ao paciente. É importante ressaltar que, para o ponto de decisão "Sim" realizar a atribuição da prioridade a um paciente é preciso que ao menos um discriminador esteja selecionado. Assim como para o ponto de decisão "Não", para que a prioridade possa ser atribuída ao paciente não pode haver nenhum discriminador selecionado no bloco que está sendo "negado";
- Caso o fluxograma sintoma necessite de uma triagem secundária ou reavaliação (conforme "Protocolo Manchester") a opção "Utiliza triagem secundária ou Reavaliação (Situação)" estará selecionada, localizada abaixo do campo "Não" na área "Bloco do Fluxograma" e em seguida, selecionar a opção "Triagem Secundária" ou "Reavaliar" no campo que será apresentado ao lado direito na mesma linha. Quando o usuário operador estiver avaliando um paciente em um sintoma que possua "Triagem Secundária" durante o processo de "Classificação de Risco", o usuário somente pode selecionar um discriminador de um bloco depois que tiver "descartado" discriminadores associados à "Avaliações/Aferições". O "descarte" de discriminadores é realizado por meio do registro das Avaliações/Aferições associadas aos discriminadores dos blocos;
- A opção "Reavaliar" é utilizada como ponto final de decisão de um fluxograma para indicar que o fluxograma sintoma chegou ao final do seu fluxo, sem apresentar uma pergunta compatível com a condição do paciente. Neste caso, o usuário operador do sistema deve selecionar outro sintoma ou rever as perguntas desde o início do fluxograma do mesmo sintoma;
- Após definição dos resultados (prioridades da classificação) dos pontos de decisão do bloco, o sistema apresenta os discriminadores que estão associados a classificação de risco;
- Para este protocolo o usuário não pode alterar as informações, só é permitido visualizar os registros;

- Os blocos são visualizados na área "Lista de Bloco do Fluxograma" e não podem ser editados ou excluídos. Ao pressionar o botão  referente a um bloco, possibilitará a visualização das perguntas que o compõe e não será permitido alterar os resultados dos pontos de decisão "Sim" e "Não";
- No caso de utilização do "Protocolo Manchester", os dados de configurações desta tela são inseridos via carga de dados e não podem sofrer alterações. O Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco bloqueia qualquer alteração que seja efetuada nesta tela de configuração, pois a reprodução do "Protocolo de Manchester" é licenciado pela Editora Blackwell Publishing Ltda., traduzido para o Português pelo "Grupo Português de Triagem" e seus dados não podem ser alterados.

Procedimento para grupo pergunta escore

A seguir, a configuração da tela de "Discriminador Fluxograma Sintoma" para um protocolo que utiliza "Grupo Pergunta Escore".

- A associação de discriminadores aos fluxogramas sintomas de um protocolo que trabalhe no formato "Grupo Pergunta Escore" procede de forma semelhante a do fluxograma, porém, sem o uso de blocos e com o uso de grupos;
- Selecionar o protocolo no campo "Protocolo" e definir um fluxograma sintoma no campo "Fluxograma" para associar os discriminadores;
- Em seguida, deve-se definir um grupo para receber as configurações no campo "Grupo". Seguindo o processo, selecionar os discriminadores na lista "Discriminador" e pressionar no botão  para associar os discriminadores aos fluxogramas;
- Dessa forma, o discriminador será incluído na lista "Lista de Discriminador(es) da Classificação". Serão exibidos dois campos para cada discriminador, a opção "Ativo" que ao ser marcado ativa a visualização do discriminador na classificação de risco e o campo "Escore" onde deve ser preenchido o valor do escore (pontuação), equivalente ao discriminador. O escore será utilizado durante o processo de classificação de risco para atribuir uma prioridade de classificação para um paciente;
- Ao final da associação e atribuição de escore para todas os discriminadores, o registro deve ser confirmado, acionando o botão  ;
- Os grupos de um fluxograma sintoma poderão ser editados ou excluídos a qualquer momento, por meio dos botões  e  , na área "Lista de grupo do fluxograma sintoma".

Procedimento para Pergunta-Chave e Recurso

A seguir, a configuração da tela de "Discriminador Fluxograma Sintoma" para um protocolo que utiliza "Pergunta-Chave e Recurso".

- Selecionar o protocolo no campo "Protocolo", será exibido o bloco: "Classificação do fluxograma sintoma";
- No campo "Fluxograma" definir um fluxograma sintoma para associar os discriminadores;
- Seguindo o processo, selecionar os discriminadores na lista "Discriminador" e pressionar no botão  para associar os discriminadores aos fluxogramas;
- Desta forma, o discriminador será incluído na lista "Lista de Discriminador(es) da Classificação". Serão exibidos dois campos para cada discriminador, a opção "Ativo" que ao ser marcado ativa a visualização do discriminador na classificação de risco e o campo "Escore" onde deve ser preenchido o valor do escore (pontuação), equivalente ao discriminador. O escore será utilizado durante o processo de classificação de risco para atribuir uma prioridade de classificação para um paciente;
- Ao final da associação e atribuição de escore para todas os discriminadores, o registro deve ser confirmado, acionando o botão  ;
- Os grupos de um fluxograma sintoma poderão ser editados ou excluídos a qualquer momento, por meio dos botões  e  , na área "Lista de grupo do fluxograma sintoma".

Impactos

A tela abaixo utiliza a associação dos discriminadores aos fluxogramas sintomas apresentados pelo paciente no momento da classificação e atendimento.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Associação protocolo empresa

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Associação Protocolo Empresa

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Protocolo](#)

Função da tela

Associar um protocolo a uma empresa e definir parâmetros gerais para o comportamento do Sistema de "Acolhimento com Classificação de Risco", de acordo com os processos da empresa.

Como usar

Pesquisar empresa com associação a um protocolo

Ao acessar esta tela, serão listados todos os protocolos de empresas.

- Selecionar a empresa e/ou o protocolo que deseja filtrar;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, serão exibidas, na "Lista de Protocolo Empresa", a empresa e o protocolo associados;
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar a associação de protocolo empresa, bem como o fluxo de atendimento informado para o protocolo ao clicar no botão  .

Realizar associação

Para realizar associação de um protocolo com uma empresa, basta clicar no botão  . Dessa forma, será apresentada a tela de cadastro.

- Selecionar uma empresa no campo "Empresa" e um protocolo no campo "Protocolo". São campos obrigatórios;
- No caso da instituição trabalhar com prioridade de atendimento para pessoas idosas, o campo "Idade Mínima Prioritária" deve ser preenchido com a idade mínima a ser considerada para que os pacientes que possuam idade maior ou igual a esta, recebam prioridade de atendimento automaticamente pelo Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco. A prioridade de atendimento é aplicada tanto para o processo de classificação de risco quanto depois da classificação efetuada, respeitando o grau de prioridade definido pelas classificações.

Exemplo: supondo que a instituição cadastre "Idade Mínima Prioritária" de 65 anos, ao recepcionar um paciente com esta idade, ele é visualizado na frente de outros pacientes sem prioridade de atendimento antes do processo de classificação. Depois de atribuída uma classificação (prioridade) para o paciente idoso, ele continua a ser listado na frente de outros pacientes que possuam a mesma prioridade. Caso a instituição não utilize prioridade para pacientes idosos, o campo "Idade Mínima Prioritária" deve ficar em branco.

- Em seguida, informar o horário de início e final do trabalho de classificação de risco do hospital. No caso da empresa trabalhar com o processo de classificação de risco 24 horas por dia, basta marcar a opção "24hrs", desta forma o sistema define a hora 00:00 para o campo "Horário de Início da Classificação" e 23:59 para o campo "Horário de Fim da Classificação". Quando o sistema detectar que está fora do período de classificação de risco, a "Lista de Pacientes" não exibirá pacientes recepcionados pelo Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco, identificando esta situação para o usuário por meio de uma mensagem;

- Por fim, determinar qual o fluxo de processo de atendimento que será seguido pelo hospital. O Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco possui duas opções de fluxos formados por quatro processos, são eles:
 - Totem / Cadastro / Classificação / Atendimento;
 - Totem / Classificação / Cadastro / Atendimento.
- Abaixo, informações mais detalhadas sobre os processos:
 - Totem: dispositivo de geração de senha para os pacientes recém-chegados. O sistema MV
 - Totem Senha controla esse processo. Caso a instituição não utilize o dispositivo totem, deve ignorar esse processo, considerando a segunda opção de cada fluxo como processo inicial;
 - Cadastro: cadastro administrativo com informações detalhadas sobre o paciente a ser realizado por um usuário por meio dos sistemas MV2000 ou SOUL MV;
 - Classificação: processo de classificação de risco realizado pelo Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco;
 - Atendimento: processo de atendimento médico. É controlado pelos sistemas do MV2000, SOUL MV e também nos sistemas Prontuário Eletrônico do Paciente versões 01 e 02.

Impactos

Na tela abaixo, o protocolo utilizado será o que foi associado a empresa e na qual, o usuário deverá estar logado.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Estação chamada painel

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Estação Chamada Painel

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Cadastrar as estações (máquinas) que realizarão as chamadas dos pacientes em um painel. Este cadastro é relevante apenas se a instituição utiliza o Sistema Painel. Geralmente, o setor de TI da instituição possui conhecimento técnico para realizar estes cadastros.

Como usar

Pesquisar estações

Ao acessar a tela "Estação Chamada Painel", serão listadas todas as estações previamente cadastradas.

- Selecionar a empresa na lista;
- Informar o nome de uma estação no campo "Estação Nome (Host)" e o nome do local onde será disponibilizado o painel (sala, guichê, consultório) em "Estação Local". O nome da estação poderá ser escrito com caracteres alfanuméricos ;
- Clicar no botão  ;
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar  ou excluir  as estações.

Cadastrar estações

- Para realizar o cadastro de uma estação, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Selecionar a empresa onde a estação está instalada, no campo "Empresa";
- Informar o nome da máquina que realizará a chamada de pacientes, no campo "Estação Nome (Host)";
- Por fim, preencher um nome para a estação no campo "Estação Local", a fim de identificar o local físico da máquina cadastrada e facilitar a identificação dela pelos pacientes que serão chamados. Exemplos: "Sala 01", "Guichê 03";
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A estações cadastradas serão utilizadas no momento da chamada do paciente no Sistema Painel.

Consultar registros de log

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configuração / Configuração / Consultar Registros de LOG

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Pesquisar a respeito dos logs efetuados no sistema, levando em consideração alguns critérios do tipo: data inicial e final, tipo de log e usuário. Os logs de dados representam a descrição de algum tipo de registro realizado no sistema, são utilizados também como filtros de pesquisa, que servem como facilitadores da consulta pelo usuário para obtenção dos resultados de forma mais rápida e precisa.

Como usar

Pesquisar logs

- Para realizar a pesquisa dos registros de log, é necessário definir alguns critérios de consulta, como:
 - Data inicial e final (que são campos obrigatórios);
 - Tipos de log:
 - Modificação de dados;
 - Autenticação;
 - Acesso aos dados;
 - Interação entre os sistemas;
 - Erro;
 - Alerta de segurança.
 - Usuário. Para adicionar o usuário, é necessário clicar no botão 
- Com todos os parâmetros definidos, acionar o botão  para realizar a pesquisa. Dessa forma, serão exibidos os resultados que correspondem aos parâmetros informados.

Impactos

Não existem impactos.

Setor

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Setor

Módulo

Não existem pré-requisitos.

Pré-requisitos

Tabelas

Na tela "Centro de Custo" do Sistema de Gerenciamento de Tabelas, deve-se informar o tipo de atendimento para o setor de Urgência e Emergência ('U').

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Globais / [Centro de Custo](#)
- MV2000 / GLOBAL / Globais / Centro de Custo

Movimentações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Lista de Pacientes](#)

Função da tela

Pesquisar os setores do hospital, bem como a lista dos pacientes relacionados ao setor pesquisado.

Como usar

Pesquisar setores

Ao acessar a tela "Setor", serão listados todos os setores previamente cadastrados.

- Informar o nome do setor com o qual deseja filtrar a lista;
- Clicar no botão  para realizar a pesquisa.

Impactos

Não existem impactos.

Especialidades da classificação

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Especialidades da Classificação

Pré-requisitos

Tabelas

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / [Especialidades](#)
- SOUL MV / Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / [Empresas](#)
- MV2000 / AMDC / Tabelas / Especialidades
- MV2000 / FNFI / Tabelas / Empresas

Função da tela

Consultar as especialidades que estão vinculadas a classificação de risco e associá-las às empresas para que este vínculo seja criado.

Como usar

Pesquisar especialidades da classificação

Ao acessar a tela "Especialidades da Classificação", serão exibidas, no bloco "Lista de Especialidades de Classificação", as empresas que já foram vinculadas às especialidades.

- Informar o nome da empresa e/ou a descrição da especialidade;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas no bloco "Lista de Especialidades da Classificação";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar  ou excluir  as especialidades.

Cadastrar especialidades da classificação

- Para realizar o cadastro de uma especialidade da classificação, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Para incluir a especialidade no procedimento de classificação de risco, ela deve ser associada à "Empresa/Instituição", ou seja, quando um paciente for encaminhado para uma especialidade que passa por classificação de risco, este paciente será exibido na lista de pacientes do Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco, caso a especialidade encaminhada não seja vinculada ao procedimento de classificação de risco, o paciente não será exibido na lista de pacientes;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A tela abaixo utiliza a associação da empresa a especialidade para encaminhamento do paciente no momento da classificação e atendimento.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Protocolo Americano (ESI)

Grupo de intervenção salva vida

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo Americano (ESI) / Grupo de Intervenção Salva-Vida

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Consultar e cadastrar os grupos para associação às intervenções salva-vidas, que serão associadas aos discriminadores de protocolos que utilizam recursos como forma de avaliação.

Como usar

Pesquisar grupo de intervenção salva-vida

Ao acessar a tela "Grupo de Intervenção Salva-Vida", serão exibidos no bloco "Lista de Grupo de Intervenção Salva-Vida" os grupos de intervenções previamente cadastrados.

- Informar no campo "Descrição", o nome do grupo no qual deseja filtrar na lista;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas no bloco "Lista de Grupo de Intervenção Salva-Vida";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar  ou excluir  as especialidades.

Cadastrar grupo de intervenção salva-vida

- Para realizar o cadastro de um grupo de intervenção salva-vida, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Informar a descrição do grupo no campo "Descrição";
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Na tela abaixo a seleção de um grupo de intervenção salva-vida será obrigatório para a associação de intervenções salva-vidas ao grupo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo Americano (ESI) / [Intervenção Salva-Vida](#)

A tela abaixo utiliza a associação do grupo a intervenção salva-vida para avaliação do paciente no momento da classificação e atendimento.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Grupo de situação de alto risco

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo Americano (ESI) / Grupo de Situação de Alto Risco

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Consultar e cadastrar os grupos para associação às situações de alto risco que serão relacionadas aos discriminadores de protocolos que utilizam recursos como forma de avaliação.

Como usar

Pesquisar grupo de situação de alto risco

Ao acessar a tela "Grupo de Situação de Alto Risco", exibirá serão exibidos, no bloco "Lista de Grupo de Situação de Alto Risco", os grupos de situação de alto risco previamente cadastrados.

- Informar no campo "Descrição", o nome do grupo com o qual deseja filtrar a lista;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na bloco "Lista de Grupo de Situação de Alto Risco";
- Caso seja necessário, o usuário poderá editar  ou excluir  as especialidades.

Cadastrar grupo de situação de alto risco

- Para realizar o cadastro de um grupo de situação de alto risco, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Informar a descrição do grupo no campo "Descrição";

- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A seleção de um grupo de situação de alto risco, na tela abaixo, será obrigatório para a associação de situações de alto risco ao grupo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo Americano (ESI) / [Situação de Alto Risco](#)

A tela abaixo utiliza a associação do grupo a situação de alto risco para avaliação do paciente no momento da classificação e atendimento.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Intervenção salva-vida

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo Americano (ESI) / Intervenção Salva-Vida

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo Americano (ESI) / [Grupo de Intervenção Salva-Vida](#)

Função da tela

Consultar e cadastrar as intervenções salva-vidas, bem como associar ao grupo pertencente para posterior associação aos discriminadores de protocolos que utilizam recursos como forma de avaliação.

Como usar

Pesquisar intervenção salva-vida

Ao acessar a tela, será exibido o bloco "Lista de Intervenção Salva-Vida" com todas as intervenções que foram vinculadas aos grupos de intervenções, posteriormente.

- Informar no campo "Descrição", o nome da intervenção a qual deseja filtrar na lista;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na bloco "Lista de Intervenção Salva-Vida";

- Essas informações poderão ser editadas  ou excluídas  da lista.

Cadastrar intervenção salva-vida

- Para realizar o cadastro de uma intervenção salva-vida, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Informar uma descrição para a intervenção e selecionar o grupo que será associado;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A tela abaixo utiliza intervenções salva-vidas quando possuir associação com discriminadores para avaliação do paciente no momento da classificação e atendimento.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Situação de alto risco

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo Americano (ESI) / Situação de Alto Risco

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo Americano (ESI) / [Grupo de Situação de Alto Risco](#)

Função da tela

Consultar e cadastrar as situações de alto risco, bem como associar ao grupo pertencente para posterior associação aos discriminadores de protocolos que utilizam recursos como forma de avaliação.

Como usar

Pesquisar situação de alto risco

Ao acessar a tela, será exibido o bloco "Lista de Situação de Alto Risco" com todas as situações de alto risco que foram vinculadas aos grupos de situações de alto risco, posteriormente.

- Informar no campo "Descrição", o nome da situação a qual deseja filtrar na lista;

- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas no bloco "Lista de Situação de Alto Risco";
- Essas informações poderão ser editadas  ou excluídas  da lista.

Cadastrar situações de alto risco

- Para realizar o cadastro de situações de alto risco, basta clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Informar uma descrição para a situação e selecionar o grupo que será associado;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A tela abaixo utiliza situações de alto risco quando possuir associação com discriminadores para avaliação do paciente no momento da classificação e atendimento.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Recursos urgência

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo Americano (ESI) / Recursos Urgência

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Consultar e cadastrar os recursos de urgência para posterior associação aos discriminadores de protocolos que utilizam recursos como forma de avaliação.

Como usar

Pesquisar recursos urgência

Ao acessar a tela, será exibido o bloco "Lista de Recurso da Urgência" com todos os recursos que foram cadastrados anteriormente.

- Informar, no campo "Descrição", o nome do recurso com o qual deseja filtrar a lista;

- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas no bloco "Lista de Recurso da Urgência";
- Essas informações poderão ser editadas  ou excluídas  da lista.

Cadastrar recursos urgência

- Para realizar o cadastro dos recursos, basta clicar no botão  . Dessa forma, será apresentada a tela de cadastro;
- Informar uma descrição para recurso;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

A tela abaixo, utiliza recursos de urgência quando possuir associação com discriminadores para avaliação do paciente no momento da classificação e atendimento.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)

Perfil

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Perfil

Pré-requisitos

Configurações

Verificar e configurar na tela "Usuários" do sistema de Gestão de Usuários quais módulos os usuários terão permissão de acesso no Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco.

- SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / [Usuários](#)
- MV2000 / SGU / Autorização / Usuários

Criar e configurar na tela "[Perfil](#)" do sistema de Gerenciamento de Unidades os perfis necessários para atender ao contexto específico. Definir o código do setor de urgência para o perfil "SACR –Setor".

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Consultório / [Perfil](#)
- MV2000 / PAGU / Configuração / Consultório / Perfil

Definir na aba "Tipo de Prestador" da aba "Geral" da tela de configuração do sistema Gerenciamento de Unidades, o tipo de prestador dos prestadores ligados aos usuários que irão utilizar o sistema.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)
- MV2000 / PAGU / Gerenciamento de Unidade / Funcionamento

A combinação da configuração dos módulos com a do "Perfil", irá montar a lista de "Segmentos" aos quais o usuário terá acesso.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Segmento](#)

Tabelas

- SOUL MV / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / [Convênios e Planos](#)
- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Globais / [Centro de Custo](#)
- SOUL MV / Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / [Especialidades](#)
- SOUL MV / Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / [Prestadores](#)
- MV2000 / GLOBAL / Globais / Centro de Custo
- MV2000 / AMDC / Tabelas / Especialidades
- MV2000 / AMDC / Tabelas / Prestadores

Função da tela

Consultar e cadastrar o perfil do usuário, bem como efetuar a associação dos segmentos de acesso às aplicações.

Como usar

A configuração que é realizada para o perfil do usuário também poderá ser efetuada na tela "[Perfil](#)" do sistema de Gerenciamento de Unidades (PAGU), de onde originou a estrutura desta configuração no Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco.

Pesquisar perfil

Ao acessar a tela "Perfil", será exibida a lista "Pesquisa de perfil" com todos os perfis de usuários, previamente cadastrados.

- Informar no campo "Descrição", o nome do perfil o qual deseja filtrar na lista;
- Clicar no botão  ;

- Dessa forma, as informações serão exibidas na lista "Pesquisa de perfil";
- Se desejar, o perfil poderá ser copiado. Para isso, basta clicar no botão  ;
- As informações também poderão ser editadas  ou excluídas  da lista.

Cadastrar perfil

Perfil

- Para cadastrar um perfil, deve-se clicar no botão  . Dessa forma, será exibida a tela de cadastro;
- Informar a descrição do perfil no campo "Descrição". Único campo obrigatório para o cadastro;
- Conforme necessidade de configuração, preencher os demais campos, como:
 - Tipo de atendimento - entre: internação, ambulatorio, externo ou urgência;
 - Prestador - nome do prestador que utilizará o perfil;
 - Tipo de prestador - tipo do prestador informado;
 - Especialidade - a especialidade do prestador informado;
 - Setor - o setor que utilizará as informações;
 - Tipo de convênio - o tipo do convênio que será utilizado nesse perfil;
 - Convênio - o convênio que será utilizado nesse perfil;
 - Sistema - sistema que utilizará esse perfil, entre: PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente), SACR (Acolhimento com Classificação de Risco) ou PAGU (Gerenciamento de Unidades);
 - Sexo - entre feminino, masculino ou ambos;
 - Idade mínima - menor idade do paciente, para atendimento com esse perfil;
 - Idade máxima - maior idade do paciente, para atendimento com esse perfil;
 - Ativo - marcar o checkbox desse campo para ativar o perfil.

Segmento

Nesse bloco devem ser associados os segmentos ao perfil que está sendo configurado.

- Clicar no botão  "Cadastro de segmento". Dessa forma, será exibida a janela "Informe um segmento". Nela, o usuário deverá:
 - Selecionar o segmento que será visualizado na aplicação pelo usuário que possuir este perfil;
 - Determinar a ordem em que este segmento será visualizado na tela;
 - Selecionar o tipo do segmento, se será apresentado na parte do "Atendimento", na "Triagem" ou "Ignorado";
 - Definir o tipo da ação deste segmento, se será um documento eletrônico, se chamará uma tela, uma solicitação de internado, etc.;
 - Informar o caminho do segmento que será exibido no sistema;
 - Inserir uma descrição para este segmento;
 - Salvar as informações para que o segmento seja incluído na lista de segmentos do perfil. Para isso, basta clicar no botão .
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.
- Os segmentos incluídos na lista poderão ser copiados , editados  ou excluídos .

Impactos

Nestas telas relacionadas abaixo, somente poderão ser visualizados os perfis se estiverem configurados para o perfil do usuário logado na aplicação.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Dados do Paciente](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Abordagem Inicial](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Situação Incompatível](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Atendimento Social](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Resumo Acolhimento](#)

Segmento

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Segmento

Pré-requisitos

Tabelas

Na tela "Segmento" do Sistema de Gerenciamento de Unidade do MV2000, criar e configurar os segmentos de acordo com as necessidades do sistema.

- MV2000 / PAGU / Configuração / Consultório / Segmento

Na tela "Módulos" do Sistema de Gerenciamento de Usuários do MV2000, verificar e criar os módulos necessários para a configuração de segmentos.

- MV2000 / SGU / Tabelas / Módulos

Função da tela

Consultar e cadastrar os segmentos, bem como efetuar a associação dos segmentos de acesso as aplicações.

Como usar

Pesquisar segmentos

Ao acessar a tela "Segmento", serão exibidos, na lista "Segmento", os segmentos previamente cadastrados.

- Informar no campo "Descrição", o nome do segmento com o qual deseja filtrar a lista;
- Clicar no botão  ;
- Essas informações poderão ser editadas  ou excluídas  da lista.

Cadastrar segmentos

- Para cadastrar um segmento, basta clicar no botão  . Dessa forma, será apresentada a tela de cadastro;
- Informar uma descrição para o segmento no campo "Descrição";
- Determinar se o segmento estará ativo ou não;
- Definir em qual menu o segmento será exibido, se "Ação", "Comandos", "Configuração" ou "Observação";
- Informar o tipo do segmento, se será um Acolhimento, uma Aferição, uma Admissão médica, entre outros;
- Selecionar o módulo o qual o segmento será associado;
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;

- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

Os segmentos serão vinculados aos perfis cadastrados no sistema.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Perfil](#)

Nas telas relacionadas abaixo, somente poderão ser visualizados os segmentos cadastrados.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Dados do Paciente](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Abordagem Inicial](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Situação Incompatível](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Atendimento Social](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Resumo Acolhimento](#)

Auditoria

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Auditoria

Pré-requisitos

Tabelas

- SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / [Usuários](#)
- MV2000 / SGU / Autorização / Usuários

Função da tela

Consultar e/ou associar os usuários como auditores internos, externos ou ambos.

Como usar

Pesquisar auditores

Ao acessar a tela de "Auditoria", serão exibidos na lista "Auditores" os auditores previamente associados.

- Informar, no campo "Descrição", o nome do auditor com o qual deseja filtrar a lista;
- Marcar o tipo de auditor que deseja pesquisar, entre as opções: "Ambos", "Auditor externo" ou "Auditor interno";

- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, a s informações serão exibidas na lista "Auditores";
- Caso deseje excluir informações da lista, basta selecionar o auditor e clicar no botão  .

Associar auditores

- Para associar um auditor a um tipo de auditoria, basta clicar no botão  . Dessa forma, será apresentada a tela de cadastro;
- Determinar se o auditor será "Externo" ou "Interno", marcando o checkbox referente à opção desejada;
- Selecionar o nome do profissional ao lado da opção que foi escolhida, "Auditor Externo" ou "Auditor Interno";
- Clicar no botão < Salvar e voltar > para salvar as informações e concluir o processo;
- Caso deseje continuar cadastrando, acionar o botão < Salvar e continuar >;
- Para apagar as informações cadastradas, basta clicar no botão < Limpar formulário >;
- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela principal.

Impactos

De acordo com as configurações realizadas, os auditores poderão efetuar as auditorias nas telas listadas abaixo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Lista de Pacientes / Auditoria / [Auditoria Interna](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Lista de Pacientes / Auditoria / [Auditoria Externa](#)

Filas

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Filas

Pré-requisitos

Configurações

- Gestor de Fluxo / Configurações / Filas

Função da tela

Pesquisar as filas cadastradas e definir uma como "Padrão" para ser exibida na "Lista de Pacientes", após efetuar login.

Como usar

Pesquisar filas

Ao acessar a tela, será exibida a lista "Filas" com todas as filas previamente cadastradas.

- Informar, no campo "Descrição", o nome da fila a qual deseja pesquisar;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, a informação será exibida na lista "Filas";
- Para definir uma fila como "padrão", selecionar a fila desejada e clicar na lista;
- O usuário será direcionado automaticamente à tela "Lista de Pacientes", exibindo apenas os pacientes da fila selecionada;
- A fila selecionada na tela "Filas" ficará com o checkbox marcado.

Selecionar filas

- As filas cadastradas podem ser visualizadas e selecionadas na tela "Lista de Pacientes". Para isso, deve acionar o botão  e selecionar a opção "Filas";
- Exibirá a janela "Configuração de Fila(s)" com todas as filas cadastradas no Sistema Gestor de Fluxo;
- Caso deseje selecionar uma ou mais filas para serem exibidas na tela "Lista de Pacientes", basta selecionar qual fila deseja marcando o checkbox correspondente;
- Salvar a seleção e as filas selecionadas, caso existam pacientes para elas, clicando no botão  . Dessa forma, serão exibidas na tela de "Lista de Pacientes".

Impactos

A fila selecionada será exibida na tela abaixo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / [Lista de Pacientes](#)

Operacional

Lista de pacientes

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Lista de Pacientes

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Protocolo](#)
- MV Painei / Configurações / Chamadas
- Gestor de Fluxo / Configurações / Filas

Movimentações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Dados do Paciente](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Abordagem Inicial](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Situação Incompatível](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Atendimento Social](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Resumo Acolhimento](#)

Cadastrar o paciente na unidade hospitalar, caso ainda não possua cadastro nessa unidade. Se o paciente desejar ser identificado (chamado) pelo nome social, deverá informar ao atendente que está realizando o seu cadastro.

- MV2000 / PAEU / Atendimento / Cadastro de Pacientes
- SOUL MV / Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / [Cadastro de Pacientes](#)

Função da tela

Permitir o acesso ao processo de acolhimento de um paciente, visualizar a lista de todos os pacientes classificados e as ordens de prioridade no atendimento que já foram estabelecidas para eles, bem como visualizar os pacientes não classificados e que não possuem prioridade de classificação ainda definida.

Como usar

Ao acessar o sistema pela primeira vez, serão exibidas as filas configuradas no sistema Gestor de Fluxo (Gestor de Fluxo / Configurações / Filas). O usuário seleciona à fila a qual deseja visualizar os pacientes.

"Pré-classificação" ou "Classificação completa"

Caso deseje realizar uma pré-classificação para os pacientes, o usuário deverá:

- No sistema MV Painei na tela de "Configuração", aba "Chamadas", o checkbox "Pré-classificação" deverá está marcado (MV Painei / Configurações / Chamadas);
- Marcar o checkbox "Permitir Pré-classificação" na tela " [Protocolo](#) ", no cadastro do protocolo que está utilizando para classificar os pacientes (Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Protocolo](#));
- Ao acessar a aplicação, será exibida a janela "Tipo de Classificação Realizada pelo Usuário", com as seguintes opções:
 - Botão < Pré-Classificação > - ao clicar nesse botão, o paciente será chamado no MV Painei para uma pré-classificação na sala indicada;
 - Botão < Classificação Completa > - ao clicar nesse botão, o MV Painei irá chamar o paciente, na sala indicada, para efetuar a sua classificação de risco.

Visualizar a lista de pacientes

- A "Lista de Pacientes" será exibida de acordo com a fila selecionada. Nela, serão exibidos todos os pacientes classificados e não classificados, bem como as informações referentes a cada um deles, como:
 - A prioridade indicada na classificação do paciente;
 - O ícone para chamada do paciente no MV Painei;
 - O código da senha gerada no MV Totem Senha para o paciente;
 - O código do atendimento do paciente;
 - O nome do paciente;
 - A especialidade indicada na classificação do paciente;
 - O sexo do paciente;
 - A idade do paciente;
 - A data e a hora da recepção do paciente;
 - A hora em que o paciente foi classificado;
 - O tempo de espera;
 - O botão  , ao ser acionado, exclui a senha gerada para o atendimento do paciente.
- Caso deseje, poderá pesquisar um paciente. Para isso, é necessário que no campo "Nome do Paciente" seja informado parte do nome do paciente desejado, ou ainda, filtrar o status do paciente por "Todos", "Classificado(s)" e "Não Classificado(s);
- Ao selecionar a opção "Todos", serão exibidos todos os pacientes, classificados ou não;

- Ao selecionar a opção "Não Classificado(s)", serão exibidos os pacientes que não foram classificados (cenário em que não ocorreu a classificação e a ausência de um responsável pela triagem), assim, o campo "Usuário Triador" será bloqueado;
- Caso a opção selecionada seja "Classificado(s)", um paciente poderá ser consultado, informando o prestador responsável pela triagem e o período de triagem.

Selecionar paciente para classificação

Para iniciar o processo de classificação do quadro clínico do paciente, um paciente deverá ser selecionado na lista de pacientes. Para isso, basta clicar duas vezes sobre o campo "Nome do Paciente". Dessa forma, o usuário será direcionado à tela de " [Dados do Paciente](#) ".

Processo de exclusão

- É possível excluir o paciente da lista, mesmo que sua classificação tenha sido iniciada.

Ao acionar o botão  , será exibida a seguinte mensagem de alerta: "Processo de classificação para este paciente já iniciado pelo usuário XXX. Deseja removê-lo da lista?". De modo que o usuário poderá confirmar ou não o processo.

- Caso a classificação do paciente tenha sido finalizada, ao solicitar a exclusão do paciente da lista, acionando o botão  , será exibida a seguinte mensagem de alerta: "Processo de classificação finalizado para este paciente pelo usuário XXXX. Deseja removê-lo da lista? ". De modo que o usuário poderá confirmar ou não o processo.

Acessar outra aplicação

Na barra de ferramentas, no alto da tela, é possível acessar outras aplicações no ambiente segmentado. Para tal, basta acionar o botão  , selecionar entre as seguintes aplicações: MV Painel, MV Painel Recepção ou MV Totem Senha.

Histórico de triagens

- Ao acionar o botão  , os históricos das triagens serão visualizados. Caso deseje consultar uma triagem específica, deve-se utilizar os filtros "Pacientes não classificados", "Usuário triador" e/ ou "Período da triagem";
- Após preencher as informações, acionar o botão  para realizar a pesquisa;
- No bloco "Lista de Triagens", serão exibidas as listas de triagens de acordo com os parâmetros informados;

- O resumo da classificação poderá ser visualizada em PDF, clicando no botão  referente ao atendimento desejado. Informações exibidas no "Resumo da Classificação de Risco - Protocolo" são as seguintes:
 - Data e hora da impressão da senha para triagem;
 - Dados do paciente, como: nome, código, data de nascimento, sexo, idade, senha gerada no MV Totem para o atendimento, convênio utilizado, código do atendimento e o SAME;
 - Data e hora do início da triagem juntamente com as informações do prestador que atendeu esse paciente, como: nome, registro no órgão da sua categoria como o COREN, CRO ou CRM e função;
 - Prioridade do atendimento;
 - Cor atribuída;
 - Queixa principal;
 - Fluxograma do sintoma;
 - Discriminadores;
 - Especialidade;
 - Prestador responsável pelo acolhimento do paciente. São exibidas informações como: nome, registro no órgão da sua categoria como o COREN, CRO ou CRM e função;
 - Data e hora do término da triagem.
- É possível excluir a triagem. Para isso, basta clicar no botão . Dessa forma, será exibida a janela "Remover Senha: xxx", onde o usuário deverá justificar a exclusão. Essa informação é obrigatória, do contrário, o processo de exclusão não será concluído;
- O botão  "Atualizar", sempre que acionado atualizará a lista de pacientes;
- O botão  "Recepção", quando acionado, exibirá a tela "[Recepção do Paciente](#)".

Impactos

Na tela abaixo, é realizado o cadastro das informações dos pacientes que não foram classificados, bem como permite a visualização das informações para os pacientes já classificados.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Dados do Paciente](#)

Atendimento

Dados do paciente

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Dados do Paciente

Pré-requisitos

Movimentações

- MV2000 / PAEU / Atendimento / Cadastro de Pacientes
- SOUL MV / Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / [Cadastro de Pacientes](#)

Função da tela

Cadastrar e visualizar as informações referentes ao paciente, bem como capturar a foto do paciente.

Como usar

A tela de "Dados do Paciente" se comporta de acordo com o fluxo de processo escolhido pelo hospital. Se o hospital realiza o acolhimento de um paciente que possui cadastro no Sistema MV2000, essa tela apresenta automaticamente os seus dados que foram registrados anteriormente. Contudo, se o hospital recepciona um paciente pelo Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco sem utilizar o cadastro do MV2000 ou SOUL MV, exibirá a tela "Recepção do Paciente", mais simplificada com um número menor de campos de cadastro. Esta diferença é exemplificada nos tópicos a seguir.

Recepção do paciente

- Para acessar a tela de "Recepção do Paciente", o usuário deverá acionar o botão  na "Lista de Pacientes".

Pesquisar cadastro do paciente

- Ao acessar a tela "Recepção do Paciente" os campos serão exibidos em branco, possibilitando a pesquisa;
- Selecionar o modo de pesquisa que deseja utilizar entre: "Código do Paciente" ou "Dados do Paciente";

- Código do Paciente, ao ser selecionado, opta por realizar a identificação do paciente por meio da leitura óptica do código de barras com as informações do paciente indicado. Dessa forma, buscará o paciente por meio do código cadastrado. As informações do paciente serão salvas e exibidas apenas para leitura;
- Dados do Paciente, ao ser selecionado, exibirá os campos em branco para realizar pesquisa de acordo com os parâmetros informados;
- Caso deseje consultar o nome do paciente usando o símbolo %, o usuário poderá colocar esse símbolo no início ou no final do nome para que sejam pesquisados os nomes que possuam a palavra informada na sua totalidade, por exemplo: MARIA% = MARIA DAS GRAÇAS DE LABOURÉ. Poderá também ser utilizada uma palavra entre % para que sejam exibidos todos os nomes que possuam essa palavra como nome ou parte de um nome, por exemplo: %MARI% = MARIO JOSÉ DE LIMA, MARIA DAS GRAÇAS DE LABOURÉ ou MARIANGELA GALVÃO DOS SANTOS;
- Informar os parâmetros desejados;
- Clicar no botão  ;
- Dessa forma, as informações serão exibidas na "Lista de pacientes já cadastrados". Caso não haja nenhuma informação correspondente, será exibida na lista a seguinte mensagem: "Pesquisa sem registros".

Cadastrar paciente

Caso, após realizar a pesquisa, seja constatado que o paciente não possui cadastro nessa unidade hospitalar, o referido deverá ser realizado.

- Informar o nome do paciente, campo obrigatório. Não será permitido informar o nome completo do paciente com mais de um espaço entre os nomes, esse procedimento é impedido automaticamente;
- Informar a data de nascimento e clicar no botão "Tab" no teclado do computador;
- A aplicação calculará a idade do paciente, a partir da data de nascimento informada, exibindo esse dado no campo "Idade", automaticamente;
- No campo "Sexo", escolher o gênero entre as três opções existentes: Feminino, Masculino ou Indefinido. Informação obrigatória;
- Selecionar na lista a cidade onde o paciente mora. Informação obrigatória;
- Definir o tipo de chamada para o paciente, se "Normal" ou "Preferencial";
- Clicar no botão  para salvar as informações, gerar a senha e concluir o processo do cadastro do paciente;

- O botão  quando acionado apagará os dados informados na tela, possibilitando outras pesquisas ou outros cadastros.

Pacientes cadastrados

Pesquisar cadastro do paciente

Se o **paciente** possuir cadastro, realizado nos sistemas do MV2000 ou SOUL MV, na unidade hospitalar, será possível realizar pesquisa de seu cadastro na tela "Recepção do Paciente".

- Informar o nome do paciente, essa informação é obrigatória para realizar uma pesquisa. Porém, quanto mais campos forem informados, mais precisa será a pesquisa;
- Acionar o botão  ;
- As informações serão exibidas na "Lista de pacientes já cadastrados"; de acordo com os parâmetros informados.

Fotografar o paciente

O Sistema Acolhimento com Classificação de Risco oferece o recurso de armazenamento de foto do paciente. Para utilizar esse recurso, basta que exista uma câmera conectada à máquina onde o sistema está sendo acessado e seguir os passos para captura da foto. Caso, deseje anexar a foto do paciente em seu cadastro, os passos abaixo deverão ser seguidos:

- Clicar na linha do cadastro desejado na "Lista de pacientes já cadastrados". Dessa forma, a tela "Dados Paciente" será exibida com os dados do paciente selecionado. Informações essas cadastradas nos sistemas MV2000 ou SOUL MV;
- Caso as informações cadastradas, nos sistemas MV2000 ou SOUL MV, contenham fotos no formato "TIFF", elas serão convertidas para o formato "JPEG" automaticamente;
- Deve-se apontar a câmera (webcam) para o rosto do paciente e acionar o botão  para capturar a fotografia. A foto deverá ser adicionada no campo indicado pela figura



, que está localizada na parte inferior da tela;

- O botão  quando acionado, retornará à tela de "Recepção do Paciente" com seus campos limpos, possibilitando realizar outras pesquisas ou cadastros.

Impactos

A tela abaixo permite a classificação do paciente, caso seus dados tenham sido cadastrados pelo segmento "Dados do Paciente".

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / **Classificação**

Na tela listada abaixo, permite a identificação de "Situação Incompatível" para o paciente, caso seus dados tenham sido cadastrados pelo segmento "Dados do Paciente".

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Situação Incompatível](#)

Abordagem inicial

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Abordagem Inicial

Pré-requisitos

Movimentações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Dados do Paciente](#)

Função da tela

Armazenar as informações iniciais do contato do profissional de classificação de risco com o paciente.

Como usar

Procedimentos

- A tela de "Abordagem Inicial" tem como objetivo registrar algumas informações do paciente. Ela é composta de dois campos:
 - Queixa Principal - informar a(s) queixa(s) relatadas pelo paciente, por seus familiares ou acompanhantes. O símbolo * indica que a informação do campo sinalizado com esse símbolo é uma informação obrigatória. E, observação, para descrever as demais informações relevantes a respeito do paciente;
 - Alergias - no campo "Substância", deve-se informar a(s) substância(s) que provoca(m) alergia(s) no paciente. A medida que for sendo informado o nome da substância, serão apresentadas as substâncias e os medicamentos cadastrados que atendem aos parâmetros informados, como uma espécie de autocompletar. É importante que, no campo "Observação", sejam descritas as informações relevantes a respeito da alergia do paciente. O símbolo * indica que a informação do campo sinalizado com esse símbolo é uma informação obrigatória.
- Após descrever as observações relacionadas à alergia, acionar o botão  para incluí-las na lista de itens.

Impactos

Na tela abaixo, é possível realizar a classificação do paciente quando ele tiver a "Abordagem Inicial" cadastrada.

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Classificação](#)

Atendimento - Classificação

Localizações

[Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Classificação](#)

Pré-requisitos

Configurações

O comportamento do segmento de "Classificação" depende da configuração do "Protocolo de Classificação de Risco" utilizado pela empresa. O Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco possui quatro tipos de comportamento possíveis que são: "Pergunta-chave", "Pergunta-chave com Recurso", "Pergunta-chave com Fluxograma" e "Grupo de Pergunta Escore". Esse comportamento é definido pela configuração do protocolo na tela "Protocolo".

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Protocolo](#)
- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Parâmetro Geral](#)
- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configurações / Discriminador](#)

Movimentações

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Dados do Paciente](#)
- [Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Abordagem Inicial](#)
- [Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Situação Incompatível](#)
- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Discriminador Fluxograma Sintoma](#)

Função da tela

Definir (classificar) uma prioridade clínica para o atendimento, seguindo a estrutura definida pelo "Protocolo de Classificação de Risco" utilizado pelo hospital.


Como usar

Comportamento "Pergunta-chave" - Protocolo Humaniza SUS

- Com a escolha do protocolo "Humaniza SUS", o Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco apresenta a janela de seleção de "Lista de fluxograma(s) sintoma" . Eles serão ordenados conforme configuração padrão que pode ser estabelecida na tela " [Parâmetro Geral](#) ";


- No entanto, é possível pressionar o botão  para organizar os fluxogramas sintomas por ordem alfabética ou acionar o botão  para visualizar os fluxogramas sintomas por grupo;
- Para selecionar um "Fluxograma Sintoma", basta clicar em algum dos quadros apresentados;
- Para cancelar o procedimento, deve-se acionar o botão  ;
- Na "Lista de fluxograma(s) sintoma", deve-se selecionar o fluxograma do sintoma que mais se identifica com a situação do paciente. Dessa forma, o usuário será direcionado à tela que possibilita a seleção de discriminadores, a fim de identificar uma prioridade clínica para o paciente;
- Na tela de "Classificação", serão apresentados os discriminadores associados à prioridade de maior grau de urgência, tornando mais rápido a identificação de pacientes com maior risco de vida e complicações;
- Ao identificar um discriminador que esteja associado à prioridade do paciente, basta selecioná-lo sobre a linha onde ele encontra-se, com esta ação o Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco destaca a linha selecionada e adiciona na caixa "Classificação" à prioridade correspondente;
- A prioridade do quadro "Classificação" somente será substituída se o usuário selecionar um discriminador associado a uma classificação de maior prioridade, independente do fluxograma sintoma;
- Se a classificação selecionada para o paciente tiver alguma recomendação, cadastrada na tela "Classificação", ela será apresentada na caixa "Recomendação da Classificação – CMR";
- Se o fluxograma sintoma selecionado tiver recomendação, cadastrada na tela "Fluxograma Sintoma Especialidade", ela será apresentada na caixa "Recomendação do fluxograma sintoma – CMR";
- Se o discriminador selecionado possuir alguma explicação cadastrada, na tela de configuração "Discriminador", ela será apresentada na caixa "Explicação" que é acessada ao acionar o botão  ;
- Caso este discriminador esteja associado a uma "Aferição" ou "Avaliação", ao selecionar a terceira coluna da tabela de discriminadores, será apresentada uma tela para que o processo de "Aferição/ Avaliação" seja realizado;

- Após a "Aferição/Avaliação" do item associado ao discriminador, o valor obtido ou digitado é apresentado na terceira coluna e a unidade na quarta. A informação sobre a "Aferição/Avaliação" associada a um discriminador aparece descrita na segunda coluna da tabela de discriminadores;
- Se necessário, após ser cadastrada, a aferição/avaliação poderá ser excluída do registro;
- A janela "Avaliação - Régua de Dor" será exibida para a identificação do grau de dor do paciente entre 0 a 10. Nota 0 (zero) corresponderia à ausência de dor, enquanto nota 10 a maior intensidade imaginável. São elas:
 - Dor leve = 1 a 3;
 - Dor moderada = 4 a 7;
 - Dor intensa = 8 a 10.

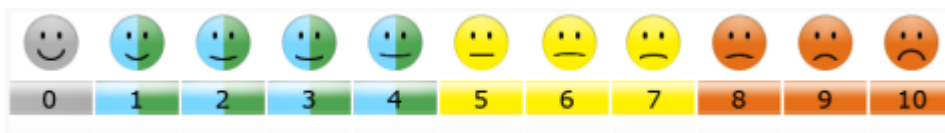

- É apresentada a janela "Avaliação de Escala de Glasgow", para avaliar o nível de consciência de um paciente. A escala compreende três testes: "Abertura Ocular", "Resposta Verbal" e "Resposta Motora". A pontuação das respostas será a interpretação da gravidade do trauma, são elas:
 - Traumas Graves : 3 a 8;
 - Traumas Moderados : 9 a 12;
 - Traumas Leves : 13 a 15.
- A janela "Avaliação - Quatro Níveis de Escala AVPU", será exibida pelo sistema para a avaliação do trauma cranioencefálico do paciente, são eles:
 - A (alerta);
 - V (resposta ao estímulo verbal);
 - P (resposta somente a dor);
 - U (sem resposta).
- Abaixo, a figura da janela "" apresentada para a realização de uma "Avaliação de TRTS - Triage Revised Trauma Score";

- Para a realização de uma "Avaliação de SCQ – Superfície Corporal Queimada", é exibida a janela "Avaliação - Superfície Corporal Queimada". A classificação das queimaduras:
 - 1º grau – caracterizada por eritema, dor e ausência de bolhas (não são contabilizadas para estimar a SCQ);
 - 2º grau – pele vermelha, presença de bolhas, perda da solução de continuidade da pele, edema, extremamente dolorosa;
 - 3º grau – pele pálida, brancacenta, às vezes com transparência dos vasos (coagulados), perda da solução de continuidade da pele com exposição do tecido celular subcutâneo, ausência de dor.

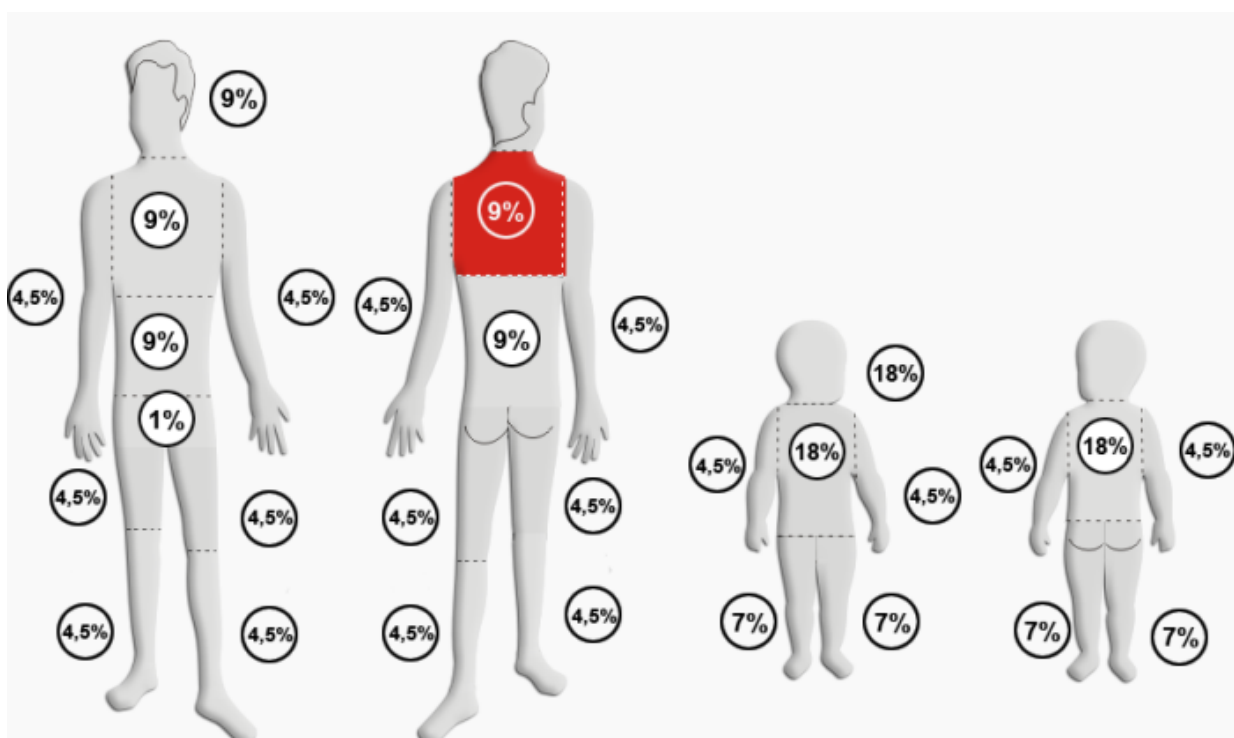

- Para navegar entre os discriminadores, deve-se utilizar os botões para voltar e avançar,  e  respectivamente. Vale ressaltar que, o grau de prioridade de atendimento do paciente está associada a um ou vários discriminadores. Então de acordo com a escolha dos discriminadores, será apresentado o grau de urgência do paciente;
- É permitido selecionar os discriminadores associados a uma classificação diferente em um mesmo fluxograma sintoma já avaliado, porém, pode selecionar discriminadores de outros fluxogramas sintomas;

- Exemplo: Se o usuário selecionar o discriminador "PAS $\geq$ 130 MMHG" que está na classificação "Prioridade III" do fluxograma sintoma "Pressão Alta", o usuário não poderá mais selecionar discriminadores de outras classificações deste mesmo fluxograma sintoma. Se desejar, poderá selecionar discriminadores de outros fluxogramas sintomas, seguindo esta mesma regra;
- Poderá ainda, visualizar os dados dos "Indicadores" acionando o botão . Dessa forma, serão exibidos os dados na tela;
- Após a seleção de um discriminador, determinar uma especialidade para encaminhar o paciente, acionando o botão < Especialidade > que aparece ao lado da caixa "Classificação". Em seguida, será apresentada uma janela com a lista de especialidades associadas ao fluxograma sintoma selecionado, previamente cadastrado na tela " [Fluxograma Sintoma Especialidade](#) ";
- Se o fluxograma do sintoma selecionado possuir apenas uma especialidade médica associada, ela será selecionada automaticamente;
- Após selecionar a especialidade, o usuário será retornado a tela de "Classificação". Nela, ele deve confirmar o encaminhamento do paciente à especialidade escolhida, acionando o botão  ;
- Dessa forma, será impresso o "Resumo da Classificação de Risco - Protocolo" e o usuário será direcionado à tela " [Lista de pacientes](#) ".

Comportamento "Pergunta-Chave com Fluxograma" - Protocolo Manchester

- O comportamento da opção "Pergunta-Chave com Fluxograma" será semelhante à "Pergunta- Chave". As únicas diferenças são:
 - Só é permitido ao usuário (triador) a seleção de um discriminador. Exemplo: Caso um "Fluxograma" possua cinco "Discriminadores" para cada nível de urgência, o triador pode afirmar ou negar estes discriminadores, até encontrar um que o paciente se encaixe. Caso o triador afirme algum discriminador, o sistema realiza a "Classificação", caso contrário, apresentará outra lista com os cinco discriminadores do nível de urgência mais baixo. A aplicação ordena a lista de discriminadores, da prioridade mais alta até a mais baixa;
 - Caso os discriminadores estejam associados a uma "Aferição" ou "Avaliação", será obrigatório realizar o processo de "Aferição/Avaliação".

Cores e significados da classificação

- Finalizado o processo de Classificação de Risco, o paciente é identificado pelo grau de urgência em seu atendimento. Apresenta também cores relacionadas a estas prioridades, geralmente são identificadas com as descrições abaixo:
 -  Emergência - será indispensável o atendimento médico imediato e assistência de enfermagem contínua, para pacientes com essa classificação;
 -  Muito Urgente - pacientes com essa classificação precisam de atendimento médico em até 15 minutos e reavaliação pela enfermagem a cada 15 minutos;
 -  Urgente - são pacientes que necessitam de atendimento médico em até 30 minutos e reavaliação pela enfermagem a cada 30 minutos;
 -  Pouco Urgente - são pacientes que necessitam de avaliação médica em até 60 minutos e reavaliação de enfermagem a cada 60 minutos. Por definição são pacientes sem risco iminente de morte;
 -  Não Urgente - pacientes com essa classificação são considerados como caso crônico ou caso social. O atendimento ocorrerá de acordo com o horário de chegada no serviço de saúde referenciado;
 -  Morte - paciente em óbito;
 -  Situação Incompatível - pacientes que possuem condições e sintomas não relacionados ou não relevantes, no protocolo de classificação de risco utilizado pelo hospital. Exemplo: pacientes admitidos para transplante, troca de curativos.

Comportamento "Grupo Pergunta Escore" - Grupo Discriminador Escore

Um protocolo trabalhando com a opção "Grupo Pergunta Escore" atribui uma classificação a um paciente de acordo com a soma dos escores de cada discriminador selecionado.

- Apresentará inicialmente, a janela "Lista de Grupo(s)", contendo uma lista dos grupos cadastrados na tela de "Grupo Discriminador Classificação". Deverá ser selecionado o grupo no qual o paciente se encaixa;
- Essa janela só será exibida se, na tela " [Assoc. Protocolo Empresa](#) ", estiver configurado o "Protocolo Escore";
- Após a escolha do grupo, deve-se selecionar os discriminadores que estão agrupados por "Fluxogramas Sintomas";

- Caso os discriminadores possuam "Aferição/Avaliação" associadas, o nome dela será apresentada na segunda coluna, ao lado do nome do "Fluxograma Sintoma". Para selecionar um discriminador neste caso, será necessário realizar a "Aferição/Avaliação". O usuário seleciona a terceira coluna ao lado do nome da "Aferição/Avaliação". Caso o "Fluxograma Sintoma" não possua discriminadores com "Avaliação/Aferição", será permitido selecionar um discriminador diretamente;
- Vale ressaltar que, é permitida a seleção de um discriminador por "Fluxograma Sintoma". O escore total no quadro "Escore" é atualizado, a medida que os discriminadores forem selecionados. A partir do momento em que um discriminador for selecionado, também será estabelecido o nível do risco do paciente;
- Selecionar uma especialidade médica da mesma forma que os demais comportamentos da tela de "Classificação de Risco";
- Após selecionar a especialidade, o usuário será retornado a tela de "Classificação". Nela, ele deve confirmar o encaminhamento do paciente à especialidade escolhida, acionando o botão  para concluir o processo de classificação do paciente e encaminhar o paciente à especialidade selecionada.

Reclassificação de um paciente

- Ao selecionar um paciente já classificado para que possa ser realizada uma nova classificação, será exibido o fluxograma do sintoma selecionado anteriormente;
- Ao concluir a nova classificação, será exibido um novo "Resumo da Classificação de Risco - Protocolo" com a mudança da especialidade realizada.

Impactos

Na tela abaixo, somente será permitido o "Atendimento Social" de um paciente caso ele tenha sido classificado para tal.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Atendimento Social](#)

Na tela abaixo, é possível visualizar os dados coletados na classificação de risco do paciente.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Resumo Acolhimento](#)

Situação incompatível

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Situação Incompatível

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Dados do Paciente](#)

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Classificação](#)

Movimentações

- [Painel Recepção / Chamada](#)

Função da tela

Atribuir a classificação de risco para pacientes que possuam condições e sintomas não relacionados ou não relevantes, no protocolo de classificação de risco utilizado pelo hospital. Exemplos: pacientes admitidos para transplante, troca de curativos, etc.

Como usar

Atribuir situação incompatível a um paciente

- Para atribuir uma "Situação Incompatível" a um paciente, o campo "Observação" do segmento a "Situação Incompatível" deve ser preenchido e, em seguida, pressionar o botão  ;
- Com os dados salvos, o usuário será direcionado para a "Lista de Pacientes", onde será exibido que o paciente está em "Situação Incompatível" no campo "Prioridade" .

Impactos

A tela abaixo realiza o encaminhamento do paciente para um atendimento externo, quando suas condições e sintomas não estão relacionados aos protocolos de classificação.

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Atendimento Social](#)

Atendimento social

Localizações

[Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Atendimento Social](#)

Pré-requisitos

Configurações

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / Classificação](#)

Movimentações

- [Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Classificação](#)

Função da tela

Permitir que um paciente seja atendido por um Assistente Social ou por um profissional que realize este trabalho, caso ele tenha sido classificado como não urgente, a fim de esclarecer dúvidas do paciente e realizar orientações e se necessário, encaminhar o paciente para atendimento do tipo ambulatorial em outra unidade.

Como usar

Realizar atendimento social

O tipo de classificação do paciente deve estar configurada para realizar um atendimento social, do contrário não será permitido. Essa configuração é realizada na tela de configurações de "[Classificação](#)".

- Na tela "Atendimento Social", serão apresentadas informações referentes ao nível de prioridade do atendimento, especialidade e o usuário responsável por realizar a classificação. Vale ressaltar que esses campos não podem ser editados. Será habilitado apenas o campo "Observação" para que seja informada uma descrição do atendimento ou alguma observação de grande importância;
- O bloco "Encaminhamento Externo" permite encaminhar um paciente a um local externo, basta selecionar o local no campo "Local";
- Para finalizar o processo, é preciso acionar no botão  ;
- Após salvar, serão apresentadas a data e hora do encaminhamento e o nome do paciente é removido da "Lista de Pacientes".

Impactos

Após receber o atendimento social, o nome do paciente é removido da "Lista de Pacientes" do Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Lista de Pacientes](#)

Resumo acolhimento

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Resumo Acolhimento

Pré-requisitos

Configurações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Parâmetro Geral](#)

Movimentações

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Dados do Paciente](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Abordagem Inicial](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)
- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Situação Incompatível](#)

Função da tela

Consultar os dados coletados durante todo o processo de classificação de risco de um paciente, de forma resumida e centralizada. Possibilita ainda, a impressão do relatório e geração do código de barras.

Como usar

A tela "Resumo Acolhimento", é dividida em dois blocos: "Classificação(ões)" e "Histórico de Atendimento(s)".

Classificações dos atendimentos

No bloco "Classificação(ões)", serão apresentadas todas as informações referentes à classificação do paciente, são elas: data e hora de geração da senha para a classificação; dados do usuário que efetuou a classificação; prioridade do atendimento; queixa principal do paciente; observação, caso tenha sido cadastrada; especialidade à qual o paciente será encaminhado; aferição dos sinais vitais; alergias do paciente etc. Essas informações foram coletadas nos segmentos "Abordagem Inicial" e "Classificação" (ou "Situação Incompatível"). Os sinais vitais e as alergias do paciente são exibidos nessa mesma ordem de cadastro quando o relatório de "Resumo da Classificação de Risco - Protocolo" é impresso.

Histórico de atendimentos

O bloco "Histórico de Atendimentos(s)", será apresentado caso o paciente possua mais de uma triagem na mesma unidade. Nele, é apresentada uma tabela contendo uma lista com todas as triagens do paciente na unidade.

- Acionar o botão  para consultar o histórico de atendimento anteriores. Dessa forma, será carregada a lista de histórico de classificações e exclusões das classificações do paciente em referência;
- Caso o atendimento pesquisado não possua triagem associada, será exibida uma mensagem de alerta ao usuário;
- Poderá ainda realizar a impressão do relatório em "PDF", acionando o botão  ;

- Dessa forma, será impresso o relatório "Resumo da Classificação de Risco". Nele, o usuário poderá visualizar informações como:
 - Nome e código, data de nascimento, sexo e idade do paciente;
 - Senha;
 - Convênio utilizado no atendimento;
 - Código do atendimento;
 - Código SAME, caso tenha;
 - Período inicial e final com data e hora da classificação do paciente;
 - Nome, CRM e função do médico;
 - Prioridade do atendimento;
 - Cor destinada à classificação do paciente;
 - Fluxograma do sintoma;
 - Discriminadores utilizados;
 - Especialidade à qual foi direcionado o atendimento;
 - Sinais vitais lidos;
 - Campo para assinatura do médico da classificação;
 - Data e hora da impressão;
 - Número de páginas.
- Caso a triagem possua um código de atendimento associado, poderá imprimir o código de barras e o número do atendimento médico referentes à triagem consultada, basta acionar o botão  ;
- Ao acionar o botão  , a etiqueta de senha do paciente será emitida, contendo as seguintes informações: nome da empresa, setor, número da senha, data e hora da emissão, especialidade, prioridade e o código de barras;
- A impressora que irá imprimir a etiqueta de senha, deverá ser configurada na tela "[Parâmetro Geral](#)".

Impactos

No caminho abaixo poderá ser impresso o relatório de "Resumo da Classificação de Risco" do protocolo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / Resumo Acolhimento /



Auditoria - Tipos

- Ao acionar o botão , será exibida a janela "Tipo de Auditoria" com duas opções:
 - Auditoria Interna. Ao selecionar a opção "Auditoria Interna", será a tela "[Auditoria interna](#)";
 - Auditoria Externa. Ao selecionar a opção "Auditoria Externa", será exibida a tela "[Auditoria externa](#)".

Auditoria interna

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Lista de Pacientes / Auditoria / Auditoria Interna

Pré-requisitos

Configuração

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Auditoria](#)

Função da tela

Permitir ao profissional, cadastrado como auditor, realizar auditorias internas. A auditoria interna, normalmente, é composta por médicos ou enfermeiros designados para auditar os eventos de triagem com utilização do Protocolo de Manchester.

Como usar

A tela "Pesquisa de Auditoria" exibe as seguintes informações:

Filtros para pesquisa

- Auditor: informar o nome de um auditor interno cadastrado;
- Período: informar o período para efetuar pesquisa das triagens realizadas.

Lista de auditoria

- Auditor: nomes dos auditores responsáveis pela auditoria;
 - Data da auditoria: data e hora do início da auditoria;
 - Início auditoria: início do período para recuperação de triagens auditadas;
 - Fim auditoria: final do período para recuperação de triagens auditadas;
 - Auditados: quantidades de triagens auditadas;
 - Conformes: quantidade e percentual de triagens consideradas "em conformidade" na auditoria;
 - Não conformes: quantidade e percentual de triagens consideradas "não conformes" na auditoria;
 - Pendências: alguma pendência informada na auditoria;
 - Visualizar: exibir a tela "Relatório de Auditoria";
 - Editar: exibe a tela "Dados da auditoria";
 - Relatório: exibe o botão do pdf do relatório da auditoria.
- Para realizar uma pesquisa o auditor deve acessar a tela, informar o(s) filtro(s) da pesquisa e acionar a opção de executar a consulta  ;
 - Será apresentada a lista das auditorias internas, considerando os filtros de pesquisa informados.

Cadastrar auditoria

- Ao acionar o botão  , será exibida a tela "Cadastro de Auditoria", com as seguintes opções para o cadastramento:
 - Data inicial e final: período para seleção das triagens que serão auditadas. Esse período deve ser entre 07 e 31 dias;
 - Selecionar auditores: selecionar auditores cadastrados para realizar a auditoria. A equipe de auditoria deve ter pelo menos um médico e um enfermeiro.
- Acionar o botão  , para salvar as informações ou  para salvar e continuar. Dessa forma, serão salvas as informações da auditoria e recuperadas as triagens de acordo com o período informado;
- Caso haja informações para a auditoria realizada, será gerado um arquivo em pdf. O botão  é exibido na coluna "Relatório" na tela "Dados da Auditoria".

Composição da equipe de auditoria interna

Para a composição da equipe de auditores de uma auditoria interna, deverá ser considerado:

- Podem fazer parte da equipe de auditores de auditoria interna apenas usuários com perfil de "Auditor Interno";
- Uma equipe de auditoria interna deve ser composta por, no mínimo, um médico e um enfermeiro.

Consultar o resumo da triagem

- Após cadastrar uma auditoria será gerado um resumo em PDF. Acionar o botão  para consultar o resumo na tela de "Dados da Auditoria";
- Serão apresentadas as informações do resumo da triagem com os seguintes dados:
 - Nome da instituição;
 - Data e hora corrente.
- Dados do paciente:
 - Nome do paciente;
 - Data de nascimento;
 - Sexo;
 - Idade;
 - Senha do atendimento;
 - Nome do convênio;
 - Atendimento.
- Dados da classificação:
 - Data e hora da classificação;
 - Nome do triador;
 - Prioridade;
 - Cor;
 - Queixa principal do paciente;
 - Alergia;
 - Observação;
 - Fluxograma sintoma;
 - Discriminador(es);
 - Especialidade;
 - Sinais vitais lidos.

Editar auditoria

- Para editar a auditoria deve-se acionar o botão  da tela "Pesquisa de Auditoria" ou no botão  da tela "Cadastro de Auditoria", caso deseje editar a auditoria que está sendo cadastrada;
- Caso não exista triagem para o período informado será exibida a seguinte mensagem: "Não existem triagens para o período informado";
- Verificará que o auditor interno ainda não realizou a auditoria, e que não foi realizada auditoria simultânea;
- É apresentada a lista com as triagens recuperadas para auditoria, sem exibir as informações inseridas pelos outros auditores da equipe;
- A tela apresenta as seguintes informações:
 - Nome do auditor interno logado;
 - Data inicial e final da auditoria.
- Lista com as triagens recuperadas, para serem auditadas:
 - Nome do triador;
 - Senha do atendimento;
 - Data de origem;
 - Nome do paciente;
 - Parecer do auditor: indicativo de "Conforme" e "Não conforme" para serem informados. Ao selecionar o checkbox "Conforme", será exibida uma janela para que o auditor informe alguma observação para a conformidade;
 - Motivo da não conformidade: para ser preenchido quando o parecer do auditor for "Não conforme".
- O auditor verifica se a triagem está em conformidade segundo o protocolo de Manchester;
- Selecionar a opção "Auditoria realizada simultaneamente por todos os auditores e será encerrada!";
- Selecionar a opção de salvar, clicando no botão . Porém, será necessário auditar todas as triagens. As informações serão salvas, registrando o parecer do auditor nas triagens auditadas.

Registrar triagem "Não conforme"

- Para registrar uma triagem "Não conforme" o auditor verifica que a triagem não está em conformidade e informa o parecer "não conforme";

- É exibida uma janela para que o auditor informe o motivo da não conformidade;
- Informar o motivo da não conformidade e clicar no botão  ;
- As informações da não conformidade serão salvas.

Triagens para Auditoria

Deverá recuperar, de forma aleatória, os eventos de triagem que serão auditados no processo de auditoria interna, considerando as regras:

- Deverá determinar uma semana (7 dias) dentro do período informado para a auditoria. As triagens a serem recuperadas são as que ocorreram neste período;
- Devem ser consideradas apenas as triagens que foram realizadas utilizando o protocolo de Manchester;
- Devem ser selecionadas 5 triagens para cada classificador (caso o classificador tenha realizado menos que 5 triagens na semana, devem ser recuperadas todas as suas triagens);
- Devem ser selecionadas as triagens que tiveram, no mínimo, a classificação de risco finalizada;
- Não podem ser selecionadas triagens cujo classificador responsável seja um dos membros da equipe da auditoria;
- Não podem ser selecionadas triagens que já tenham sido auditadas em outra auditoria interna.

Gerar relatório de auditoria

- Ao acionar o botão  será apresentada a tela "Relatório de Auditoria" com as seguintes informações:
 - Data e hora da realização da auditoria: data e hora do cadastramento da auditoria;
 - Período de realização: data de início e final do período informados para recuperação das triagens;
 - Auditores: nome de todos os auditores que integram a equipe;
 - Doentes admitidos: quantidade de pacientes que deram entrada na unidade de emergência no mês da auditoria.

Episódios classificados

Informações das triagens realizadas no mês da auditoria, divididas pela cor da prioridade:

- - Prioridade clínica (cor);
 - Quantidade: quantidade de triagens com a prioridade;
 - Porcentagem: percentual de triagens com a prioridade.

Episódios classificados auditados

- - Auditados: quantidade de triagens auditadas;
 - Auditados (%): quantidade de percentual de triagens auditadas em relação ao total de triagens classificadas.

Prioridades atribuídas

Informações das triagens auditadas;

- - Prioridade clínica (cor);
 - Quantidade: quantidade de triagens com a prioridade;
 - Porcentagem: percentual de triagens com a prioridade.

Média tempo

- - Média de tempo entre a admissão (entrada na instituição) e a classificação, considerando as triagens realizadas no mês da auditoria;
 - Tempo médio de classificação, considerando as triagens realizadas no mês da auditoria.

Tempo médio entre a classificação e a primeira avaliação médica por prioridade (cor)

Informações dos tempos médios por prioridade, considerando o tempo que o paciente é classificado até o momento do primeiro atendimento médico, em todas as triagens realizadas no mês da auditoria.

- - Prioridade clínica (cor);
 - Média de tempo.

Número de classificadores no período

- - Médicos: quantidade de médicos que efetuaram triagens no mês da auditoria;
 - Enfermeiros: quantidade de enfermeiros que efetuaram triagens no mês da auditoria;
 - Nutricionistas: quantidade de nutricionistas que efetuaram triagens no mês da auditoria;
 - Fisioterapeutas: quantidade de fisioterapeutas que efetuaram triagens no mês da auditoria;
 - Outros: quantidades de outros profissionais que efetuaram triagens no mês da auditoria.

Classificações corretas e incorretas

Informações sobre as triagens auditadas, por classificador.

- Classificador: nome do responsável pela triagem;
- Total de classificações: quantidade de triagens realizadas pelo classificador;
- Classificações corretas: quantidade e percentual de triagens do classificador consideradas como corretas (conformes) na auditoria;
- Classificações incorretas: quantidade e percentual de triagens do classificador consideradas como incorretas (não conformes) na auditoria.
- E os campos obrigatórios para preenchimento:
 - Problemas encontrados;
 - Sugestões de medidas corretivas;
 - Conclusões.
- O auditor preenche os campos e seleciona a opção de salvar a auditoria  ;
- Selecionar a opção de finalizar a auditoria  ;
- Após concluir o processo acima, será exibida a tela "Pesquisa de Auditoria".

Condições para gerar relatório da auditoria

Para que o relatório da auditoria interna possa ser gerado, devem ser atendidas as condições:

- Todos os auditores da equipe designada para a auditoria devem ter finalizado as auditorias individualmente;
- Não devem existir divergências entre os pareceres dos auditores, ou seja, um evento não pode ser considerado como "conforme" por um auditor e "não conforme" por outro auditor.

Realizar conciliação da auditoria

- Na tela "Conciliação da Auditoria", é apresentada as informações das triagens auditadas, para cada um dos auditores da equipe:
 - Nome do auditor;
 - Data inicial e final da auditoria.

- Lista das triagens auditadas:
 - Nome do triador;
 - Senha de atendimento;
 - Data da triagem;
 - Nome do paciente;
 - Parecer do auditor - indicativo de "Conforme" e "Não conforme", preenchidos conforme informado pelo auditor;
 - Motivo da não conformidade - preenchido conforme informado pelo auditor.
- Apresentará a lista com as triagens recuperadas para a consolidação da auditoria:
 - Data inicial e final da auditoria.
- Lista das triagens da auditoria:
 - Nome do triador;
 - Senha de atendimento;
 - Data da triagem;
 - Nome do paciente;
 - Parecer do auditor - indicativo de "Conforme" e "Não conforme" para serem informados;
 - Motivo da não conformidade.
- O auditor informa o parecer para cada uma das triagens da lista, de acordo com o consenso entre os membros da equipe de auditores, informando também o motivo da não conformidade, quando for o caso;
- Seleciona a opção de concluir a conciliação e prossegue para a próxima etapa da auditoria;
- Acionar o botão  para salvar os dados informados, finalizando assim, a conciliação da auditoria.

Conciliação da auditoria

Quando existirem divergências entre o parecer dos auditores para as triagens auditadas (um mesmo evento de triagem foi considerado "conforme" por um auditor e "não conforme" por outro), será necessário realizar uma conciliação das auditorias individuais. Nesta conciliação deverão ser emitidos o parecer ("conforme" ou "não conforme" e motivo da não conformidade, quando for o caso), para cada um dos eventos de triagem da auditoria, e este parecer deve ser um consenso entre todos os membros da equipe. Os pareceres de cada um dos auditores não devem ser alterados na conciliação, permanecendo armazenados como histórico de modo que fiquem disponíveis para consultas futuras.

Impactos

Para visualizar o "Relatório de Auditoria" gerado pela auditor interno, o usuário deverá acessar o caminho abaixo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Lista de Pacientes /  / Auditoria Interna / Pesquisar Auditoria / 

Auditoria externa

Localizações

Acolhimento com Classificação de Risco / Lista de Pacientes / Auditoria / Auditoria Externa

Pré-requisitos

Configuração

- Acolhimento com Classificação de Risco / Configurações / Configuração / [Auditoria](#)

Função da tela

Permitir ao profissional, cadastrado como auditor, realizar auditorias externas. A auditoria externa é realizada pelos membros ou colaboradores do "Grupo Brasileiro de Classificação de Risco", designados para auditar os processos de triagem com utilização do Protocolo Manchester.

Como usar

A tela "Pesquisa de Auditoria" exibe as seguintes informações:

Filtros para pesquisa

- Auditor: informar o nome de um auditor interno cadastrado;
- Período: informar o período para efetuar pesquisa das triagens realizadas.

Lista de auditoria

- Auditor: nomes dos auditores responsáveis pela auditoria;
 - Data da auditoria: data e hora do cadastramento da auditoria;
 - Início auditoria: início do período para recuperação de triagens e auditorias internas;
 - Fim auditoria: fim do período para recuperação de triagens e auditorias internas;
 - Visualizar: exibir a tela "Relatório de Auditoria";
 - Editar: exibe a tela "Dados da auditoria";
 - Relatório: exibe o botão do PDF do relatório da auditoria.
- Para realizar uma pesquisa o auditor deve acessar a tela, informar o(s) filtro(s) da pesquisa e acionar a opção para executar a consulta  ;
 - O sistema apresenta a lista das auditorias externas, considerando os filtros de pesquisa informados.

Cadastrar auditoria

- Ao acionar o botão  , será exibida a tela "Cadastro de Auditoria" com as seguintes opções para o cadastramento:
 - Data inicial: data inicial do período para seleção das triagens e auditorias internas;
 - Data final: data final do período para seleção dos triagens e auditorias internas;
 - Selecionar auditores: selecionar auditores cadastrados para realizar a auditoria. A equipe deverá ser composta de pelo menos quatro (04) auditores.
- Acionar o botão  para salvar as informações ou  para salvar e continuar. Dessa forma, serão salvas as informações da auditoria e recuperadas as triagens de acordo com o período informado;
- Caso haja informações para a auditoria realizada, será gerado um arquivo em PDF. O botão  é exibido na coluna "Relatório" na tela "Dados da Auditoria".

Composição da equipe de auditoria externa

- A equipe de auditores, para a auditoria externa, deve ser composta por no mínimo quatro (04) auditores, entre médicos e enfermeiros. A composição da equipe é de responsabilidade do "Grupo Brasileiro de Classificação de Risco", não havendo qualquer validação por parte do sistema em relação aos seus perfis ou ocupação;
- Os auditores deverão estar cadastrados como "Auditor Externo";

- Não é obrigatório que todos os auditores externos realizem a auditoria, bastando que apenas um dos membros da equipe acesse o sistema para realizar a auditoria;
- Nos relatórios e consultas da auditoria externa, deverão ser exibidos os nomes de todos os auditores da equipe, ainda que não tenham acessado o sistema para realizar a auditoria.

Resumo da triagem

- Após cadastrar uma auditoria será gerado um resumo em PDF. Para consultar esse resumo deve-se acionar o botão  na tela de "Dados da Auditoria";
- Apresentará as informações do resumo da triagem com os seguintes dados:
 - Nome da instituição;
 - Data e hora corrente.
- Dados do paciente:
 - Nome do paciente;
 - Data de nascimento;
 - Sexo;
 - Idade;
 - Senha do atendimento;
 - Nome do convênio;
 - Atendimento.
- Dados da classificação:
 - Data e hora da classificação;
 - Nome do triador;
 - Prioridade;
 - Cor;
 - Queixa principal do paciente;
 - Alergia;
 - Observação;
 - Fluxograma sintoma;
 - Discriminador(es);
 - Especialidade;
 - Sinais vitais lidos.

Editar auditoria

- Para editar a auditoria deve-se acionar o botão  da tela "Pesquisa de Auditoria" ou o botão  da tela "Cadastro de Auditoria";
- Caso não exista triagem para o período informado será exibida a seguinte mensagem: "Não existem triagens para o período informado";
- Verificará que o auditor interno ainda não realizou a auditoria, e que não foi realizada auditorias simultâneas;
- É apresentada a lista com as triagens recuperadas para auditoria, sem exibir as informações inseridas pelo(s) outro(s) auditor(es) da equipe;
- A tela apresenta as seguintes informações:
 - Nome do auditor externo logado;
 - Data inicial e final da auditoria.
- Lista com auditorias internas realizadas no período, com as informações:
 - Auditores;
 - Data auditoria: data e hora de cadastramento da auditoria;
 - Início da auditoria;
 - Fim da auditoria;
 - Auditados: quantidade de triagens da auditoria;
 - Conformes: quantidade e percentual de eventos conformes na auditoria;
 - Não conformes: quantidade e percentual de eventos não conformes na auditoria;
 - Parecer do auditor: indicativos de "Auditoria em conformidade" e "Auditoria em não conformidade" a serem informados pelo auditor externo.
- O auditor informa o parecer para a(s) auditoria(s) selecionada(s);
- Seleciona a opção para salvar . Porém, será necessário auditar todas as triagens. As informações serão salvas, registrando o parecer do auditor nas triagens auditadas;
- O usuário seleciona a opção de prosseguir para a próxima etapa da auditoria (auditoria dos eventos de triagem);
- O sistema apresenta as informações para a auditoria das triagens:
 - Nome do auditor logado;
 - Data inicial e final da auditoria.

- Lista das triagens da auditoria:
 - Nome do triador;
 - Senha de atendimento;
 - Data da triagem;
 - Nome do paciente;
 - Parecer do auditor - indicativo de "Conforme" e "Não conforme" para serem informados;
 - Motivo da não conformidade.
- O auditor deve verificar se a triagem está em conformidade com o protocolo de Manchester;
- Marcar o checkbox do campo "Conforme", caso tenha sido verificado, na triagem, que está tudo conforme. Do contrário, selecionar a opção "Não Conforme";
- Caso tenha sido marcado o checkbox do campo "Não Conforme", é necessário descrever um motivo para isso no campo "Motivo da Não Conformidade";
- Selecionar a opção da triagem e clicar no botão  para salvar as informações, registrando o parecer do auditor nas triagens auditadas;
- Dessa forma, serão apresentas as informações para geração do relatório da auditoria.

Escopo da auditoria externa

Na auditoria externa, deverão ser disponibilizados ao auditor externo:

- Auditorias internas: a equipe de auditoria externa deverá auditar, obrigatoriamente, todas as auditorias internas realizadas no período informado. Devem ser recuperadas todas as auditorias internas realizadas no período informado para que o auditor escolha quais irá auditar, e que ainda não tenham sido auditadas por nenhum auditor externo da equipe;

- Eventos de triagem: o auditor externo poderá auditar eventos de triagem que ocorreram no período informado e que serão selecionados pelo sistema de acordo com as regras:
 - Devem ser recuperadas, aleatoriamente, triagens realizadas no período informado para a auditoria externa, considerando apenas as triagens realizadas utilizando o protocolo de Manchester e que tiveram, no mínimo, a classificação de risco finalizada;
 - Devem ser recuperadas 5 triagens para cada classificador (caso o classificador tenha realizado menos que 5 triagens no período, devem ser recuperadas todas as suas triagens);
 - As triagens recuperadas não podem ter sido auditadas em nenhuma auditoria interna.

Registrar triagem "Não conforme"

- Para registrar uma triagem "Não conforme", o auditor verifica que a triagem não está em conformidade e informa o parecer "Não Conforme";
- É exibida uma janela para que o auditor informe o motivo da não conformidade;
- O usuário informa o motivo da não conformidade e confirmar clicando no botão  ;
- O motivo da não conformidade é registrada.

Gerar relatório de auditoria

- Após salvar o processo acima, deve-se acionar o botão  na tela de pesquisa de auditoria;
- O sistema apresenta a tela "Relatório de Auditoria" com as seguintes informações:
 - Data da realização;
 - Período de realização: data de início e final do período informados para recuperação das triagens e auditorias internas;
 - Auditores: nome dos auditores externos da equipe.

Classificações corretas e incorretas

- - Classificador;
 - Total de classificações;
 - Classificações corretas - quantidade e percentual de triagens do classificador consideradas como corretas (conformes) na auditoria externa.

Classificações corretas e incorretas

- - Total de auditorias internas avaliadas;
 - Auditorias conformes: quantidade e percentual;
 - Auditorias não conformes: quantidade e percentual.

Apresenta os campos obrigatórios para preenchimento:

- - Constatações;
 - Questões;
 - Sugestões de medidas corretivas;
 - Conclusões.
- O auditor preenche os campos e clica no botão  para salvar a auditoria externa. Dessa forma, os dados do relatório serão salvos;
- Clicar no botão  para finalizar a auditoria externa;
- Para imprimir o relatório de auditoria, deve-se acionar o botão  na tela "Dados da auditoria".

Itens de auditoria disponibilizados para auditoria externa

- Para cada auditoria interna selecionada, serão recuperados, de forma aleatória, 2 eventos por classificador para que sejam analisados por um auditor externo;
- Para as auditorias internas que tenham conciliação, as informações da conciliação também devem ser disponibilizadas para análise do auditor externo, desde que os eventos aleatórios tenham sido conciliados (os eventos recuperados aleatoriamente tinham parecer divergente entre os auditores internos e foram alterados conciliação).

Impactos

O relatório de "Auditoria Externa" gerado pelo auditor externo poderá ser visualizado pelo caminho abaixo.

- Acolhimento com Classificação de Risco / Lista de Pacientes /  / Auditoria Externa / Pesquisa de Auditoria / 