



**Gerenciador de Impressões
Web.**

**Configuração das
impressoras e configuração
do GIW.**

- **Introdução**


Este documento compreende o processo de configuração das impressoras de rede, locais ou térmicas no servidor de impressões e habilitação das mesmas para utilização no gerenciador de impressões Web. Como dependendo do tipo de impressora a instalação é realizada de forma diferente, será demonstrado os cenários distintos para cada tipo.

- **Requisitos necessários**

Para configuração das impressoras, é necessário que os serviços do GIW (aplicação e agente de impressões) estejam instalados e configurados no servidor de impressões disponibilizado pelo hospital. Também é necessário que todas as impressoras e máquinas que tem impressoras locais instaladas estejam no mesmo domínio do servidor de impressão.

- **Instalação de Impressoras Térmicas ou Locais:**


1. Acessar o **painel de controle > dispositivos impressoras**, no servidor de impressões;

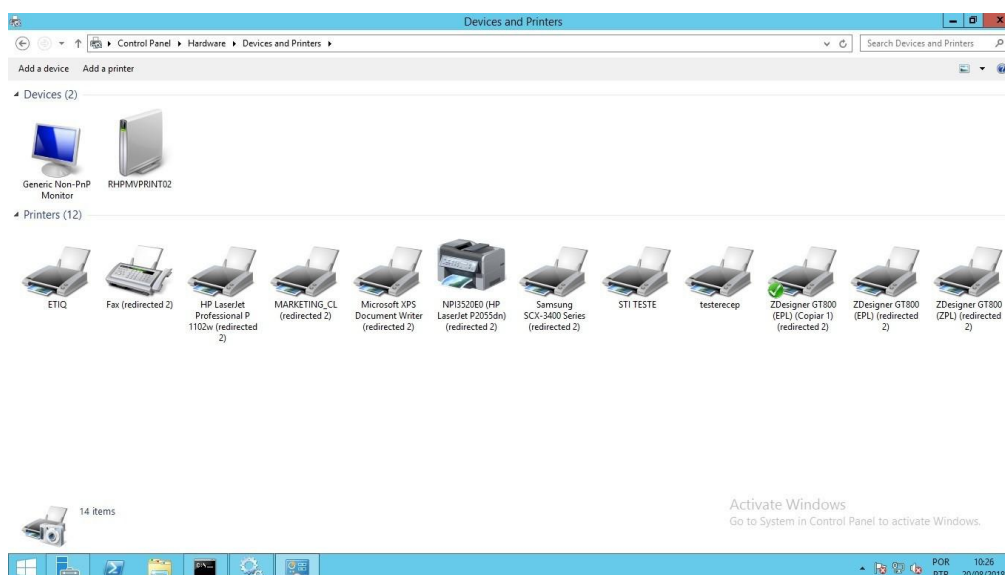


2. Clicar no botão “Adicionar uma Impressora” ou “Add a Printer”;




3. Clicar no botão “A impressora que eu quero não está na lista” ou “The printer that I want isn’t listed”;

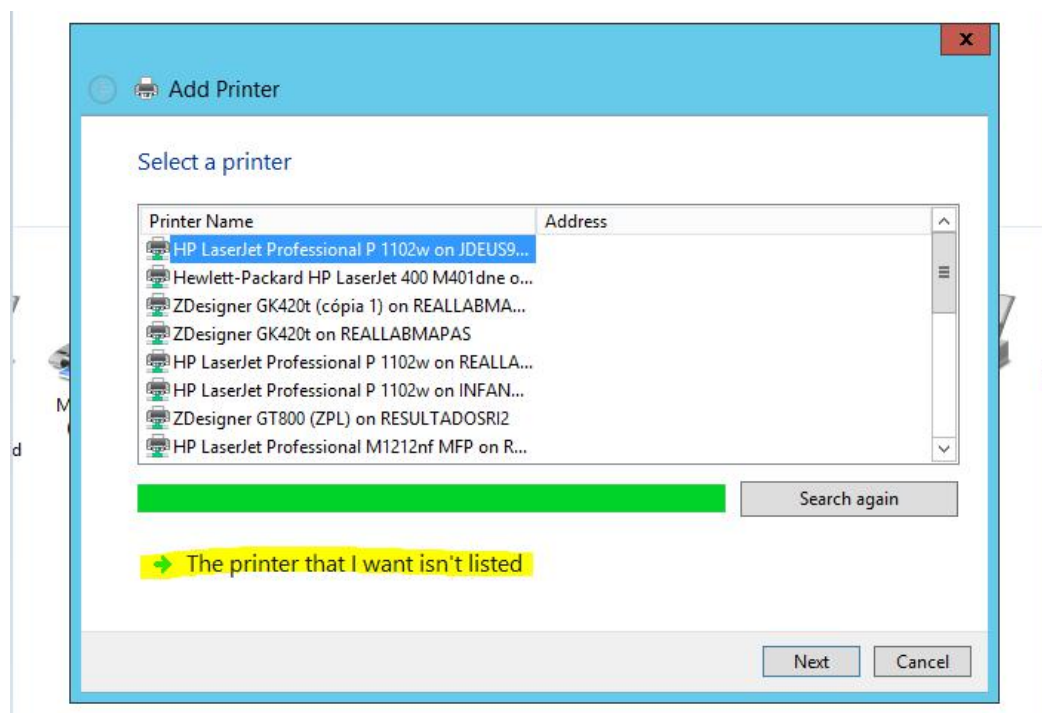


4. Caso você não esteja logado como um usuário administrador do servidor, será necessário clicar no botão “Add a local or network printer as an administrator” e depois clicar novamente na opção informada no passo 3. Caso seja administrador ignorar o passo 4 e seguir para o passo 5;

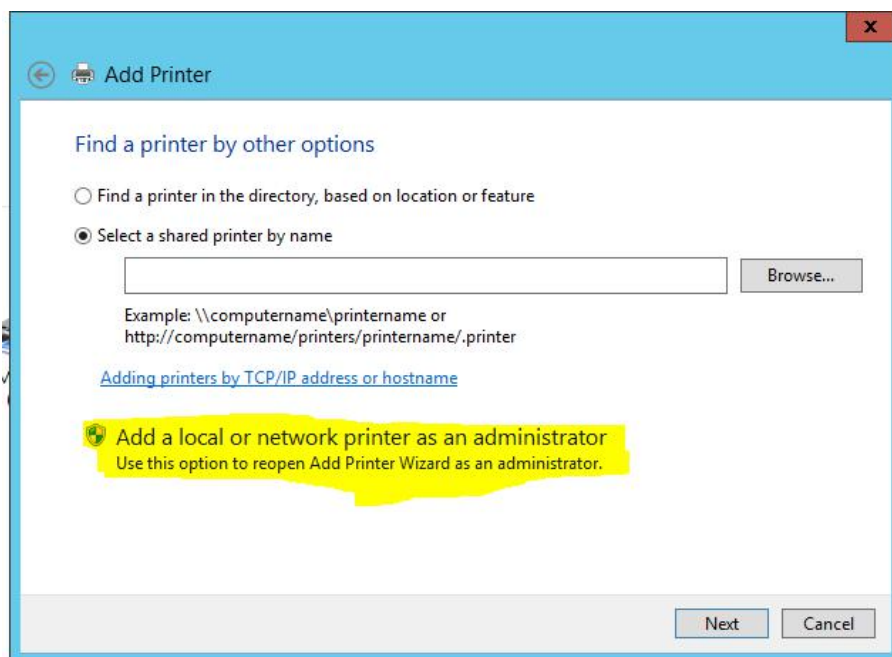


5. Clicar no botão “Adicionar uma impressora local ou de rede usando configurações manuais” ou “Add a local printer or network printer with manual settings”;

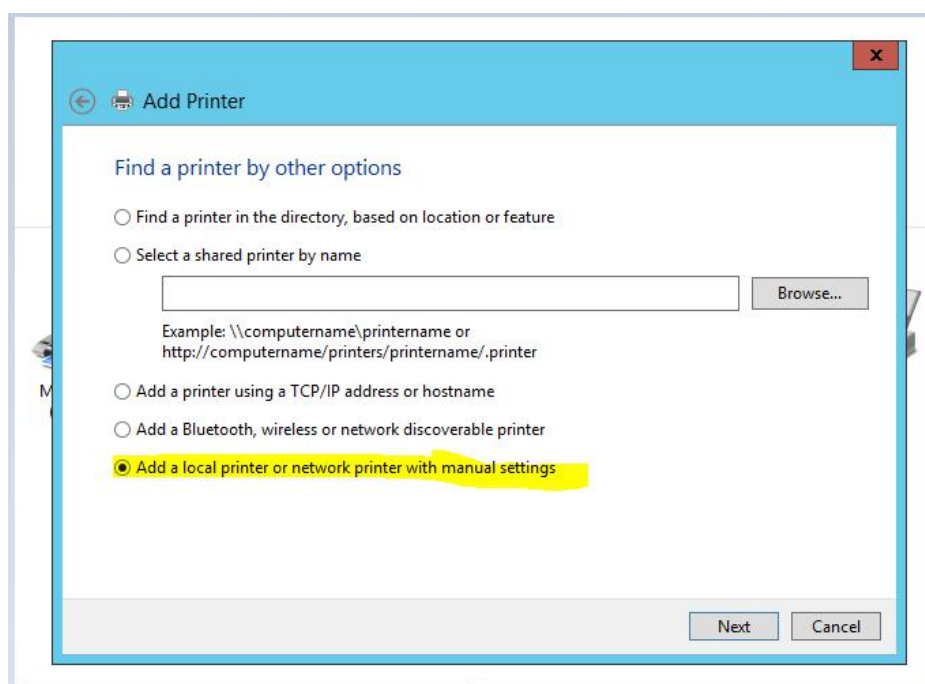


6. Clicar no botão “Criar nova porta” ou “Create a new port”, selecionando a opção “Local Port”;

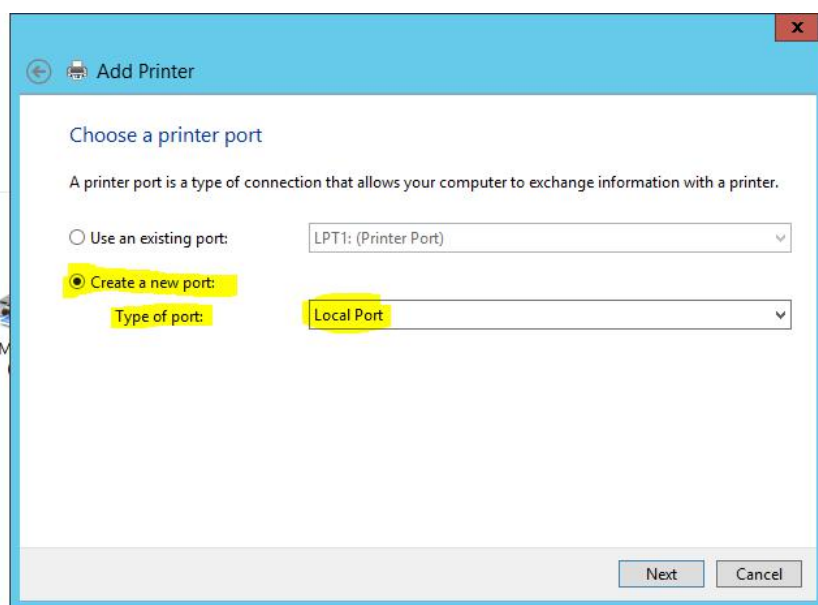


7. Preencher o nome da porta com as seguintes informações: \\<nome da máquina que está instalada a impressora>\<nome do compartilhamento>;

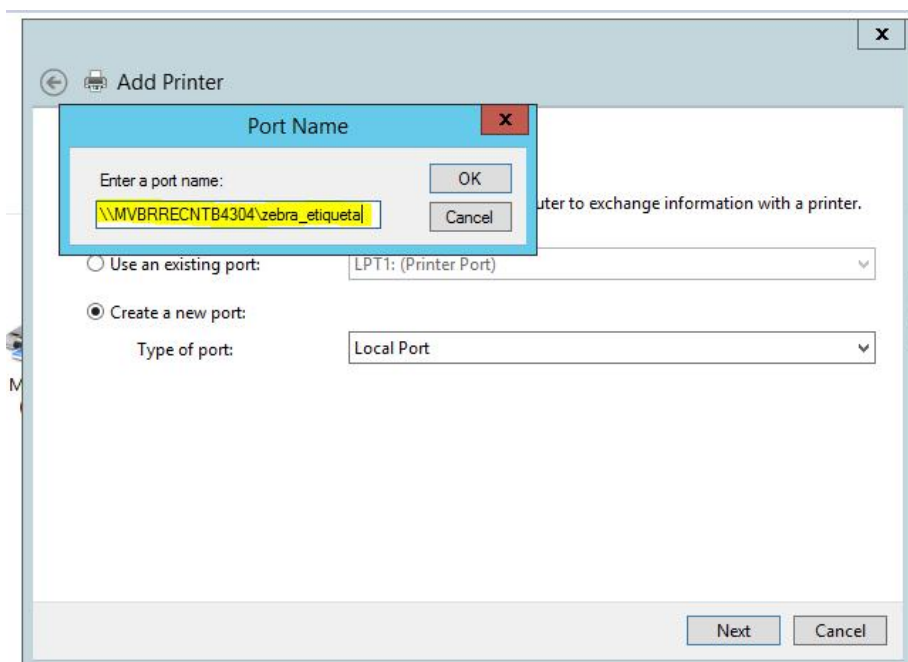



8. Escolher o driver referente a impressora térmica utilizada. Certificar-se que será escolhido o driver correto para o modelo da impressora configurada;

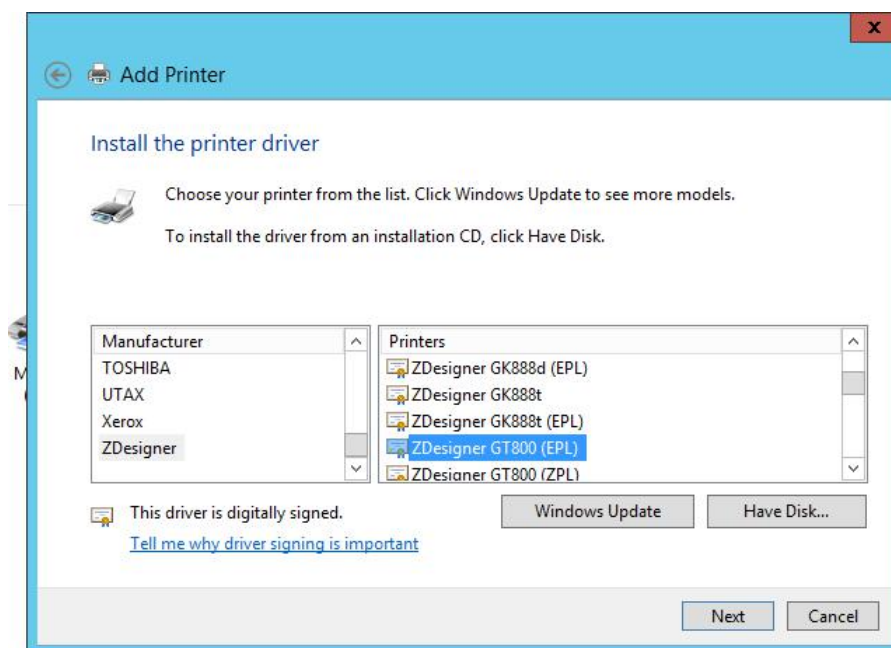

9. Caso não tenha sido instalado nenhum driver para a impressora em questão, aguardar a instalação e avançar até chegar na tela de escolha do nome da impressora. Caso já tenha sido instalada uma impressora com o mesmo driver, só apertar no botão avançar ou “next” até chegar na tela de escolha do nome da impressora. É indicado que o nome da impressora não contenha espaços e que seja um nome que identifique de qual setor a mesma faz parte, já que todas as impressoras serão instaladas no mesmo servidor;

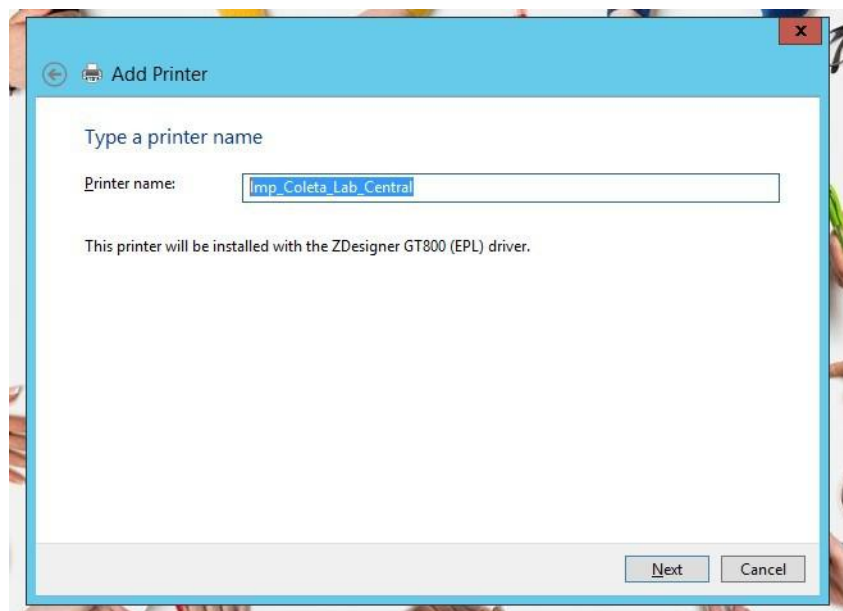


10. Marcar a opção “Não compartilhar essa impressora” ou “Do not share this printer” e avançar até finalizar.

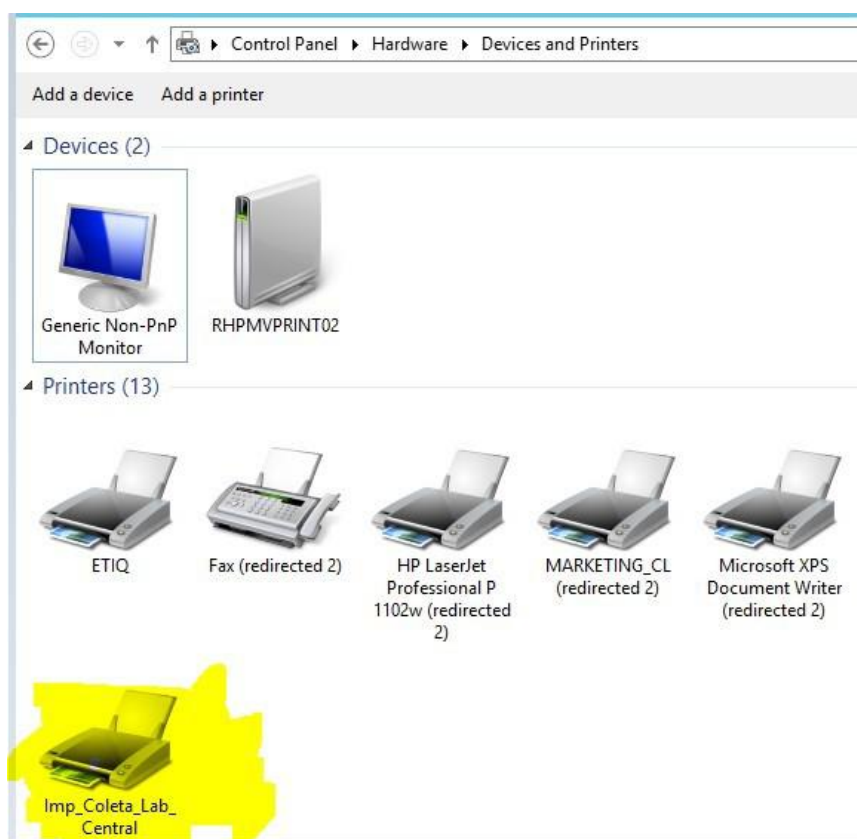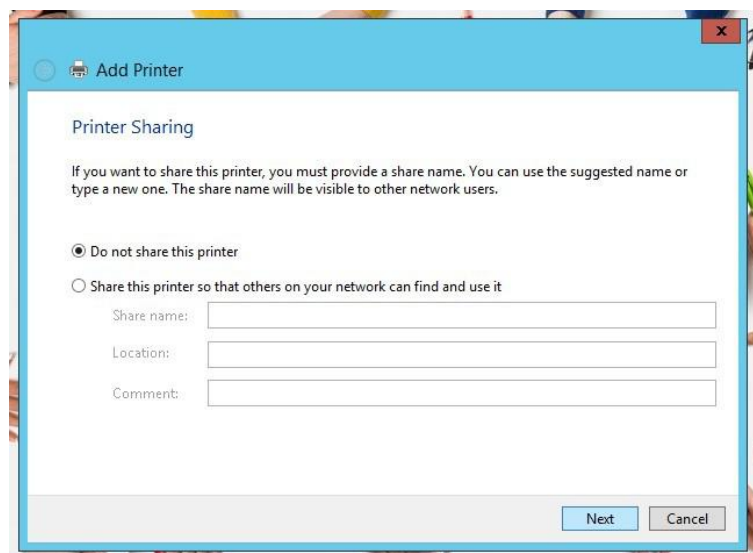


- **Instalação de Impressoras de Rede**


1. Acessar o painel de controle > dispositivos impressoras, no servidor de impressões;

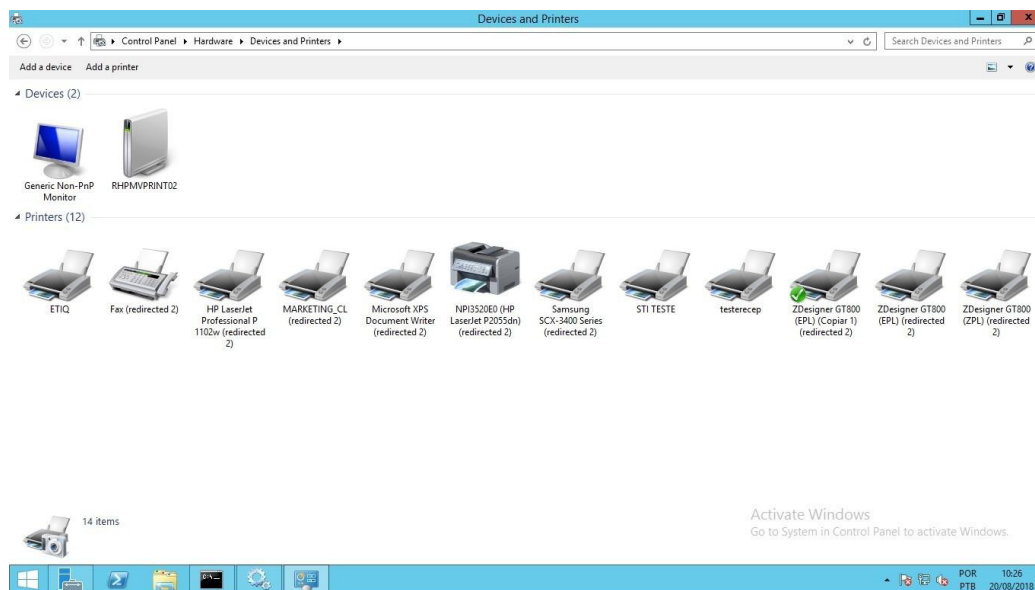


2. Clicar no botão “Adicionar uma Impressora” ou “Add a Printer”;

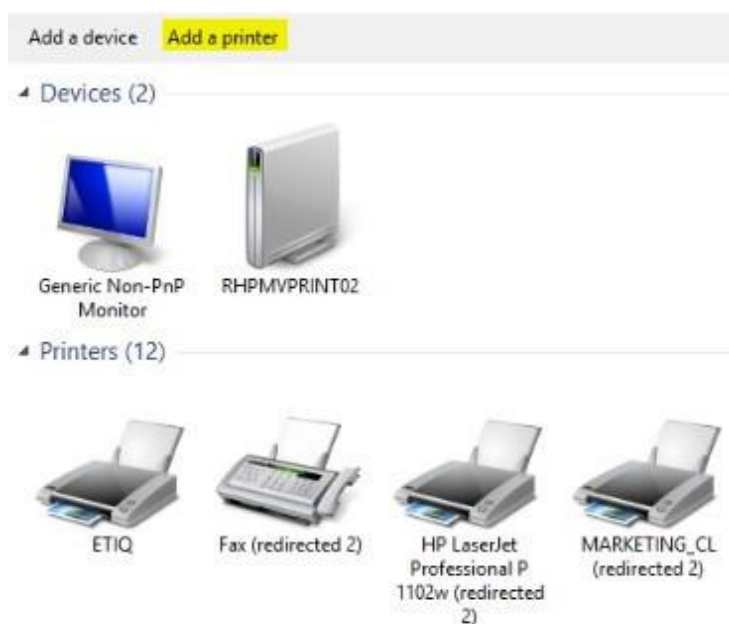


3. Clicar no botão “A impressora que eu quero não está na lista” ou “The printer that I want isn’t listed”;

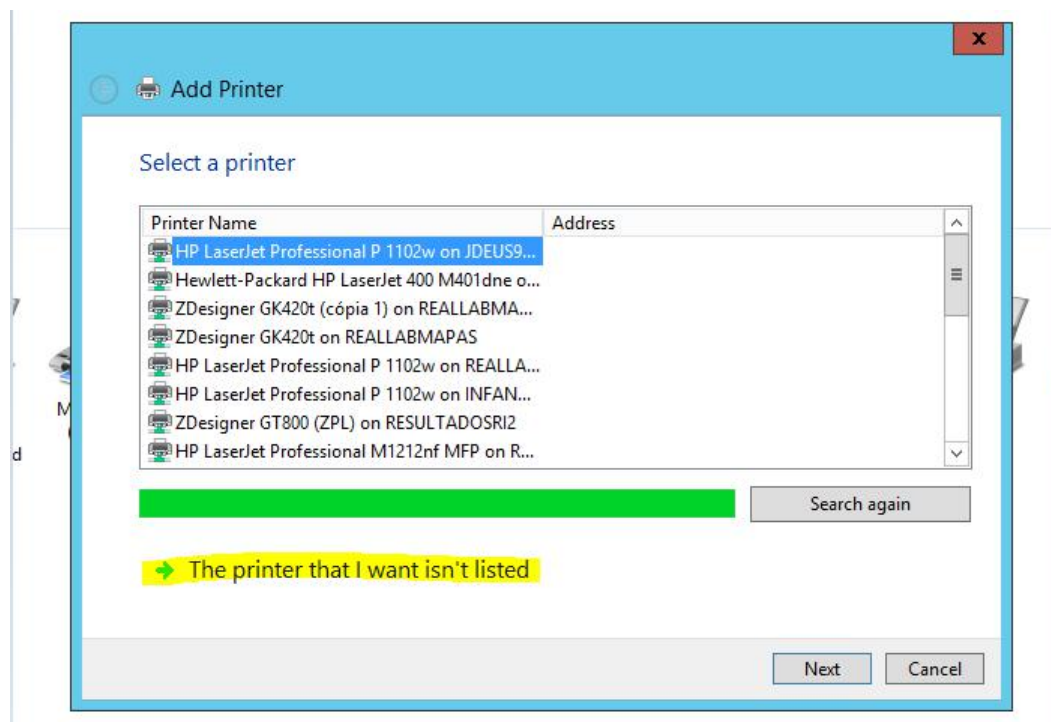


4. Caso você não esteja logado como um usuário administrador do servidor, será necessário clicar no botão “Add a local or network printer as an administrator” e depois clicar novamente na opção informada no passo 3. Caso seja administrador ignorar o passo 4 e seguir para o passo 5;

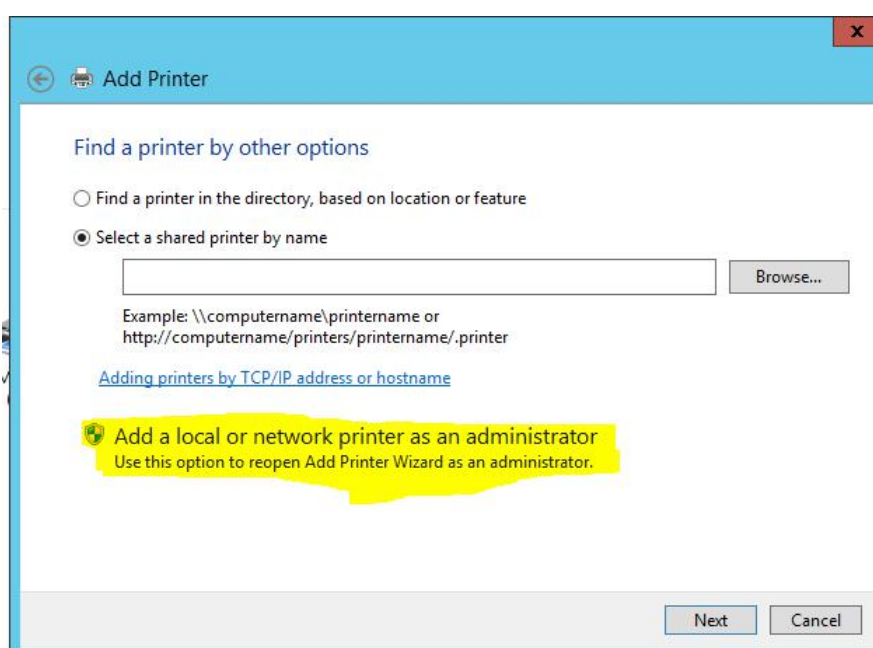


5. Clicar no botão “A impressora que eu quero não está na lista” ou “The printer that I want isn’t listed”;

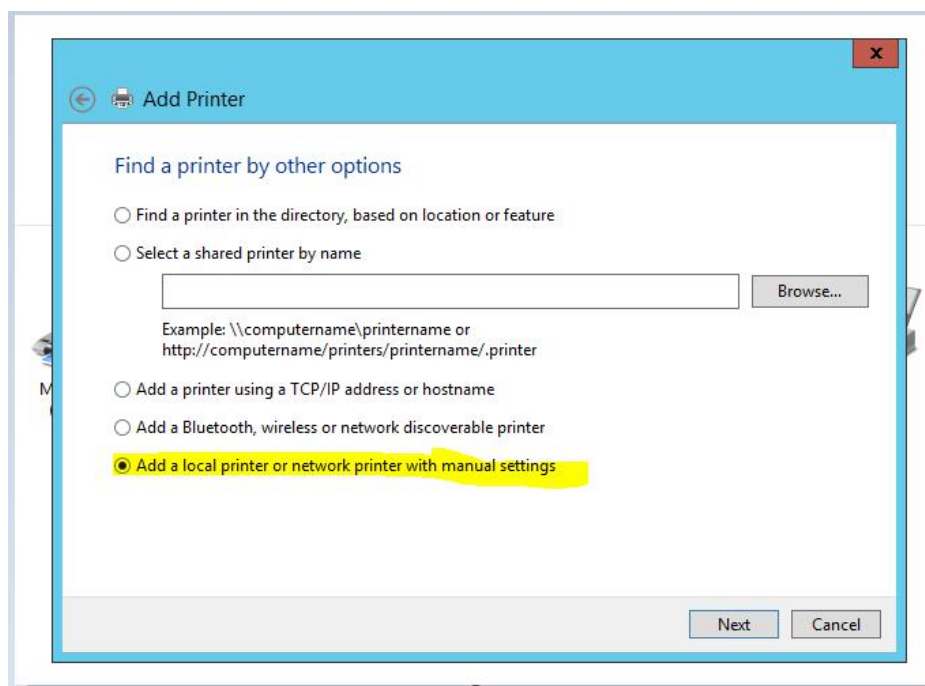

6. Clicar no botão “Criar nova porta” ou “Create a new port”, selecionando a opção “Standard TCP/IP Port”;

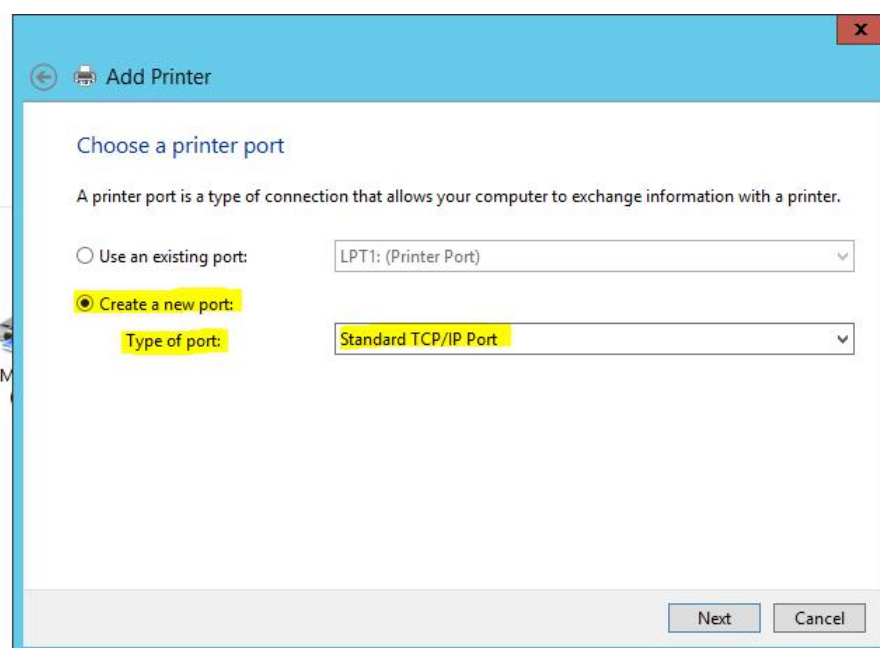


7. No campo “Host name or IP Adress” informar o IP da impressora na rede, conforme demonstrado. O campo “Port” será preenchido automaticamente;

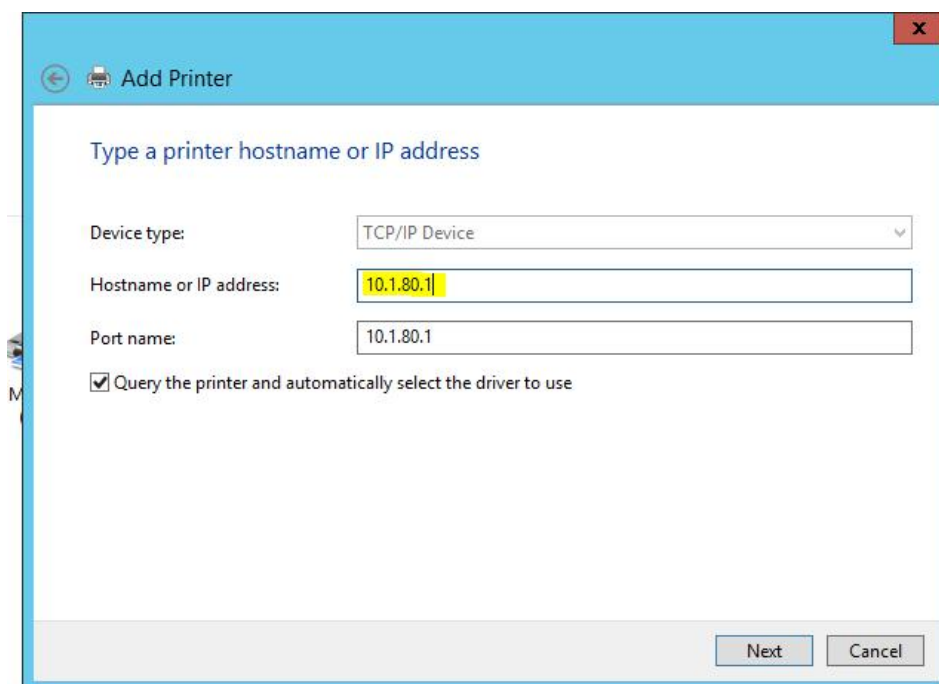



The screenshot shows the 'Add Printer' window with the title 'Add Printer'. The main instruction is 'Type a printer hostname or IP address'. The 'Device type' dropdown is set to 'TCP/IP Device'. The 'Hostname or IP address' field contains '10.1.80.1'. The 'Port name' field contains '10.1.80.1'. The checkbox 'Query the printer and automatically select the driver to use' is checked. At the bottom right are 'Next' and 'Cancel' buttons.

8. Apertar no botão avançar ou “next” até chegar na tela de escolha do nome da impressora. É indicado que o nome da impressora não contenha espaços e que seja um nome que identifique de qual setor a mesma faz parte, já que todas as impressoras serão instaladas no mesmo servidor;

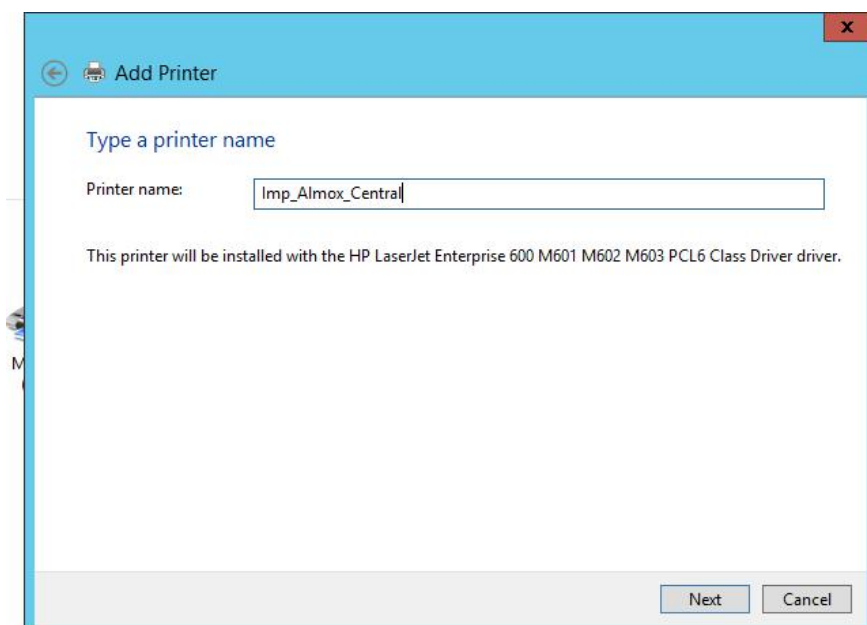


The screenshot shows the 'Add Printer' window at the next step, 'Type a printer name'. The 'Printer name' field contains 'Imp_AlmoX_Central'. Below the field, it says 'This printer will be installed with the HP LaserJet Enterprise 600 M601 M602 M603 PCL6 Class Driver driver.' At the bottom right are 'Next' and 'Cancel' buttons.

9. Marcar a opção “Não compartilhar essa impressora” ou “Do not share this printer” e avançar até finalizar.

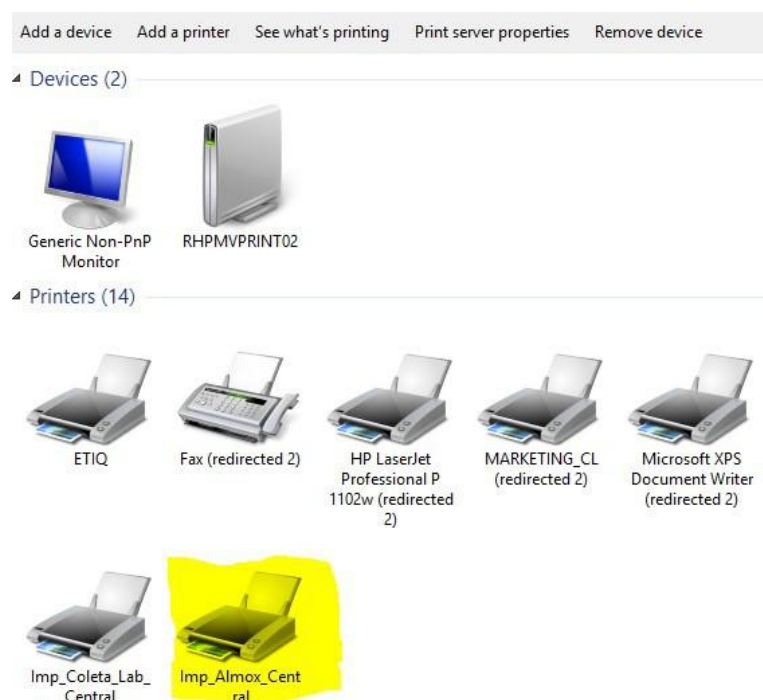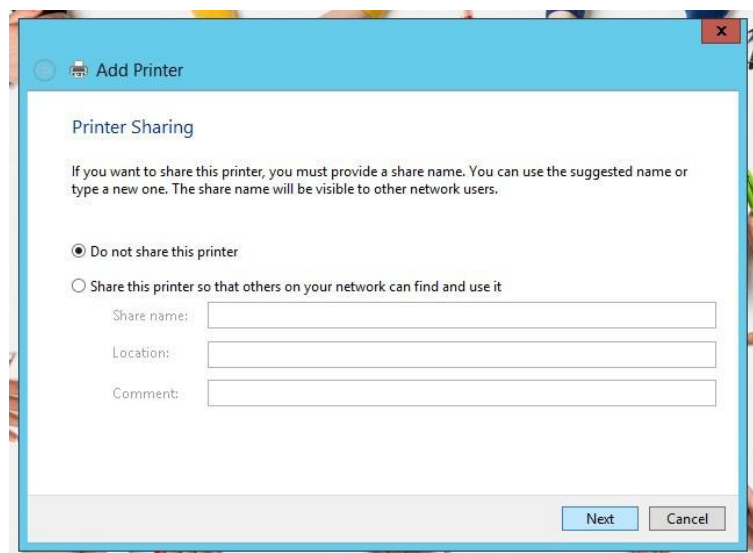


- Testar comunicação entre o agente de impressões e as impressoras configuradas.

1. Certificar-se que os dois serviços por ambiente estão no ar, no servidor de impressões;

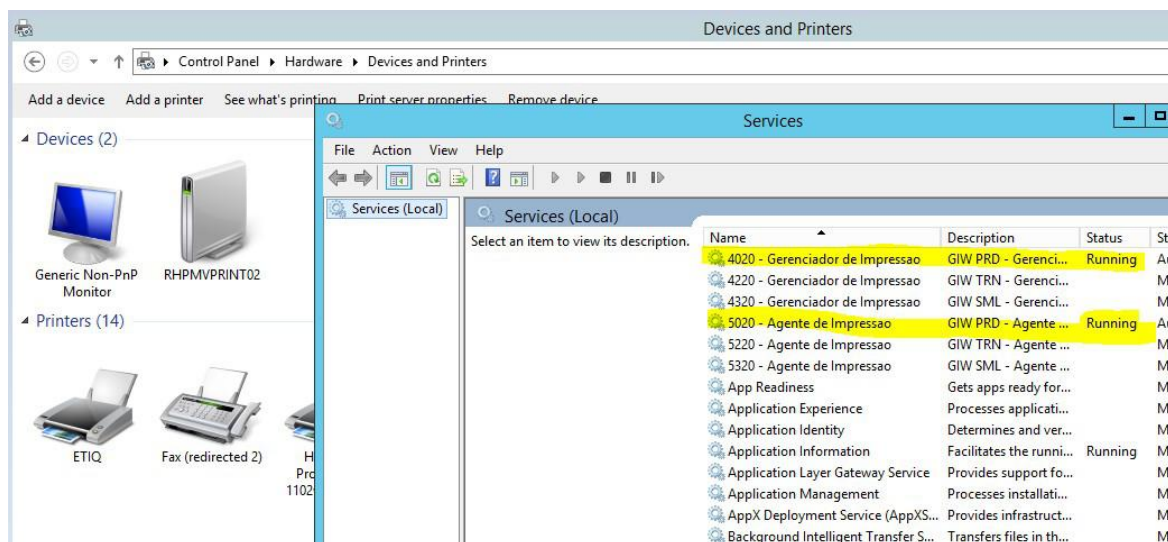

2. Acessar no navegador o link com o seguinte formato: <ip do servidor de impressões> : <porta do serviço do agente de impressões> / test . As impressoras configuradas devem ser exibidas na listagem de impressoras do teste, para certificar-se que as mesmas irão se comunicar.

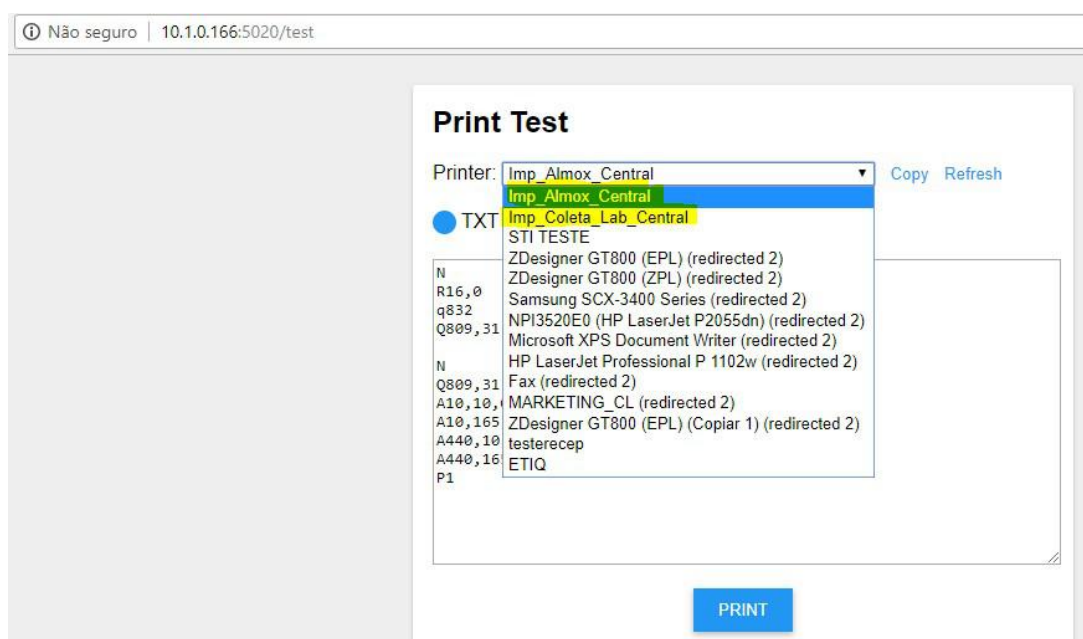

3. Para testar **impressoras térmicas**, deve ser selecionada a impressora configurada conforme o nome dado durante a configuração, marcada a opção “TXT” (deverá estar com a bolinha de seleção na cor AZUL), e apertar no “Print”. Caso seja impresso uma página de teste, significa que a comunicação entre o serviço do agente de impressão e a impressora está ok. Caso não saia nada, deverá ser revista a instalação da impressora térmica.

10.1.0.166:5020/test

Print Test

Printer: **Imp_Coleta_Lab_Central** [Copy](#) [Refresh](#)

☒ TXT ☐ PDF

```
N
R16,0
q832
Q809,31
N
Q809,31
A10,10,0,2,1,1,N,"XXXXXXXXXXXXX"
A10,165,0,2,1,1,N,"XXXXXXXXXXXXX"
A440,10,0,2,1,1,N,"TTTTTTTTTTTTTT"
A440,165,0,2,1,1,N,"TTTTTTTTTTTTTT"
P1
```

PRINT

4. Para testar **impressoras locais ou de rede que não sejam térmicas**, deve ser selecionada a impressora configurada conforme o nome dado durante a configuração, marcada a opção “PDF” (deverá estar com a bolinha de seleção na cor AZUL), e apertar no “Print”. Caso seja impresso uma página de teste, significa que a comunicação entre o serviço do agente de impressão e a impressora está ok. Caso não saia nada, deverá ser revista a instalação da impressora.

10.1.0.166:5020/test

Print Test


Printer: **Imp_Almoxt_Central** [Copy](#) [Refresh](#)

☐ TXT ☒ PDF


PRINT

- **Configuração do Gerenciador de Impressões Web (GIW)**


1. Acessar no servidor onde estão instalados os serviços do gerenciador de impressões, abrindo com o bloco de notas, o seguinte caminho: **C:\ > MV > apps > soulmv_(prd ou sml ou trn, dependendo do ambiente que está sendo configurado) > products > printing-manager-agent > config > application.properties**. Nesse arquivo, verificaremos o nome do agente de impressão que será utilizado de acordo com o ambiente que configuraremos. Geralmente o nome do agente é CENTRAL, mas é aconselhável verificar o nome do agente no arquivo, que em algumas instalações, pode ter o nome configurado de forma diferente;

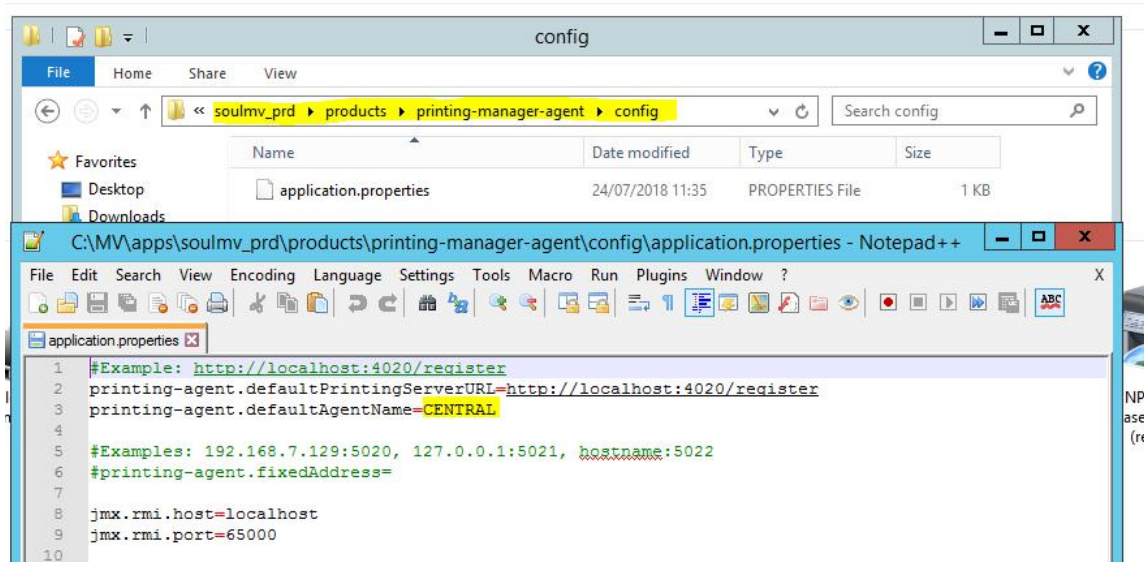

2. Acessar Serviços de Apoio > Global > Configurações > Hospital. Após isso, acessar a opção Parâmetros de Relatório e verificar se a configuração “Gerenciador de Impressão” está como “SIM”;

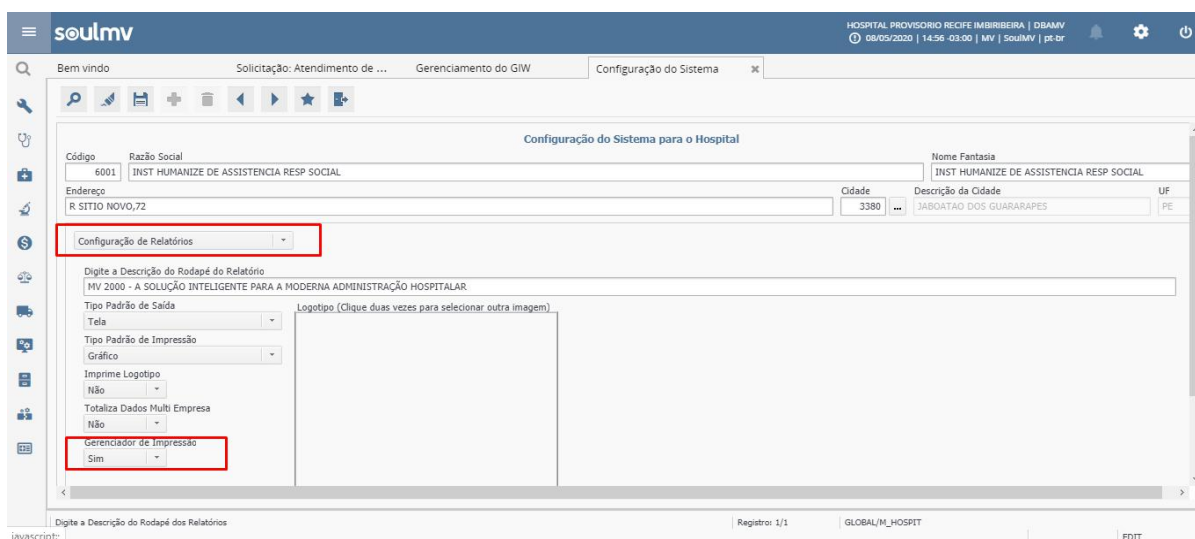

OBS: Para impressão de solicitações de estoque, pode ser necessário verificar se a chave DESTINO_IMPRESSAO, do MGES, está com o valor B para que as impressões sejam realizadas automaticamente. Para verificar, será necessário acessar Serviços de Apoio - Global - Configurações - Cadastro Geral de Parâmetros.

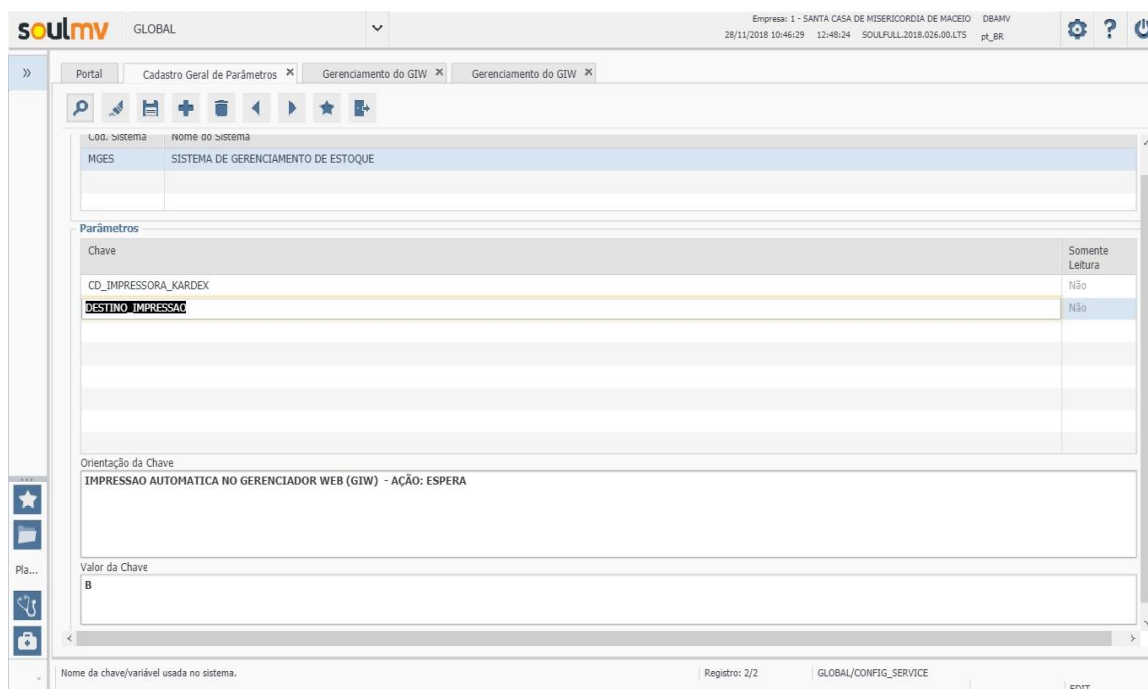


The screenshot shows the 'Cadastro Geral de Parâmetros' (General Parameter Registration) page for the 'MGES' system. The page is titled 'GLOBAL' and includes a sidebar with navigation icons. The main content area displays the following information:

Chave	Somente Leitura
CD_IMPRESSORA KARDEX	Não
DESTINO_IMPRESSAO	Não


Below the table, the 'Orientação da Chave' (Key Orientation) is set to 'IMPRESSAO AUTOMATICA NO GERENCIADOR WEB (GIW) - AÇÃO: ESPERA' (Automatic printing in the Web Manager - Action: Wait). The 'Valor da Chave' (Key Value) is set to 'B'.

3. Acessar **Apoio a TI > Administração do Sistema > Gerenciador de Impressões Web**;

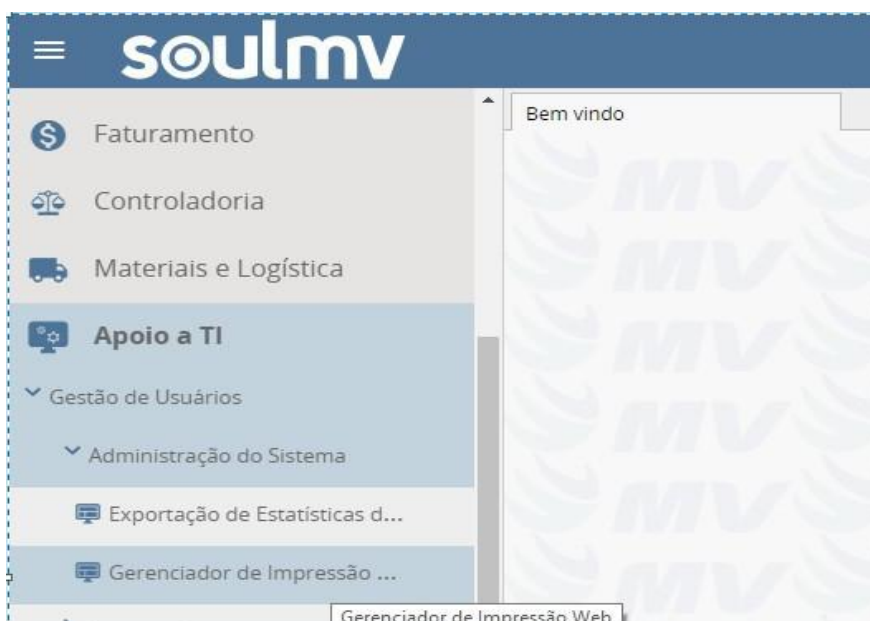

4. Dentro da aba **Manutenção**, vamos precisar preencher os seguintes campos:

- **Agente:** Nome do agente de impressão que verificamos no passo 2, referente ao ambiente que estamos configurando (PRD, SML ou TRN);
- **Terminal:** Nome do terminal de impressão que configuraremos no cadastro de máquinas para etiquetas de laboratório, através da chave "**IMPRESSORA_BARRAS_AMOSTRA**", e que configuraremos no cadastro do estoque para impressão de solicitações ao estoque, na aba "solicitações", preenchendo o campo "**Nome da Imp. da Solic. De Prod. p/ Imp. Automática no Estoque**";
- **Impressora:** Nome da impressora que configuramos inicialmente. Obs: No campo impressora, só deve ser preenchido com **impressoras que não são térmicas**, ou seja, as locais ou de rede para requisições de estoque;
- **Imp Térmica:** Nome da impressora térmica que configuramos inicialmente. Obs: Nesse campo **só deve ser preenchido com o nome das impressoras térmicas configuradas**, ou seja, as que se referem a etiquetas de laboratório.

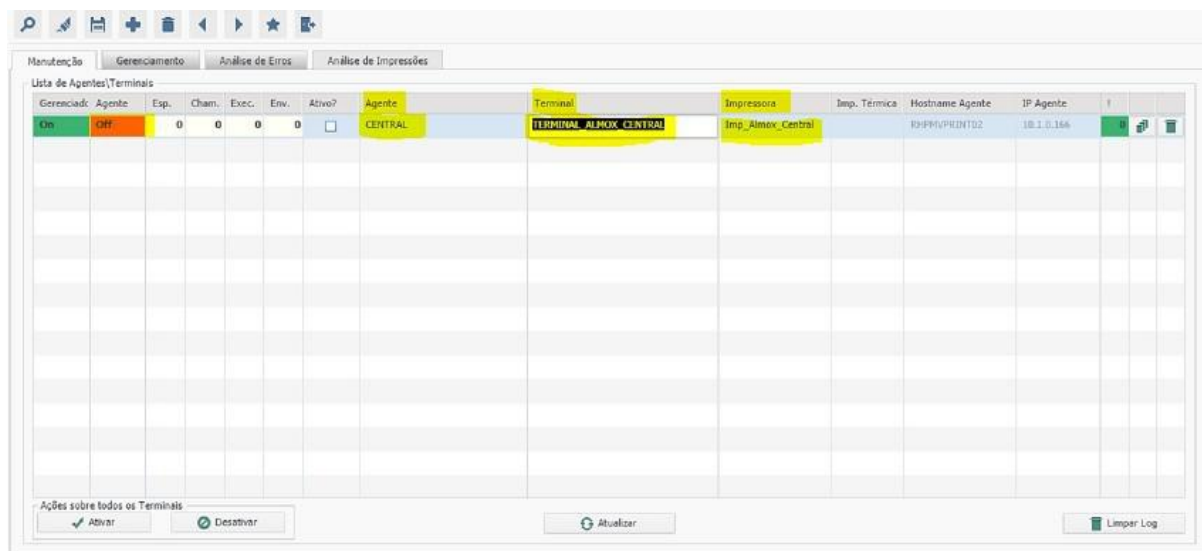

Gerenciado	Agente	Esp.	Cham.	Exec.	Env.	Ativo?	Agente	Terminal	Impressora	Imp. Térmica	Hostname Agente	IP Agente	I
On	OFF	0	0	0	0	☐	CENTRAL	TERMINAL_ALMOX_CENTRAL	Imp_Almoex_Central		R9999UPRINT02	10.1.0.166	

Ações sobre todos os Terminals:

Manutenção													
Gerenciamento													
Análise de Erros													
Análise de Impressões													
Lista de Agentes/Terminals													
Gerenciado	Agente	Esp.	Cham.	Exec.	Env.	Ativo?	Agente	Terminal	Impressora	Imp. Técnica	Hostname Agente	IP Agente	I
On	Off	0	0	0	0	☐	CENTRAL	TERMINAL_LAB_CENTRAL		Imp_Coleta_Li	RHPPVPRINT02	10.1.0.166	0

5. Podemos verificar que o campo agente está em vermelho e está com o nome off. Isso quer dizer que o agente ainda não está ativo e não está comunicando. Para ativá-lo, basta marcar o checkbox “Ativo?” e salvar. Após uns 10 segundos devemos clicar no botão “Atualizar” no fim da tela para que o status fique verde e mudo para on. Quando o status está on, quer dizer que a comunicação entre o GIW e o servidor de impressões está ok. Se permanecer off, pode ser necessário reavaliar as configurações feitas, ou consultar o Guia e o FAQ que estão disponíveis no MV Docs para realizar alguma consulta em relação a dúvida, ou até mesmo abrir um ticket para o suporte. Se estiver on será necessário testar as impressões e verificar se as mesmas serão exibidas na aba “Gerenciamento”, com todas as informações preenchidas conforme print a seguir;

OBS: Podemos direcionar múltiplas impressoras para o mesmo terminal, porém só podemos vincular um terminal por impressora.

Manutenção													
Gerenciamento													
Análise de Erros													
Análise de Impressões													
Lista de Agentes/Terminals													
Gerenciado	Agente	Esp.	Cham.	Exec.	Env.	Ativo?	Agente	Terminal	Impressora	Imp. Técnica	Hostname Agente	IP Agente	I
On	On	0	0	0	0	☒	CENTRAL	TERMINAL_ALMOX_CENTRAL	Imp_Almoxi_Central		RHPPVPRINT02	10.1.0.166	0
On	On	0	0	0	0	☒	CENTRAL	TERMINAL_LAB_CENTRAL		Imp_Coleta_Li	RHPPVPRINT02	10.1.0.166	0

Manutenção **Gerenciamento** Análise de Erros Análise de Impressões

Filtros

Data Inicial: 20/08/2018 Status: Agente: Terminal: Impressão:

Data Final: 20/08/2018 Ação: Chave: Valor: Tempo Impressão: Executar Filtro

Impressão	Título	Relatório	Usuário	Destino	Solicitante	Ação	Status	Nº Pag.	Erro
190	Relatório de Solicitação de Produtos	..PAGUAR_SOLSAI_PRO	CRISTIANO.ALVES	FARMCENTRAL30	MVBRRECHTB4304	Imprimir	Recebido	1	

Tempos Detalhes

Solicitado: 20/08/2018 08:35:26 Entrada Monitor: 20/08/2018 08:57:11 Entrada Executor: 20/08/2018 08:57:11 Envio para Agente: 20/08/2018 08:57:14

Previsão Impressão: Saída Monitor: 20/08/2018 08:57:11 Saída Executor: 20/08/2018 08:57:14 Recebido no Agente: 20/08/2018 08:57:14

Impressão: 20/08/2018 08:57:26 Confirmação: 20/08/2018 08:57:26

Tempo Total: 7

Ações: Reenviar Impressão, Suspendir Impressão, Excluir Impressão

Manutenção **Gerenciamento** Análise de Erros Análise de Impressões

Filtros

Data Inicial: 17/08/2018 Status: Agente: Terminal: Impressão:

Data Final: 17/08/2018 Ação: Chave: Valor: Tempo Impressão: Executar Filtro

Impressão	Título	Relatório	Usuário	Destino	Solicitante	Ação	Status	Nº Pag.	Erro
189	Etiqueta de Amostra	ETIQUETA	CRISTIANO.ALVES	ETIQ	STISECRETARIA	Imprimir	Recebido	1	
187	Etiqueta de Amostra	ETIQUETA	CRISTIANO.ALVES	ETIQ	STISECRETARIA	Imprimir	Recebido	1	

Tempos Detalhes

Solicitado: 17/08/2018 11:22:58 Entrada Monitor: 17/08/2018 11:23:01 Entrada Executor: 17/08/2018 11:23:01 Envio para Agente: 17/08/2018 11:23:01

Previsão Impressão: Saída Monitor: 17/08/2018 11:23:01 Saída Executor: 17/08/2018 11:23:01 Recebido no Agente: 17/08/2018 11:23:01

Impressão: 17/08/2018 11:23:01 Confirmação: 17/08/2018 11:23:01

Tempo Total: 0

Ações: Reenviar Impressão, Suspendir Impressão, Excluir Impressão

Data de Alteração	Autor
08/05/2020	Cristiano Gomes Alves – Consultor - Nordeste