



MV DOCS

Guia de configuração de etiquetas do Almoxarifado

Índice

Especificações técnicas	4
Configurações gerais	5
Configurando o ambiente.....	5
Executando os arquivos.....	10
Compartilhando a impressora	13
Configuração do estoque	14
Etiqueta do produto	14
Etiqueta do paciente.....	14
Impressão	16
Imprimindo a etiqueta do produto	16
Imprimindo a etiqueta do paciente	16



Assuntos abordados

- Especificações técnicas
- Configurações gerais
 - Configurando o ambiente
- Executando os arquivos
- Compartilhando a impressora
- Configuração do estoque
 - Etiqueta do produto
 - Etiqueta do paciente
- Impressão
 - Imprimindo a etiqueta do produto
 - Imprimindo a etiqueta do paciente

Consultas auxiliares

Manuais de Suprimentos¹

¹ <https://docs.mv.com.br/pages/releaseview.action?pagelId=8438469>



Especificações técnicas

Para realizar as configurações de utilização da etiqueta de produto e paciente, é necessário observar algumas informações importantes como: modelo da impressora, tamanho da etiqueta, posicionamento e cores da impressão.

Essas informações são importantes para garantir a qualidade da impressão das etiquetas do almoxarifado.

Seguem modelos de impressoras homologadas para impressão das etiquetas:


- Impressoras homologadas para linguagem EPL: Zebra TLP 2844
- Impressoras homologadas para linguagem ZPL: Zebra S4M, S600, TLP 2844-Z




Configurações gerais

Configurando o ambiente


Antes de iniciar a configuração do ambiente, é necessário verificar se o Java está atualizado para a última versão disponível no mercado.

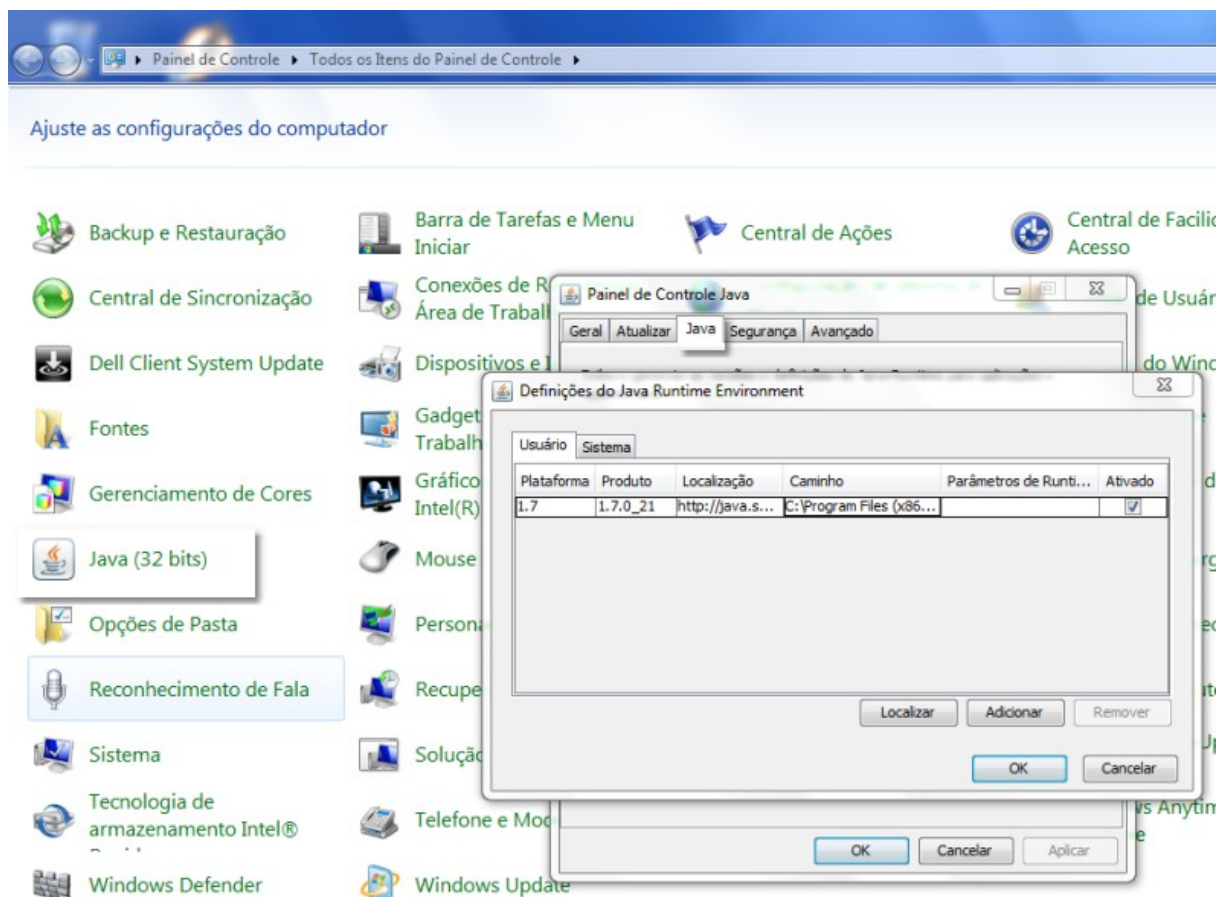

Após a verificação da versão do Java, é necessário excluir os certificados antigos da MV deixando apenas o atual, na aba "Segurança".

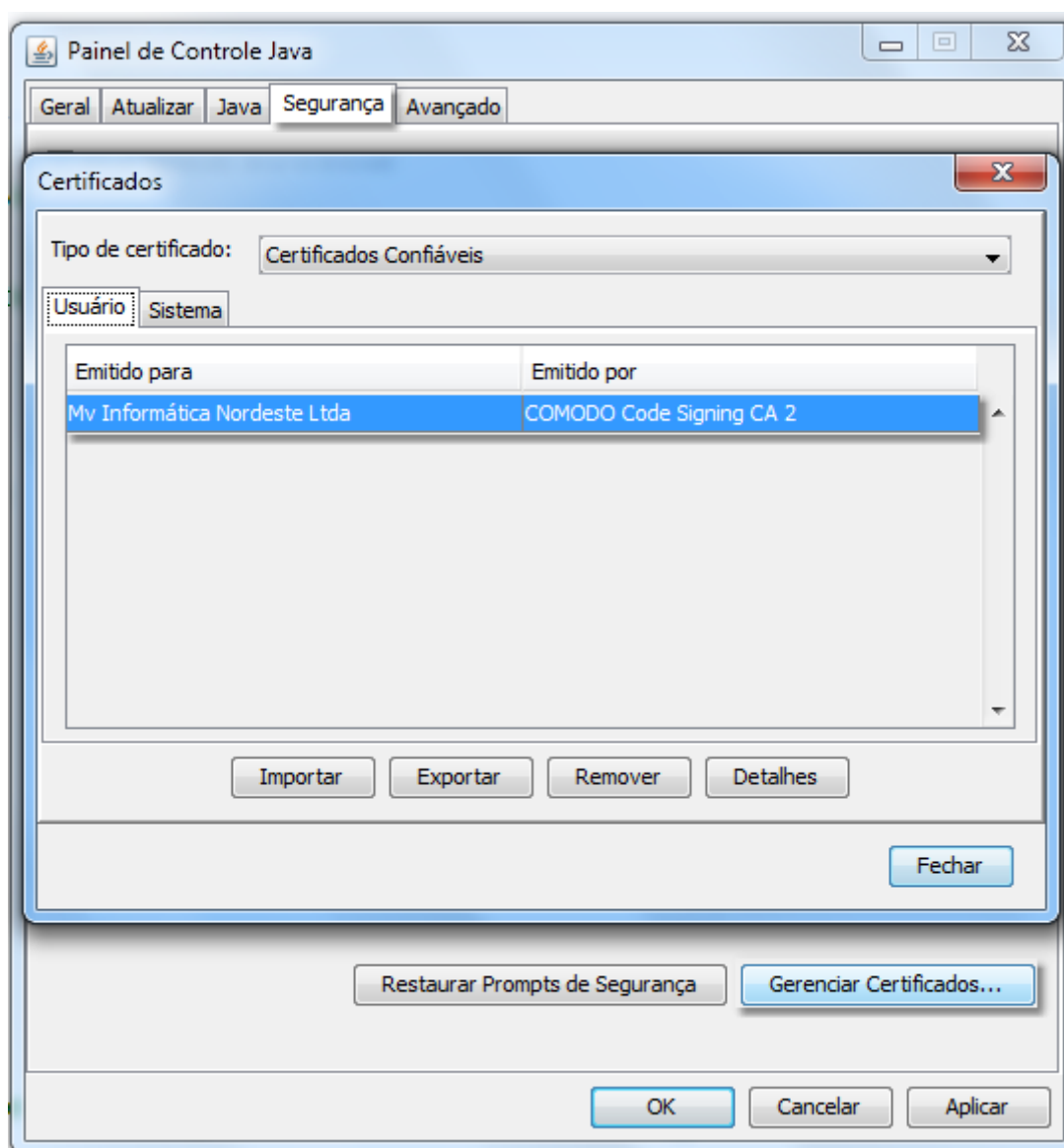

Na aba "Avançado", o usuário deve indicar que a verificação da revogação do certificando será feita a partir das lista de revogação.

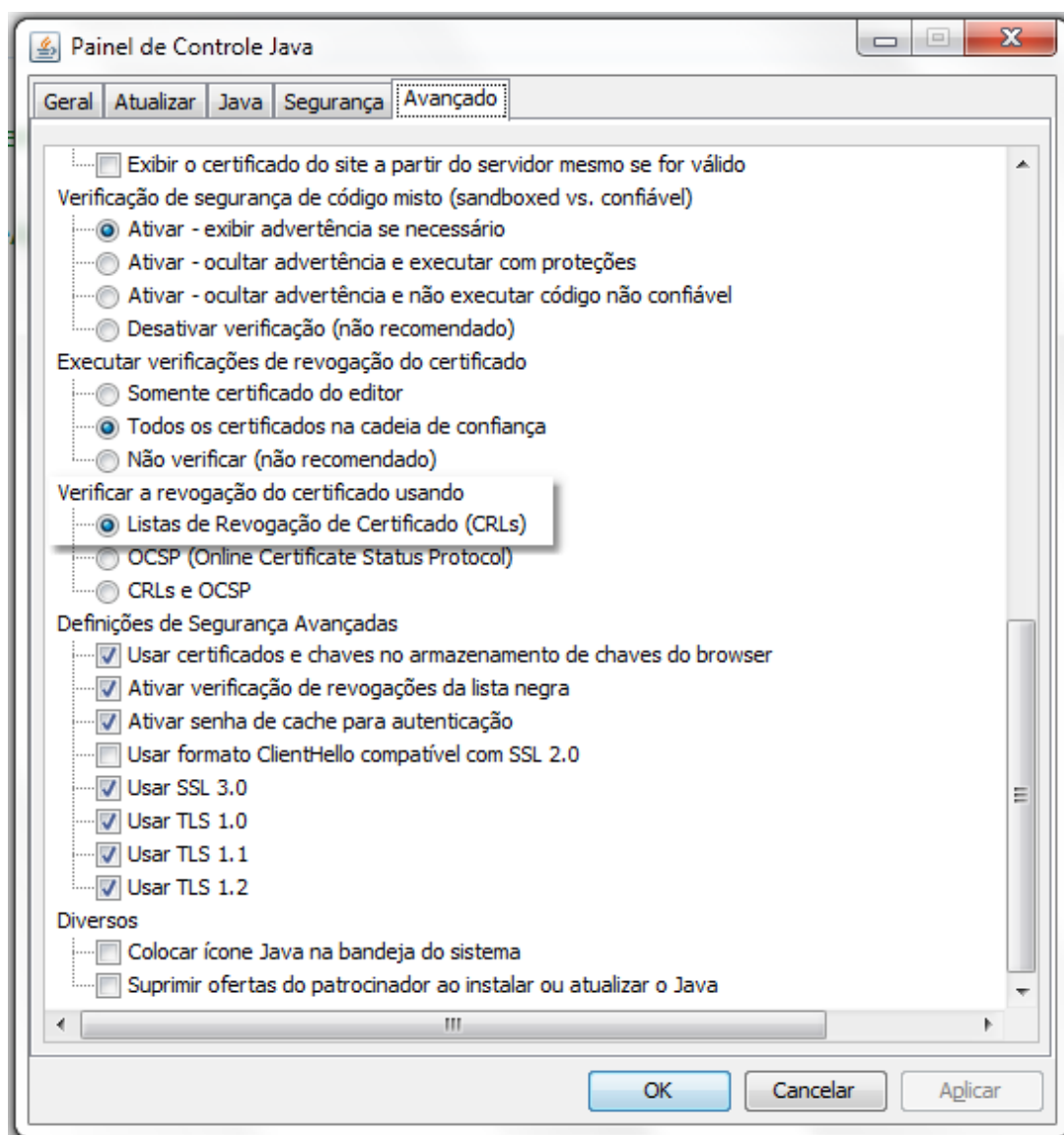


Importante


Após realizar os procedimentos informados, o usuário deve excluir os históricos de navegação e reiniciar a máquina antes de iniciar o processo de criação de variáveis.

Criando as variáveis

Para criar a variável, o usuário deve acessar a pasta "Sistema" do Painel de Controle.

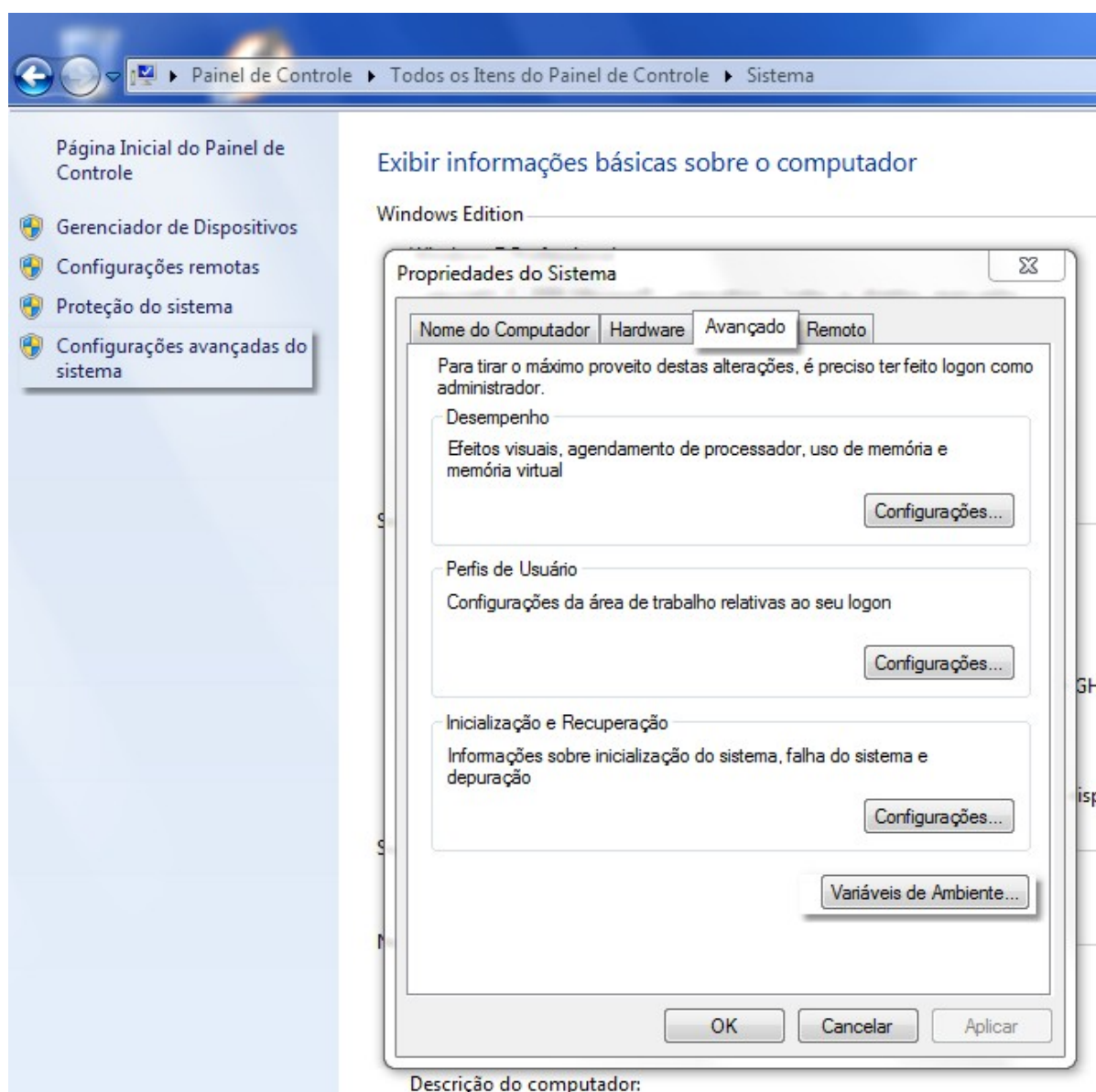


Na aba "Avançados", clicar no botão < Variáveis de Ambiente... > e depois no botão < Novo... > para criar a variável "HOME_JAVA". No campo "Valor da variável", o usuário deve informar o caminho no qual o Java está instalado.

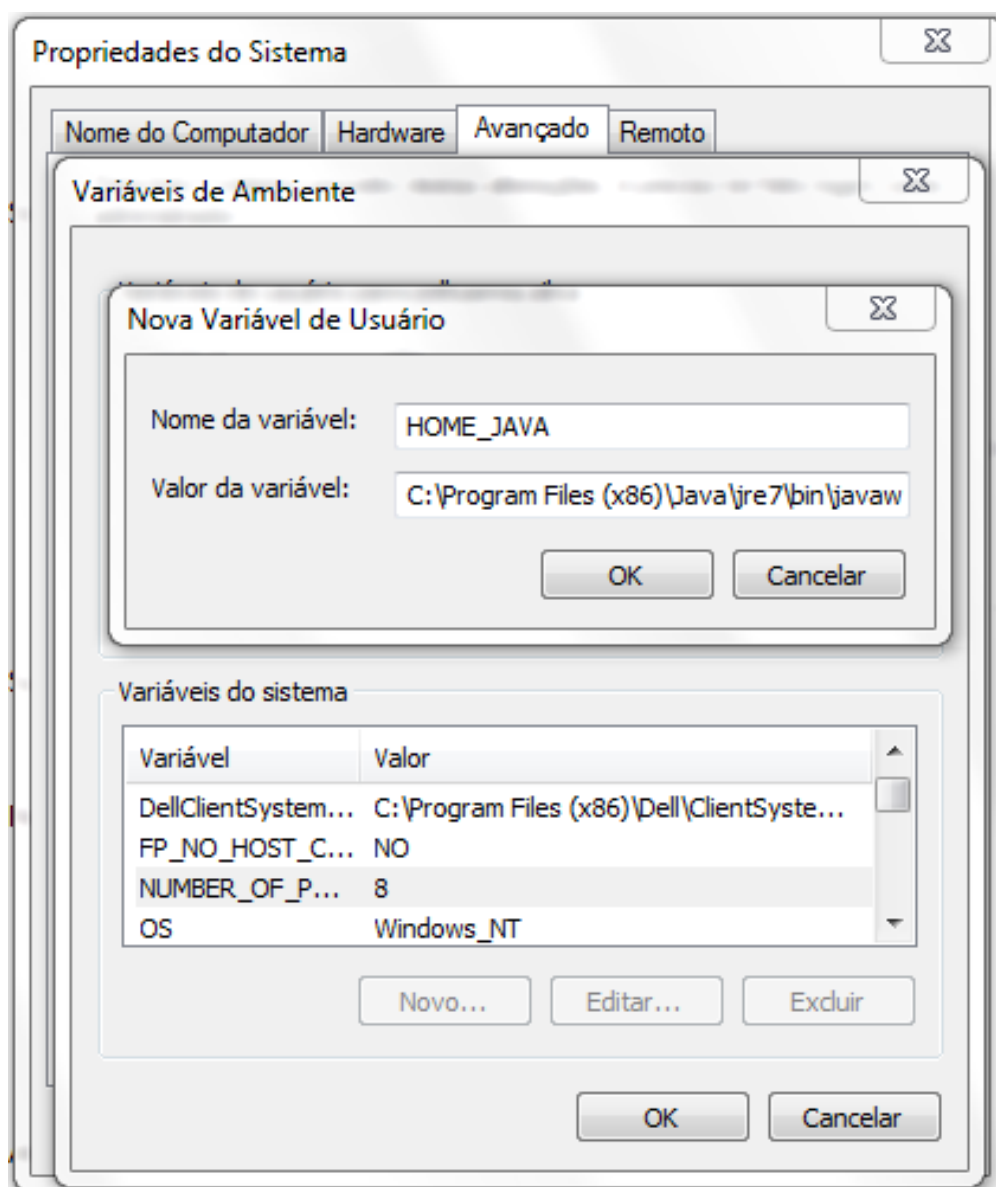


Selecionar a variável "Path", acrescentando ao valor existente a seguinte informação:

- ;%JAVA_HOME%\bin.

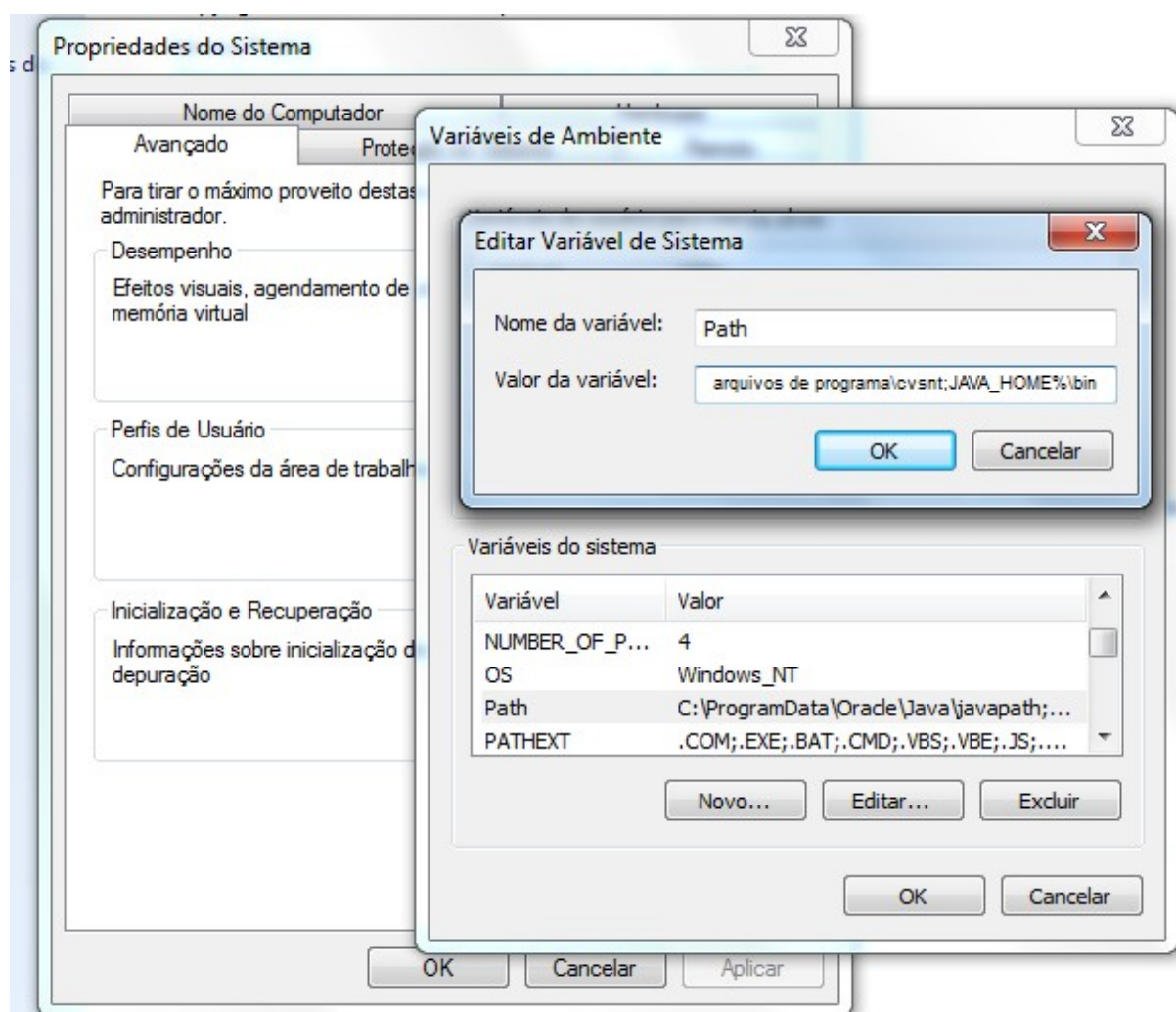


Executando os arquivos

Após finalizar as variáveis, o usuário deve executar o arquivo .bema com o perfil administrador;

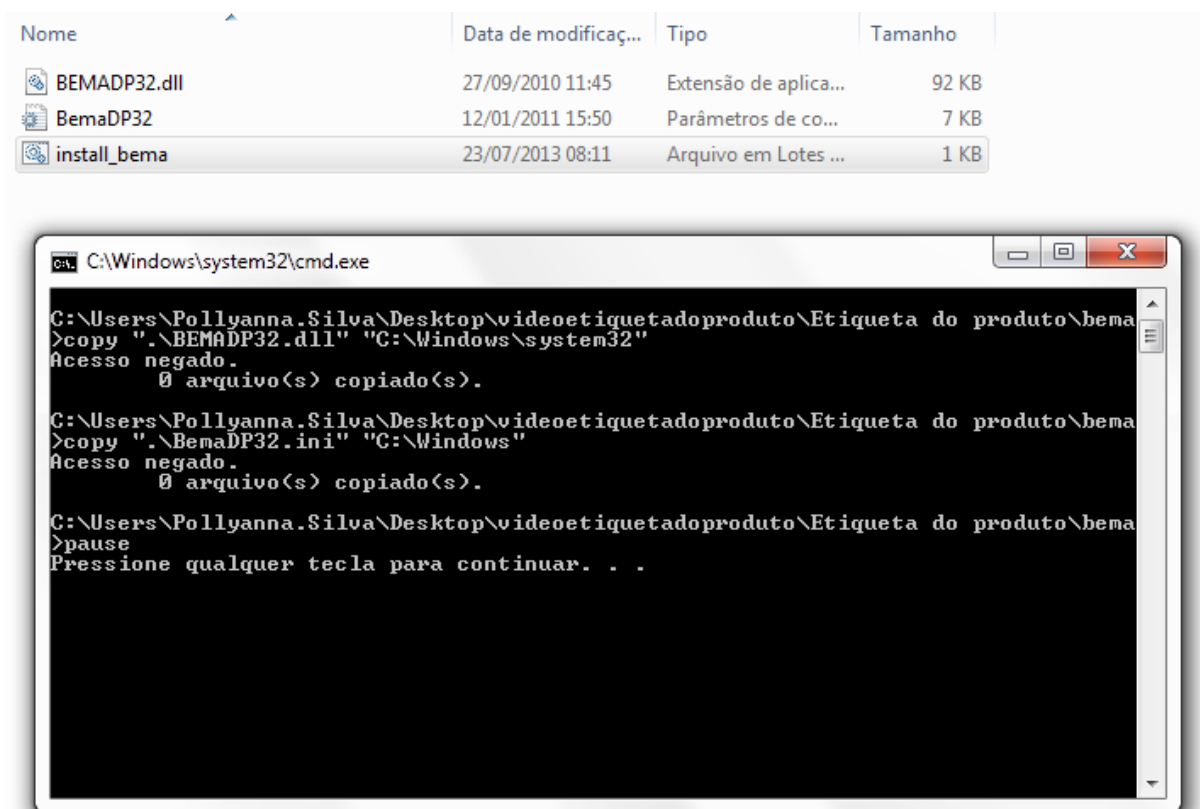

E executar o arquivo .rxtx, com também o perfil administrador.

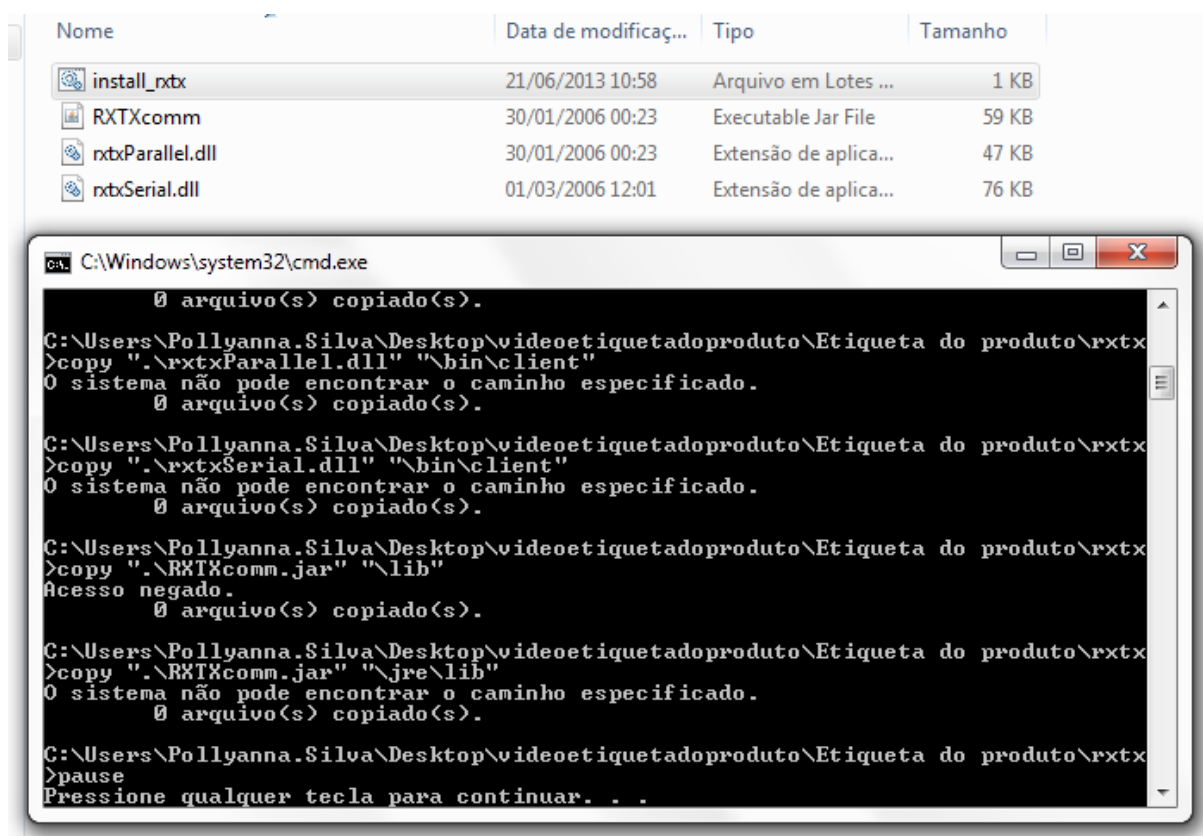

Importante

Para ter acesso aos arquivos .bema e .rtx, o usuário deve acessar o Portal de Atendimento ao Cliente e baixar o "Pacote de instalação de etiquetas do Almoxarifado".




Compartilhando a impressora

Para compartilhar a impressora, o usuário deve acessar a impressora a ser utilizada e na aba "Compartilhamento" marcar o check box "Compartilhar esta impressora" e nomear um compartilhamento.

No Prompt de Comando, verificar o IP da máquina e no comando "net use" informar a porta, o IP da máquina e o compartilhamento, conforme exemplo:

- net use LPT2 \\192.168.3.221\Zebra.

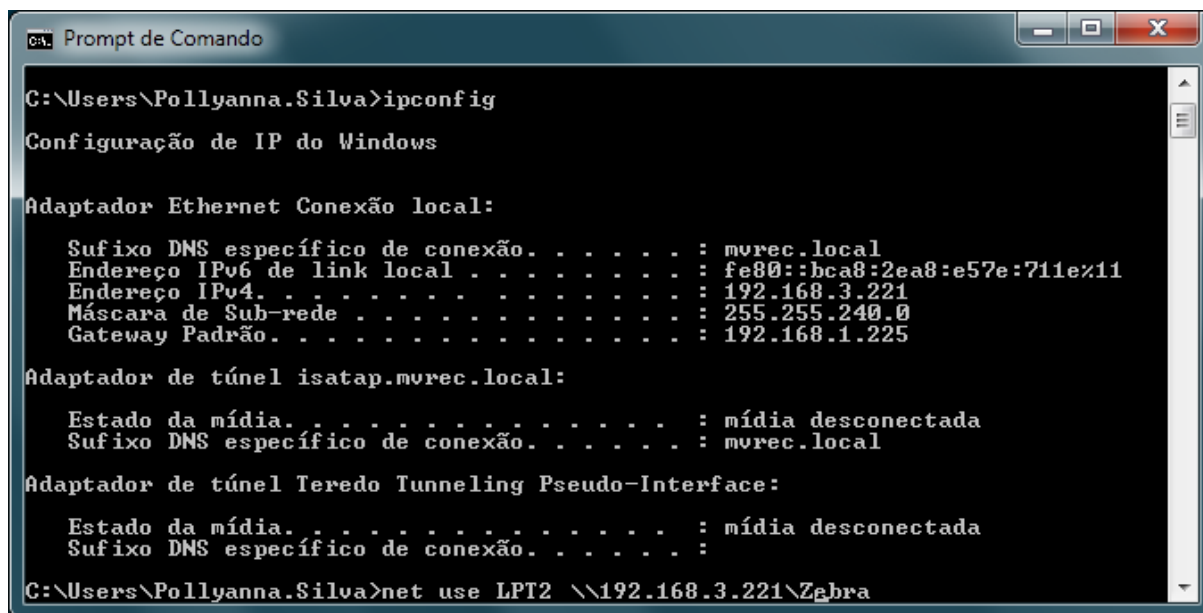

```
C:\Users\Pollyanna.Silva>ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador Ethernet Conexão local:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : mvrec.local
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::bca8:2ea8:e57e:711e%11
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.3.221
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.240.0
    Gateway Padrão. . . . . : 192.168.1.225

Adaptador de túnel isatap.mvrec.local:

    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : mvrec.local

Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

C:\Users\Pollyanna.Silva>net use LPT2 \\192.168.3.221\Zebra
```

Importante

Ao executar o comando "net use", caso seja apresentado o erro "66", o usuário deve verificar se o caminho foi informado corretamente, sem espaços indevidos.



Configuração do estoque

Etiqueta do produto

O usuário deverá acessar a tela "[Estoque](#)²", informar o estoque desejado e na aba "Impressora" informar o nome da porta compartilhada, no caso do exemplo a LPT2.

Código	Descrição	Tipo
2	ALMOXARIFADO CENTRAL	Distribuição

Configuração do Estoque
Multi-Empresa
1 HOSPITAL MODELO DO MV (CONSOLIDADORA)
Cod Barras: Sim, Permite Produto: Sim, Custo Médio: Sim, Transf. Cons?: Sim, Processo de Cotas: Cota
Usa Endereço de Produtos?: Não, Utiliza Conferência de Contagem?: Não, Exige Validação da Farmácia?: Sim
Cód. contábil para contagem de Crédito: 708 - 13 SALARIO
Cód. contábil para contagem de Débito: 708 - 13 SALARIO
Setor: 83 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Cota: Cota, Contato do Estoque: Contato do Estoque, Kits: Kits, Imp. Térmica: Imp. Térmica, Questionário: Questionário

Impressoras
Nome da Impressora de Código de Barras dos Produtos do Estoque: LPT2
Etiquetas impressas na confirmação da solicitação ou na entrada de con...

Tipo	Zebra	Layout	Nome da Impressora	Nome do Relatório	Nr Copias	Tipo
Paciente	☒	Etiqueta Pac Des Int	C:\\TEMP\\ETQ_TST_INC.TXT			

Controle de Impressão de cód. Barras
Etiqueta: ... Código: ...

Etiqueta do paciente

No caso da etiqueta de paciente, o usuário deve acessar a tela "Estoque" e no bloco "Etiquetas impressas na confirmação da solicitação ou na entrada de con..", informar o layout "Paciente" e a porta compartilhada (LPT2).

² <https://docs.mv.com.br/display/MGES/Estoques>



Impressão

Imprimindo a etiqueta do produto

Para realizar a impressão da etiqueta do produto, o usuário deve acessar a tela "Etiqueta de produtos" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documentos de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta de Produtos), informar o estoque configurado na tela "[Estoques](#)³", selecionar a etiqueta, o produto, a unidade, a quantidade padrão, o lote e a quantidade de etiquetas a serem impressas;

Para concluir a impressão basta acionar o botão < Imprimir >.

Imprimindo a etiqueta do paciente

Para realizar a impressão da etiqueta do paciente, o usuário deve acessar a tela "[Atender](#)⁴", selecionar a solicitação, marcar o check box "Imp" e acionar o botão < 6 - Menu de Impressão >.

³ <https://docs.mv.com.br/display/MGES/Estoques>

⁴ <https://docs.mv.com.br/display/MGES/Atender>



Solicitação	Prescrição	Estoque	Situação	Tipo Solicitação	Solicitante	Atendimento	Aviso Cirurgia	Unid. Intern.	Data	Hora	1ª Neces.	Impres.	Imp.	Urg.
49591		4	Confirmado	Devol - Paciente		9944		1	31/01/0003 000	11:46		Sim	☒	☐
49611		4	Confirmado	Devol - Paciente		29092		1	31/01/0003 000	12:02		Sim	☐	☐
49623		4	Confirmado	Devol - Paciente		26533		1	31/01/0003 000	12:23		Sim	☐	☐
49624		4	Confirmado	Devol - Paciente		29398		1	31/01/0003 000	12:27		Sim	☐	☐
8385		4	Confirmado	Devol - Paciente		1735		4	04/12/2002	15:08		Sim	☐	☐
6248		4	Confirmado	Devol - Paciente		1062		11	05/12/2002	08:34		Não	☐	☐
6339		4	Confirmado	Devol - Paciente		2450		11	05/12/2002	09:30		Não	☐	☐
8401		4	Confirmado	Devol - Paciente		2450		11	05/12/2002	15:23		Não	☐	☐
6242		4	Confirmado	Devol - Paciente		3060		11	06/12/2002	08:29		Não	☐	☐

1 - Visualizar os Produtos

2 - Confirmar Produtos

3 - Confirmação Automática

4 - Reabrir Movimentação

5 - Excluir Confirmação

6 - Menu de Impressão

Outras Informações da Solicitação

Estoque

DISPENSACAO DE FARMACIA

Unidade de Internação

SETOR L

Leito

Sector

60 POSTO L

Agrup.

Paciente

JOSE GERALDO ANDRADE ALVES

Data Alta

21/11/2007

Hora Alta

18:36

Médico Solicitante

ULISSES HORST DUQUE

Estoque Solicitante

Origem

Cód. Paciente - Integração

Nome Paciente - Integração

Cód. Atendimento - Integração

Usuário Solicitação

MARINETE DE ALMEIDA OLIVEIRA (L.B)

Usuário Movimentação

PAULO SERGIO NASCIMENTO COUTINHO (FAR)

Requisição

Observação

Solicitações em atraso

No menu de impressão, o usuário deve acionar o botão < 1 - Imprimir Etiqueta >, informar o número de cópias e acionar o botão < Imprimir > para concluir a impressão.